



Manuale d'uso

NeuronUP Rehab



CONTROLLO DELLE VERSIONI			
Versione	Data	Revisione	Stato
1.0	17.11.2025	Creazione del documento.	In vigore

Prima di utilizzare questo documento, assicurarsi di consultare la versione più aggiornata dello stesso.

Data di pubblicazione: 17 novembre 2025.



FABBRICANTE:
NEURONUP SL
Calle Piqueras 31 Planta 5, 26006 Logroño.
La Rioja, Spagna.



NeuronUP Rehab

Finalità prevista - NeuronUP Rehab è un software progettato per la neuroriabilitazione e la stimolazione cognitiva in utenti in trattamento per trauma cranico acquisito, malattie neurodegenerative, disabilità intellettiva, malattia mentale e disturbi del neurosviluppo.

Utenti previsti - NeuronUP Rehab è un programma progettato per essere utilizzato da utenti professionali: psicologi e neuropsicologi, tra gli altri professionisti sanitari, per pianificare e svolgere sessioni di neuroriabilitazione e stimolazione cognitiva. Inoltre, nello svolgimento delle attività e delle sessioni di trattamento, gli utenti profani (pazienti) interagiscono con la piattaforma per realizzare il trattamento.


Specificazione dei benefici clinici attesi - NeuronUP consente di creare trattamenti personalizzati attraverso attività di stimolazione e fornisce ai professionisti risorse per la gestione degli utenti, inclusi un pianificatore di sessioni e programmi, la creazione di schede utente e il monitoraggio dei risultati. La piattaforma dispone inoltre di un modulo di formazione continua, che include conferenze di specialisti.

L'integrazione della piattaforma NeuronUP come strumento complementare alla terapia occupazionale convenzionale porta a miglioramenti nello stato cognitivo e nella qualità della vita degli anziani con malattia di Alzheimer (MA) (Fabara-Rodríguez et al 2024). Inoltre, è stato dimostrato che, attraverso un adeguato allenamento cognitivo, NeuronUP è benefico per prevenire, stabilizzare o rallentare il declino cognitivo nelle persone di età compresa tra 60 e 70 anni (Mendoza-Laiza et al, 2018).

NeuronUP include attività con concetti applicati alla vita quotidiana; è stato osservato che l'esecuzione di programmi adeguati che includono concetti applicati alla vita di tutti i giorni porta a un miglioramento della plasticità neuronale e fornisce maggiore autonomia e indipendenza al paziente nella sua vita (Mendoza-Laiza et al., 2018).

In pazienti con malattia di Parkinson, utilizzando un protocollo adeguato, si è osservato un miglioramento dei sintomi motori (Arroyo-Ferrer et al., 2025).

Per quanto riguarda l'aderenza all'intervento, NeuronUP ha ottenuto in programmi della durata di 12 mesi (pazienti con deterioramento cognitivo e rischio di AD) un'aderenza media all'intervento di allenamento cognitivo del 73,8% (intervallo di confidenza [IC] al 95%: 71,5-76,0) (Soldevila-Domenech et al. 2023).

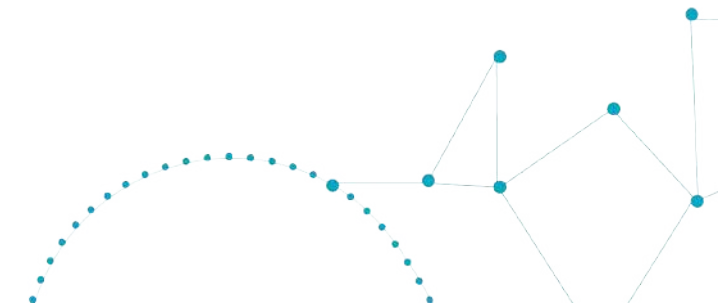


NeuronUP Rehab

Condizioni mediche e popolazione prevista - NeuronUP è progettato per essere utilizzato nel trattamento di pazienti previamente diagnosticati con diverse funzioni cognitive compromesse; tali alterazioni sono comuni in varie condizioni mediche e il trattamento si basa sulla stimolazione o riabilitazione di queste funzioni. I gruppi di pazienti a cui è rivolto sono i seguenti:

- Pazienti con malattie neurodegenerative per la stimolazione cognitiva e funzionale: Alzheimer, Parkinson, Huntington e Sclerosi Multipla.
- Pazienti con danno cerebrale acquisito per la riabilitazione dei processi compromessi da una lesione cerebrale: traumatismo cranioencefalico, ictus, tumori cerebrali, anossia cerebrale, infezioni.
- Pazienti con disabilità intellettiva per la stimolazione e il lavoro sulle funzioni cognitive: sindrome di Down, malformazioni cerebrali, infezioni cerebrali, prematurità, ipotiroidismo, influenze ambientali avverse, sindrome dell'X fragile, sindrome di Prader-Willi, sindrome di Klinefelter, malattia di Tay-Sachs, fenilchetonuria.
- Pazienti con disturbi della salute mentale nel trattamento del deterioramento cognitivo: schizofrenia e disturbo bipolare.
- Pazienti con disturbi del neurosviluppo per il trattamento dei deficit associati al disturbo: disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), disturbo dello spettro autistico (ASD), disturbo dell'apprendimento, disturbo della comunicazione.

NeuronUP può essere utilizzato anche in popolazioni sane per finalità pedagogiche.

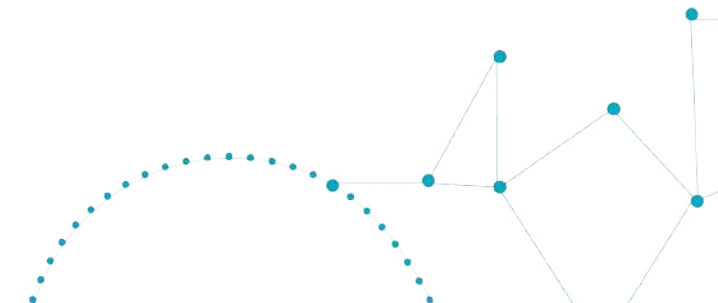

Requisiti di Sistema

Browser web: NeuronUP ha validato il suo funzionamento con il browser Google Chrome nelle versioni aggiornate.

Altri browser come Mozilla Firefox, Edge o Safari possono presentare qualche tipo di anomalia non rilevata nelle prove di validazione.

Configurazione del browser: Per un corretto funzionamento della piattaforma, è necessario che il browser abbia JavaScript abilitato.

È consigliabile accettare i cookie e consentire l'uso dello storage locale (localStorage), dove verranno salvate le preferenze dell'utente e altri dati della sessione.

La piattaforma non mostra pubblicità; tuttavia, necessita di comunicare con servizi esterni (registrazione degli errori, metriche di utilizzo, ecc.). Alcuni blocchi pubblicitari o tracker possono impedire queste connessioni. In caso di funzionamento anomalo, si raccomanda di consentire il dominio di NeuronUP nel blocco pubblicitario.

Connettività Internet: Per un'esperienza fluida si raccomanda una velocità minima di 10 Mbps in download e 5 Mbps in upload per utente. In caso di accesso simultaneo dallo stesso centro di lavoro, questa velocità deve essere aumentata in base al numero di utenti concorrenti.


Si consiglia una connessione stabile, preferibilmente in fibra ottica o ADSL, per garantire la continuità del servizio e minimizzare le interruzioni.

Esistono attività con un elevato contenuto aggiuntivo, come giochi e schede digitali che includono immagini, audio o video. Il tempo di attesa per il caricamento completo dell'attività può aumentare se la velocità della connessione Internet è lenta o se l'hardware del computer non è sufficientemente potente.

Tipo di dispositivo: La piattaforma è ottimizzata per computer desktop, portatili e tablet. Il suo funzionamento è stato inoltre validato su schermi interattivi fino a 65 pollici.

NeuronUP implementa un design web adattabile (Responsive Design). Alcune funzionalità possono richiedere un processore Dual-Core o superiore e 4 GB di RAM o più per garantire un'esperienza fluida.

Software aggiuntivo: NeuronUP genera documenti in formato PDF, pertanto si consiglia di installare un lettore specifico per questo tipo di file.

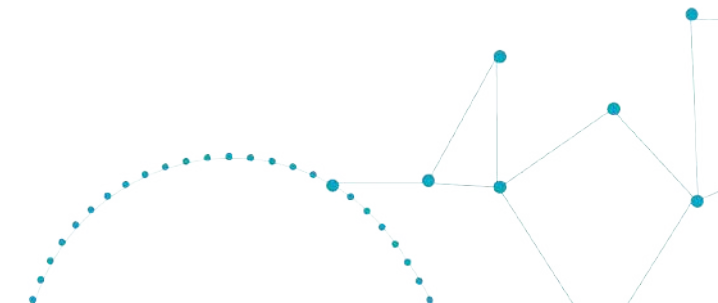



Avvertenze

Le attività di riabilitazione e stimolazione cognitiva devono essere prescritte e supervisionate da un professionista adeguatamente formato e con esperienza nella progettazione, nel monitoraggio e nell'adattamento di interventi neuropsicologici.

I risultati ottenuti nelle attività e i dati numerici forniti dal programma mostrano esclusivamente la performance dell'utente durante le attività; non sono metriche neurologiche standardizzate. Non devono essere utilizzati per prendere decisioni a fini terapeutici o diagnostici. NeuronUP Rehab non è un prodotto a fini diagnostici, ma uno strumento per la riabilitazione e la stimolazione cognitiva.

Qualsiasi incidente grave correlato al prodotto deve essere comunicato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente o il paziente.

Non condividere la propria password. Se si ritiene che qualcun altro possa avervi avuto accesso, è possibile modificarla nel proprio profilo utente.

I pazienti che necessitano di reimpostare la propria password per svolgere le sessioni in NeuronUP2GO devono mettersi in contatto con il proprio professionista sanitario.

Precauzioni

I pazienti con epilessia fotosensibile diagnosticata o sospetta possono utilizzare il software solo sotto la supervisione di professionisti o di un caregiver responsabile.


Alcune persone sono sensibili a luci intermittenti, lampeggianti o a pattern geometrici e possono andare incontro a crisi epilettiche.

Se il paziente manifesta malessere, disturbi visivi o convulsioni, deve interrompere immediatamente l'allenamento e consultare un medico.

Le seguenti attività incorporano luci intermittenti, lampeggianti o pattern geometrici:

- Separa gli insetti
- Comincia la partita!
- Numeri irrequieti
- Codice nascosto
- Colori in movimento
- Conquista dello spazio
- Colpire il mostro
- Scoppia i palloncini

Valutare se è necessario che il paziente effettui delle pause durante le sessioni per evitare affaticamento mentale.

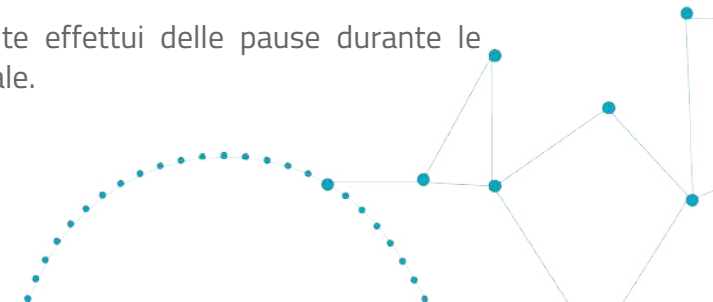

Informazioni di contatto

Asistencia y soporte

Asistencia en problemas técnicos o dudas sobre el funcionamiento de NeuronUP:


- **Teléfono:** +39 3514085110
- **WhatsApp:** +39 3514085110
- **Correo electrónico:** neuronup.it@neuronup.com

Contacto del fabricante: NeuronUP SL.

- **Dirección:** C. Piqueras, 31, 5, planta, 26006 Logroño, La Rioja. España.
- **Teléfono:** + 34 941 28 72 38
- **Correo electrónico:** gestion@neuronup.com

Contacto protección de datos (DPO)


- **Teléfono:** + 34 941 28 72 38
- **Correo electrónico:** lopd@neuronup.com

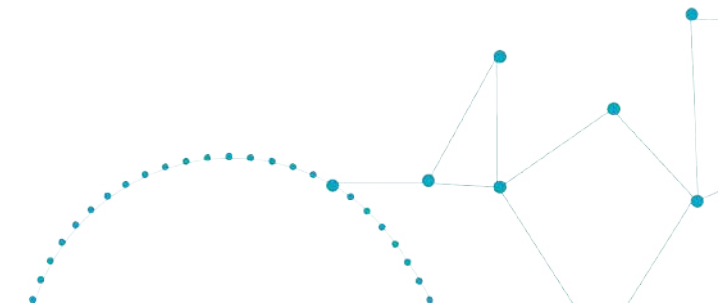

Come utilizzare NeuronUP Rehab?

Questo manuale fornisce informazioni sui seguenti temi:

1. La piattaforma: come accedere, informazioni generali, moduli
2. Creare e configurare un profilo professionale
3. Creare e utilizzare un profilo di utente profano (per la gestione di utenti/pazienti/studenti)
 - a. Creare un report
4. Attività digitali e cartacee
5. Lavorare con le sessioni
6. Lavorare con i programmi
7. Risultati
8. Come lavorare con più utenti contemporaneamente
9. Come lavorare con utenti da remoto (sessioni per casa)
10. Risorse di supporto

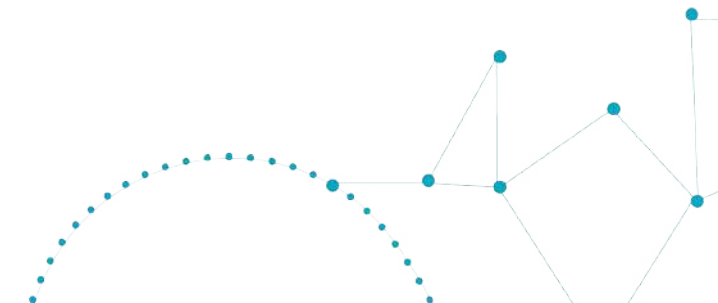

1. La piattaforma

Come accedere, informazioni generali, moduli

Come accedere a NeuronUP

The screenshot shows the NeuronUP login interface. It features the NeuronUP logo at the top, followed by the text 'Iniciar Sesión'. Below this are two input fields: 'Usuario/Email *' and 'Contraseña *'. The 'Usuario/Email *' field is highlighted with an orange box and labeled 'Email'. The 'Contraseña *' field is also highlighted with an orange box and labeled 'Password'. Below the password field is a link that says '¿Has olvidado tu contraseña?' which is highlighted with an orange box and labeled 'Recuperare la password'. Below these fields is a blue button labeled 'INICIAR SESIÓN'. At the bottom, there is a link '¿No trabajas con NeuronUP aún? Prueba gratuita de NeuronUP' and a footer with links for 'Política de privacidad', 'Aviso legal', 'Política cookies', and 'Condiciones de servicio'. A security notice at the bottom states: 'Cuando trabajes en varios ordenadores, asegúrate de cerrar sesión al terminar. Esto protegerá tu cuenta y reducirá problemas por múltiples conexiones.'

Per accedere a NeuronUP è necessario effettuare il login su <https://app.neuronup.com/>

Sono richieste le credenziali con cui si è registrati (**e-mail** e **password**).

Nel caso in cui si dimentichi la password, è possibile recuperarla tramite il link "**Hai dimenticato la password?**", situato sopra il pulsante "**Accedi**".



È **fondamentale non condividere la password** per garantire la riservatezza sia del professionista che degli utenti con cui lavora.


Se si sospetta che un'altra persona abbia avuto accesso alla password, questa può essere modificata dal profilo del professionista.

Per farlo, si accede alla sezione "Gestire il profilo professionale" cliccando sulla foto del profilo.



NeuronUP Rehab

INFORMAZIONI GENERALI

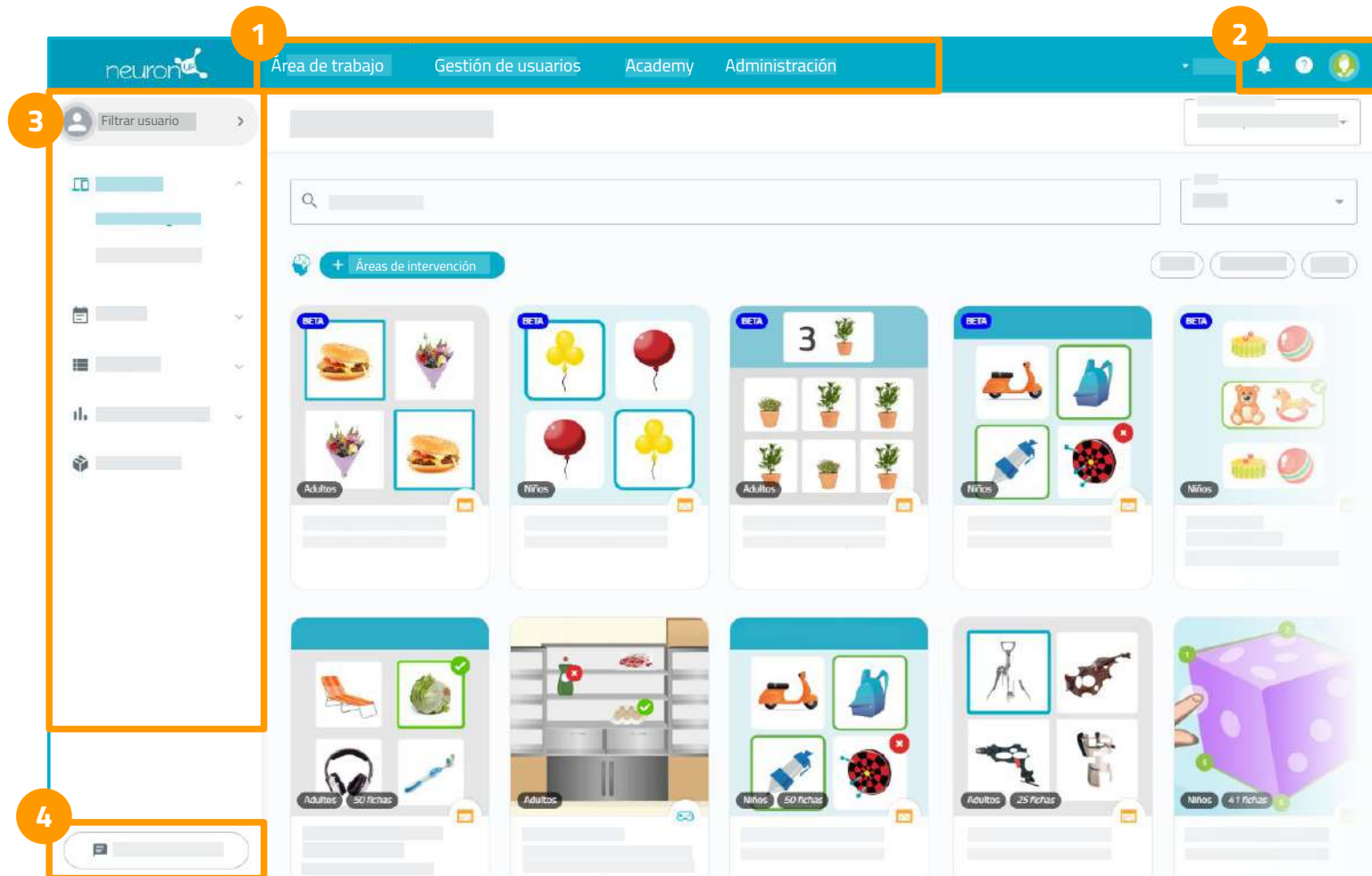


Lo schermo e il menu laterale mostrano diverse sezioni, aree o opzioni a seconda del modulo selezionato.

1. Moduli della piattaforma
2. Notifiche, domande frequenti, accesso diretto al profilo professionale e **configurazione di NeuronUP**.
3. Menu laterale
4. Chattare con il supporto


Nelle pagine seguenti vengono descritti in dettaglio i diversi moduli disponibili in NeuronUP Rehab.

NeuronUP Rehab

MODULI DELLA PIATTAFORMA

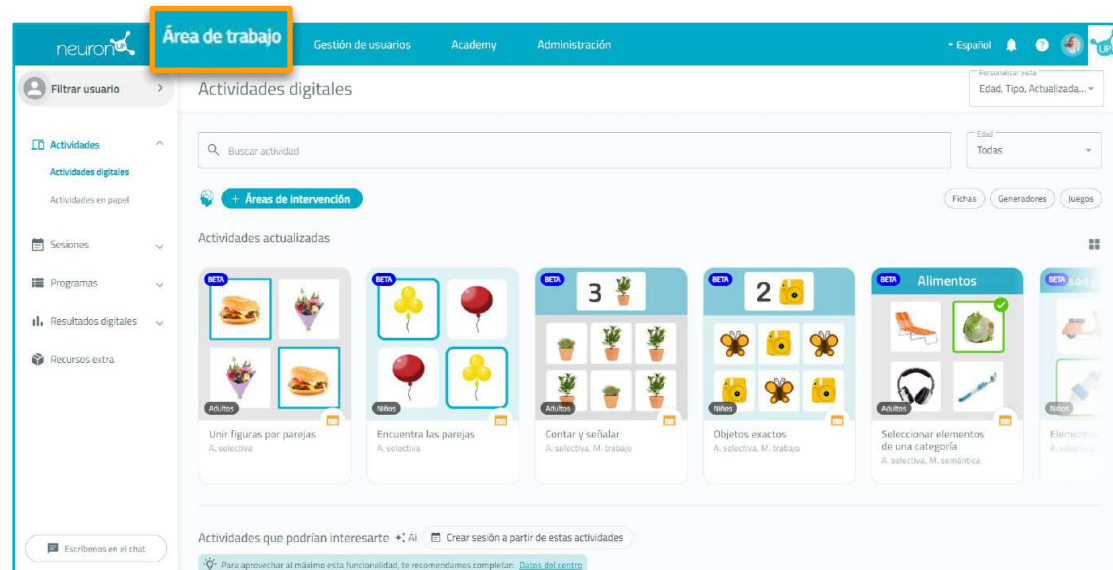

Area di lavoro: Modulo principale di NeuronUP Rehab, dove vengono visualizzate le attività disponibili per lavorare durante le interventi.

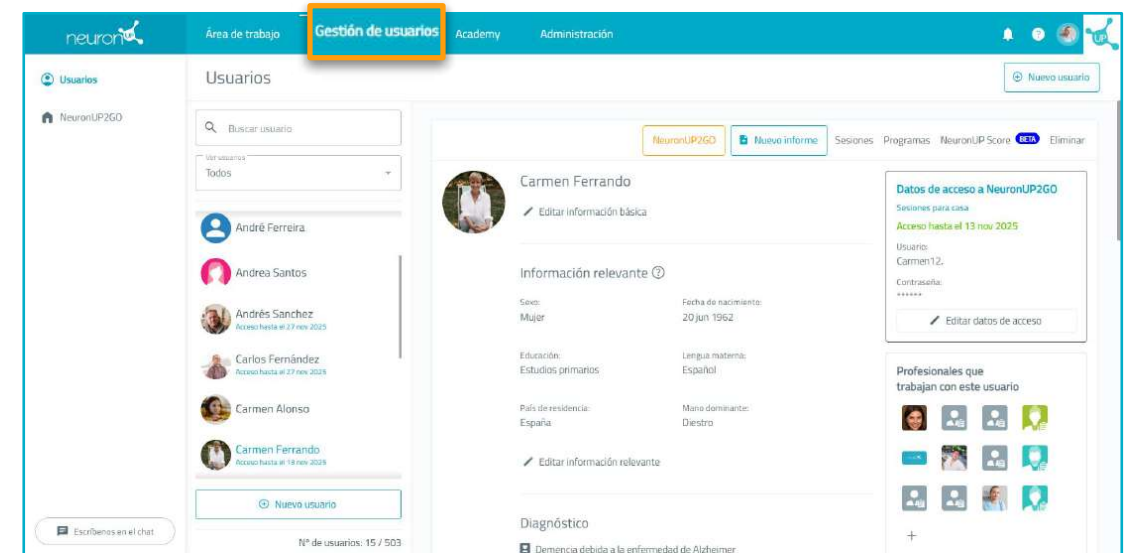


Gestione degli utenti: Modulo in cui vengono mostrati gli utenti o pazienti registrati nel profilo del professionista, così come quelli condivisi con altri colleghi.

NeuronUP Rehab

MODULI DELLA PIATTAFORMA



Academy: Modulo che contiene video formativi tenuti da esperti, con l'obiettivo di mantenere il professionista costantemente aggiornato.

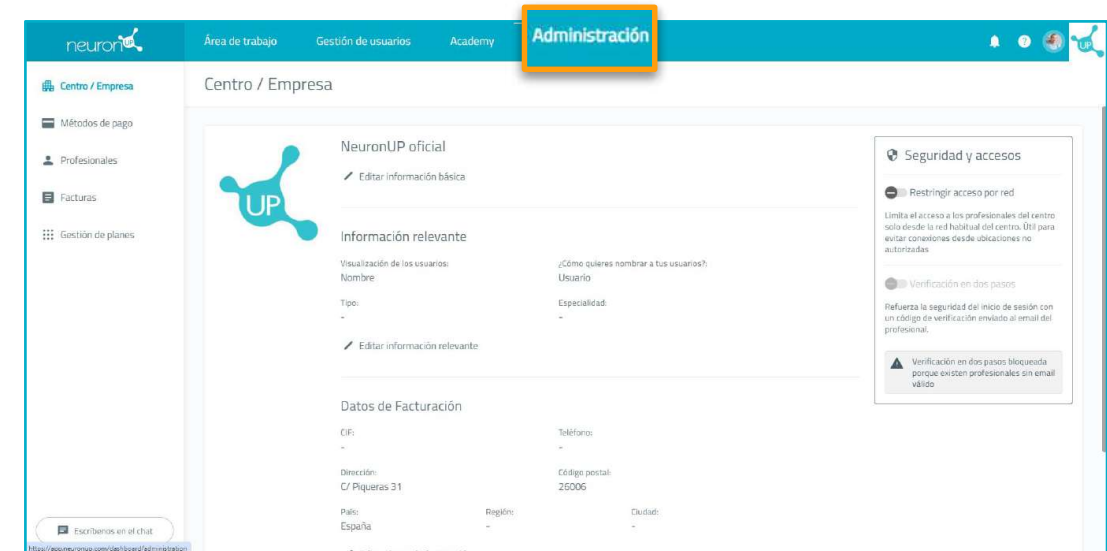

Amministrazione: Modulo disponibile esclusivamente per i professionisti con ruolo o profilo di amministratore.

Mostra le informazioni del centro, i metodi di pagamento associati all'account, l'elenco dei professionisti del centro, le fatture di NeuronUP e la gestione del piano attuale.


Per maggiori informazioni, consultare la sezione *Amministrazione* del manuale.

Modulo: Area di lavoro



Area di lavoro di NeuronUP

1. VISTA GENERALE

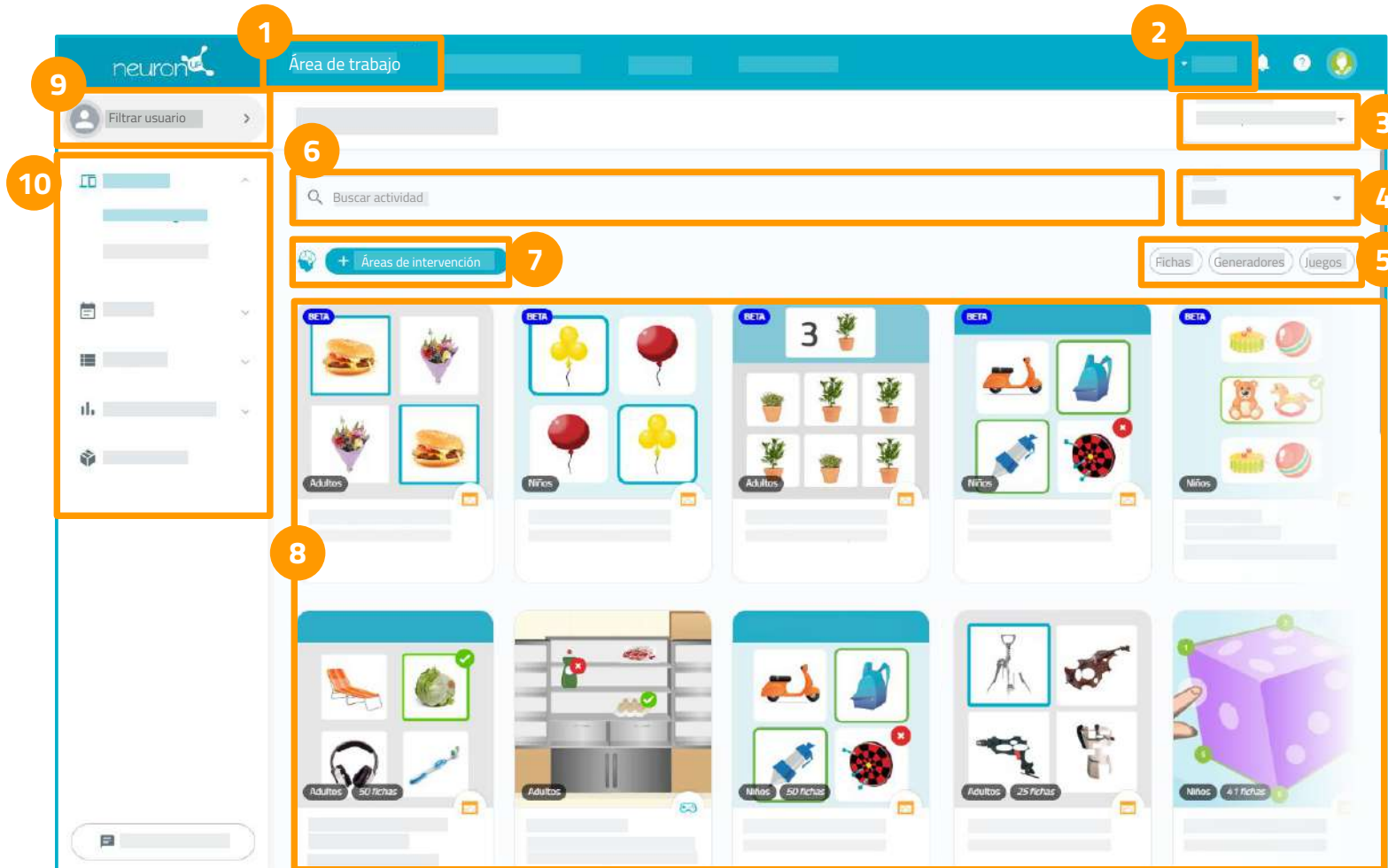

1. **Modulo "Area di lavoro"**

Nell'area di lavoro vengono visualizzati i seguenti elementi:


2. Lingua delle attività
3. Vista personalizzata
4. Filtro per età
5. Tipi di attività
6. Motore di ricerca delle attività
7. Filtro per aree di intervento
8. Elenco delle attività

Menu laterale:

9. Filtro per utente
10. Tipi di attività, sessioni, programmi, risultati digitali e risorse aggiuntive

Area di lavoro di NeuronUP

2. LINGUA DELLE ATTIVITÀ, NOTIFICHE, DOMANDE FREQUENTI E PROFILO DEL PROFESSIONISTA

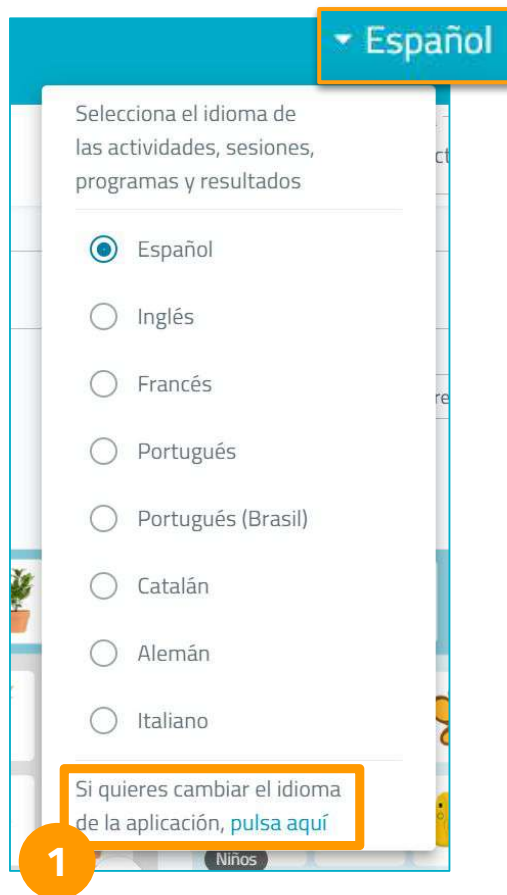

Dal menu a tendina è possibile cambiare la **lingua delle attività di NeuronUP**.

Per modificare la **lingua dell'intera piattaforma**, fai clic sul link in fondo (1) e seleziona la lingua con cui desideri visualizzare tutta la piattaforma.


La lingua dei contenuti può essere modificata solo da questa scheda.

La lingua di NeuronUP può essere cambiata:

- dal link (1),
- dalla configurazione di NeuronUP,
- e tramite il profilo del professionista, che vedremo nelle sezioni successive.

Area di lavoro di NeuronUP

2. LINGUA DELLE ATTIVITÀ, NOTIFICHE, DOMANDE FREQUENTI E PROFILO DEL PROFESSIONISTA

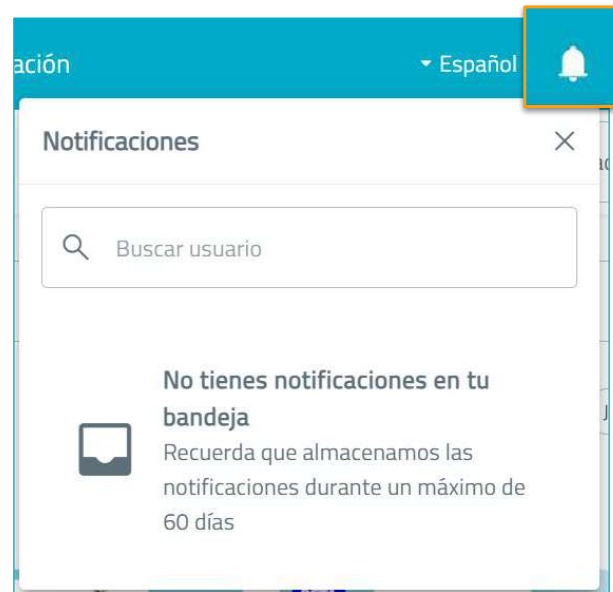

Nella sezione delle notifiche puoi ricevere avvisi dai tuoi utenti e dalla stessa piattaforma.

Area di lavoro di NeuronUP

2. LINGUA DELLE ATTIVITÀ, NOTIFICHE, DOMANDE FREQUENTI E PROFILO DEL PROFESSIONISTA



Gestire il profilo del professionista ti permette di:


- modificare la tua **password**,
- aggiungere **informazioni di base al tuo profilo**, come il tuo nome,
- aggiungere **informazioni rilevanti**, ad esempio la tua specializzazione
- e aggiungere o eliminare gli **utenti con cui lavori**.

Nella configurazione puoi cambiare la **lingua della piattaforma**, modificare **il tema in chiaro**, scuro o alto contrasto e trovare le **informazioni legali** di NeuronUP.

È molto importante che, ogni volta che termini il tuo lavoro, esegui il logout per non mettere a rischio la sicurezza dei tuoi dati e di quelli dei tuoi utenti.


L'identificatore di supporto ci aiuterà a identificarti senza che tu debba fornirci dati sensibili.

Ulteriori dettagli sono disponibili nelle sezioni *Creare e configurare un profilo professionale*.

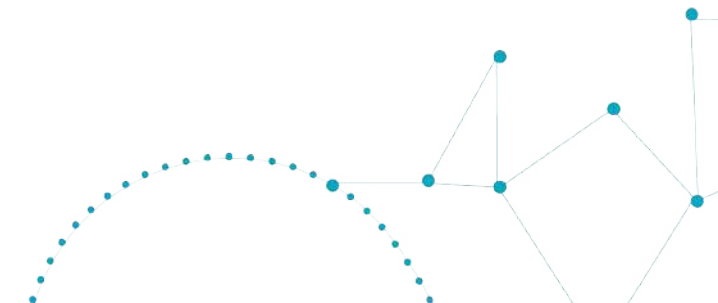

Area di lavoro di NeuronUP

3. VISTA PERSONALIZZATA

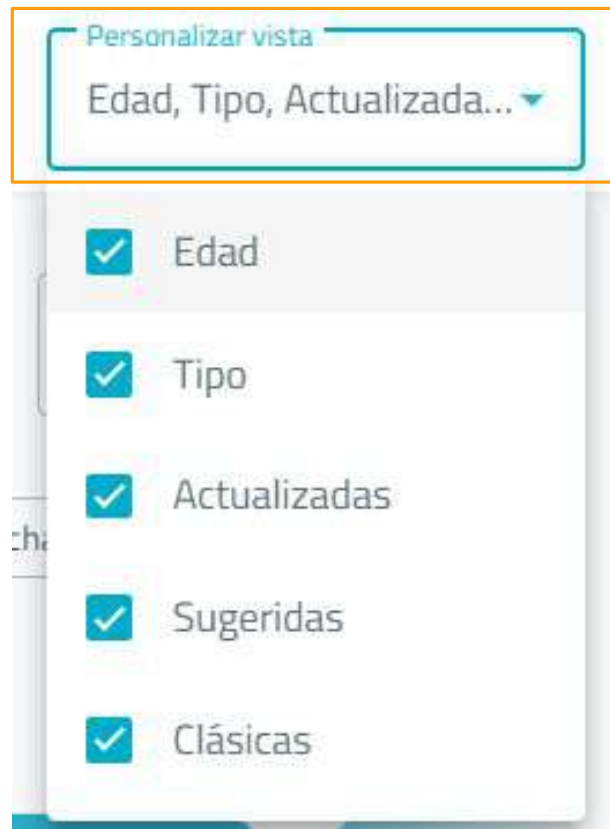

Il menu a tendina **personalizzare la vista** permette di personalizzare la visualizzazione dell'area di lavoro. Puoi nascondere o **mostrare i filtri** selezionati.

La **visualizzazione completa** dell'elenco delle attività include:

- il filtro per età,
- il tipo di attività,
- le attività aggiornate,
- le attività suggerite,
- e le attività classiche.

Area di lavoro di NeuronUP


4. FILTRO PER ETÀ



Le attività di NeuronUP sono suddivise in due categorie: **adulti** e **bambini**, a seconda del tipo di utente con cui si realizza l'intervento.

Attraverso questo filtro, il professionista può visualizzare nell'area di lavoro:

- solo le attività per adulti,
- solo le attività per bambini,
- oppure tutte le attività disponibili.

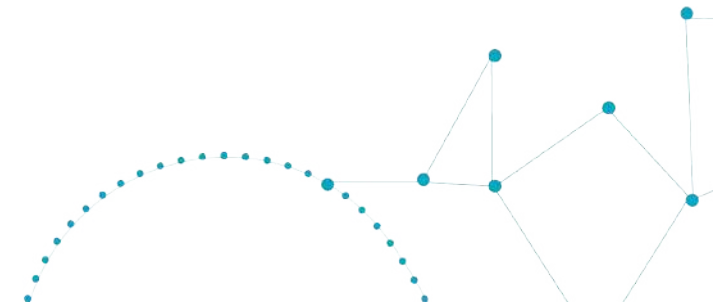

Area di lavoro di NeuronUP

5. FILTRO DEI TIPI DI ATTIVITÀ




In NeuronUP Rehab disponiamo di tre tipi di attività digitali (descritte nella sezione "Attività digitali" di questo manuale).

Con questo filtro puoi **visualizzare nell'area di lavoro il tipo di attività** che desideri utilizzare nell'intervento che andrai a realizzare.

Puoi selezionare scheda, gioco e/o generatore.

Questo filtro non è esclusivo: è possibile selezionare uno o più tipi di attività, a seconda di ciò che meglio si adatta al tuo utente.

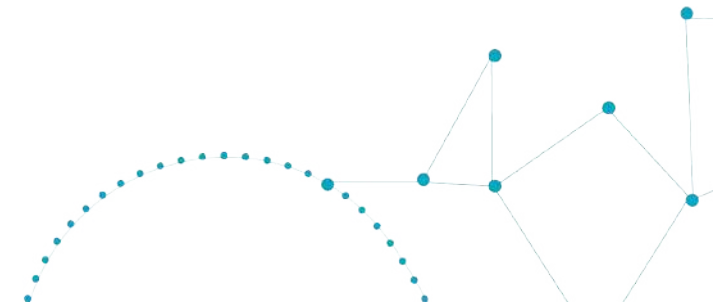

Area di lavoro di NeuronUP

6. MOTORE DI RICERCA DELLE ATTIVITÀ O PER AREA COGNITIVA


Actividades digitales

 Buscar actividad

Il motore di ricerca delle attività permette di digitare per cercare in base a:



- il **nome dell'attività**,
- **parole chiave** correlate,
- oppure l'**area cognitiva**

che si desidera lavorare con il proprio utente in quel momento.

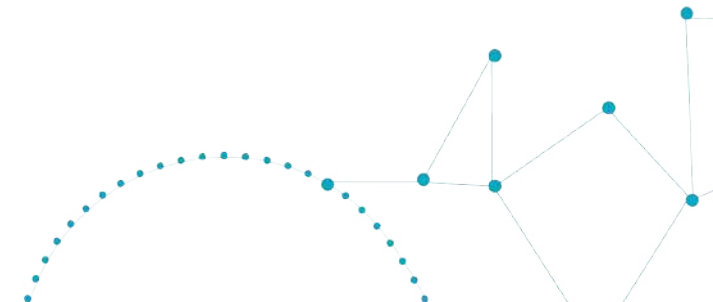

Area di lavoro di NeuronUP


7. FILTRO PER AREA COGNITIVA

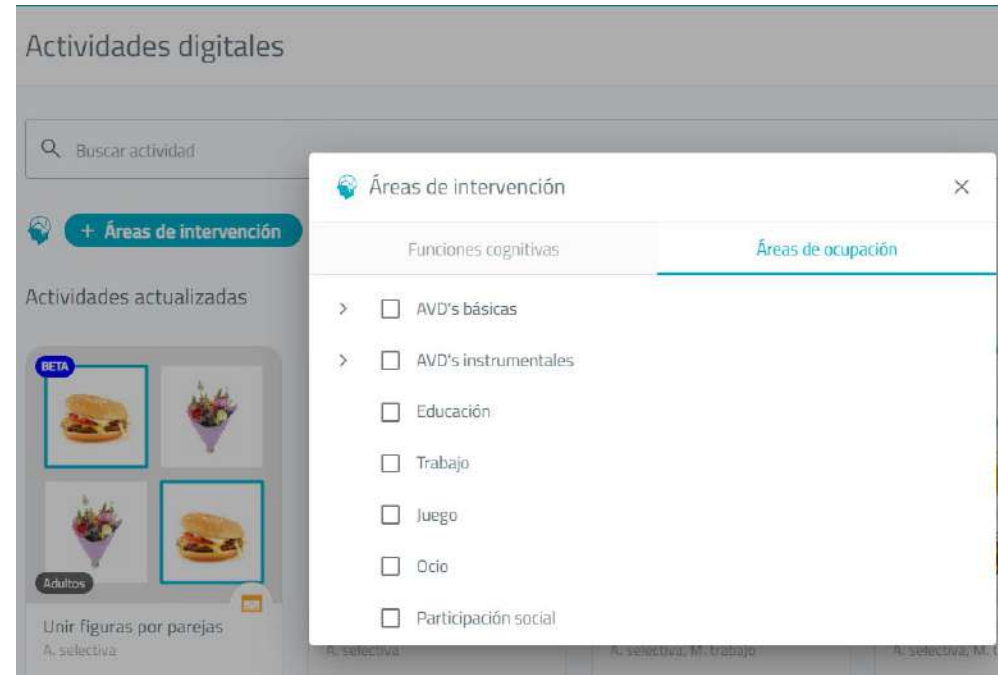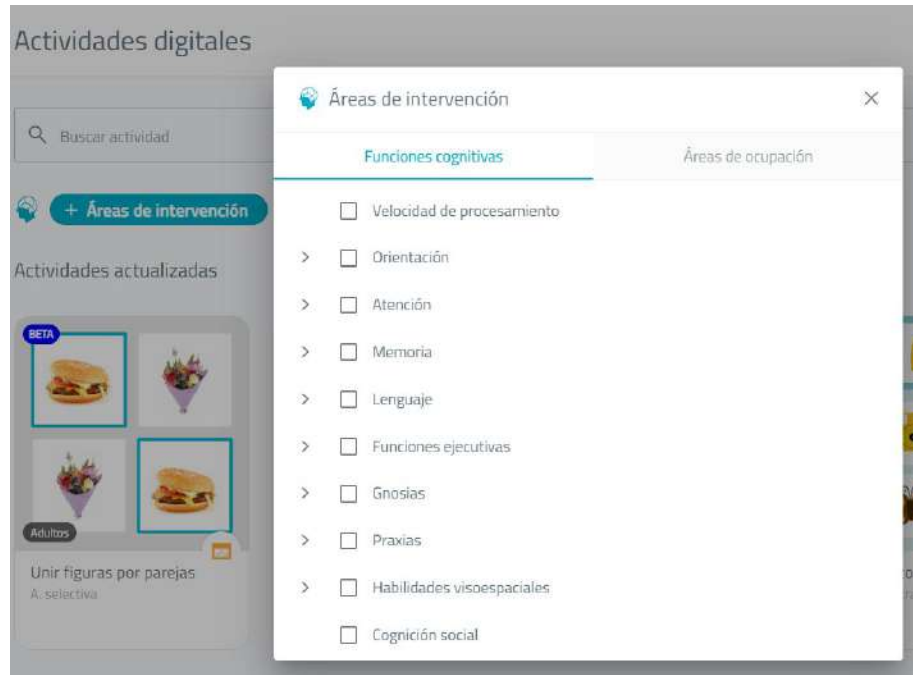

Con il filtro delle aree di intervento puoi filtrare le attività in base alle **funzioni cognitive** o alle **aree di occupazione** che desideri lavorare.

Area di lavoro di NeuronUP

8. FILTRO PER UTENTE

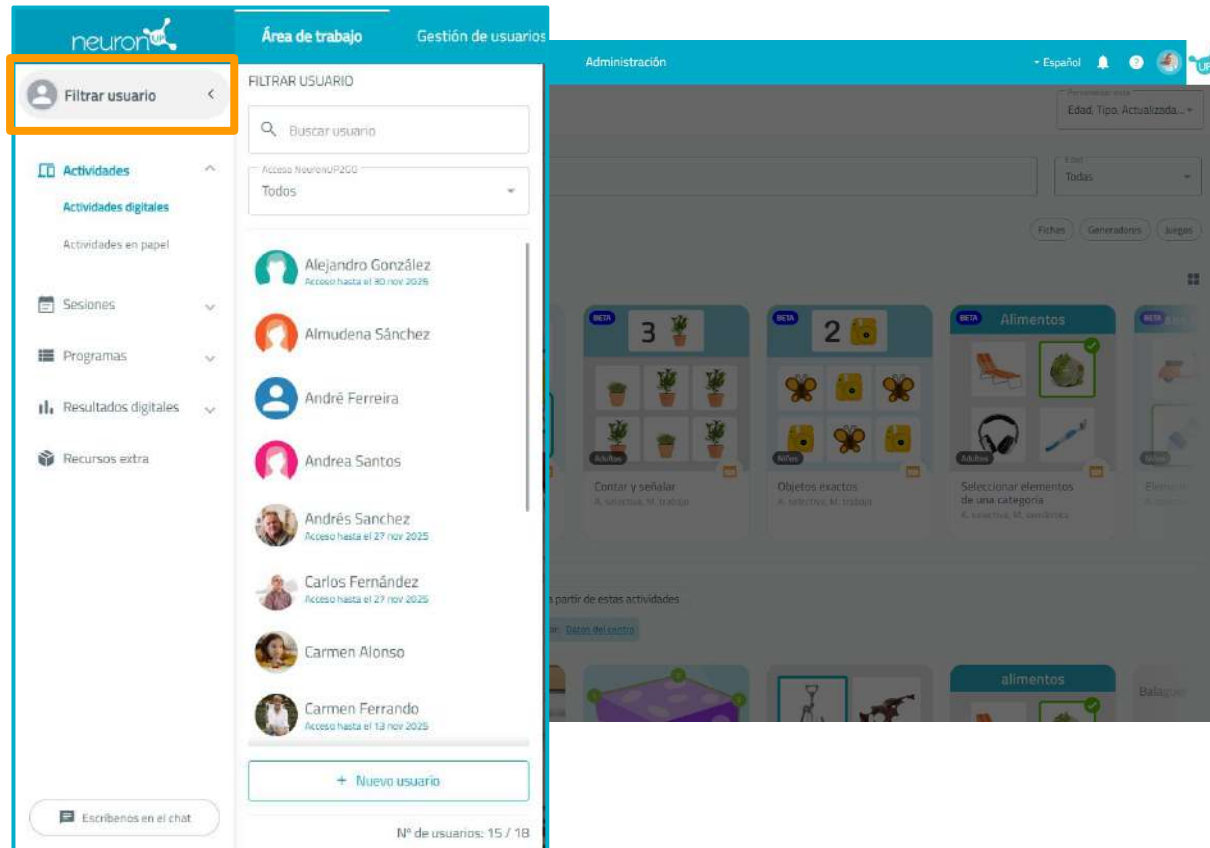

È importante **filtrare l'utente** e **selezionare il profilo** corrispondente affinché i **risultati** di ogni intervento vengano registrati correttamente e sia possibile effettuare un monitoraggio dell'utilizzo dell'utente.

In questo modo, **l'evoluzione dell'utente** si riflette nei grafici del suo NeuronUP Score, permettendoti di adattare meglio gli interventi alle sue necessità.

Per filtrare per utente, assicurati di aver creato il suo profilo (consulta le sezioni "*Creare e utilizzare un profilo di utente profano*").

Area di lavoro di NeuronUP

9. ATTIVITÀ, SESSIONI, PROGRAMMI, RISULTATI DIGITALI E RISORSE EXTRA



In NeuronUP Rehab hai a disposizione:


- **attività digitali** (giochi, schede e generatori)
- e **attività in formato cartaceo** scaricabili in PDF (schede e generatori).

Da questo menu puoi **selezionare il formato** che meglio si adatta all'intervento che desideri realizzare.

Troverai una spiegazione più approfondita delle attività digitali e delle attività in formato cartaceo nelle sezioni successive.

Area di lavoro di NeuronUP

9. ATTIVITÀ, SESSIONI, PROGRAMMI, RISULTATI DIGITALI E RISORSE EXTRA

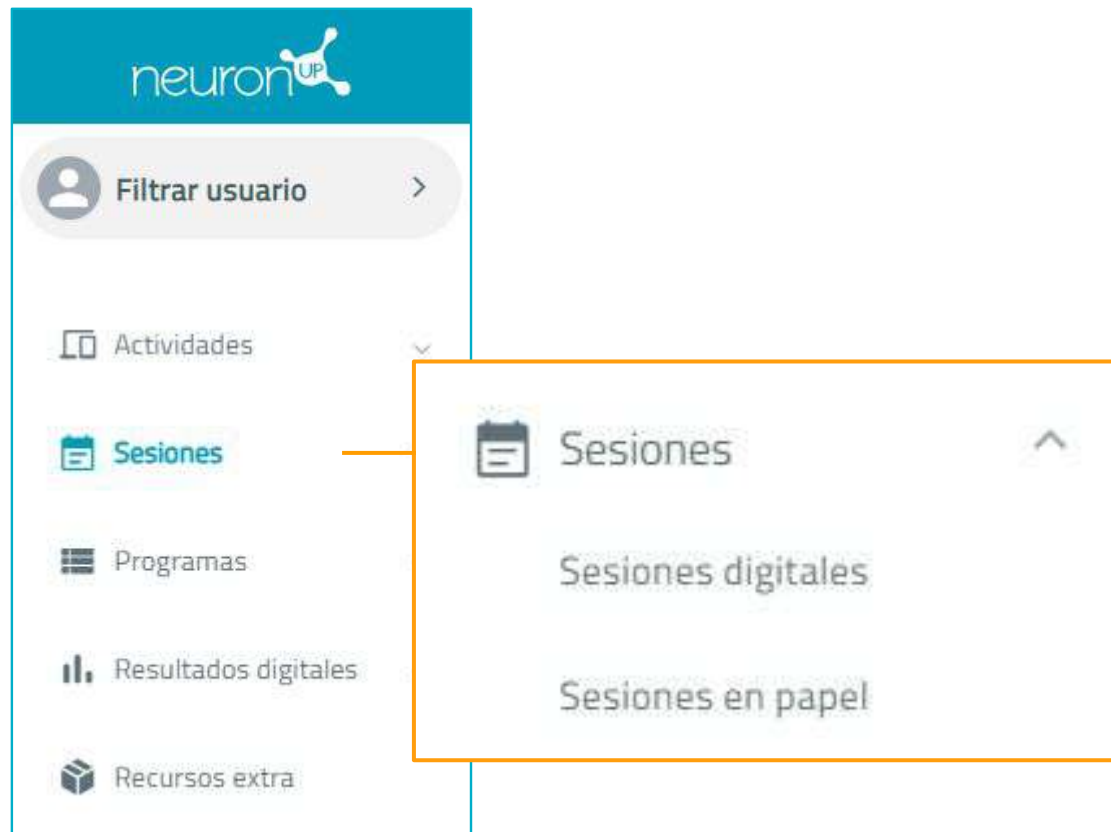

Puoi creare sessioni digitali e cartacee per organizzare il tuo lavoro.

Da questo menu è possibile **accedere alla creazione di nuove sessioni**, alle sessioni già create e al calendario delle sessioni.

Per saperne di più sulle sessioni in NeuronUP, consulta le pagine *Lavorare con le sessioni*.

Area di lavoro di NeuronUP

9. ATTIVITÀ, SESSIONI, PROGRAMMI, RISULTATI DIGITALI E RISORSE EXTRA



I **programmi** di NeuronUP sono **insiemi di sessioni** progettati per facilitare la **pianificazione a lungo termine** con gli utenti.

Come nella sezione Sessioni, sono disponibili programmi digitali e programmi in formato cartaceo.

Per maggiori informazioni sul loro utilizzo, consulta le pagine *Lavorare con i programmi*.

Area di lavoro di NeuronUP

9. ATTIVITÀ, SESSIONI, PROGRAMMI, RISULTATI DIGITALI E RISORSE EXTRA





Quando si realizza un'attività, una sessione o un programma con il profilo di un **utente filtrato**, i **risultati vengono registrati automaticamente**, generando uno storico che permette di analizzarne l'evoluzione e di adattare l'intervento quando necessario.

Per maggiori informazioni su queste sezioni, consulta le pagine *Risultati*.

Area di lavoro di NeuronUP

9. ATTIVITÀ, SESSIONI, PROGRAMMI, RISULTATI DIGITALI E RISORSE EXTRA

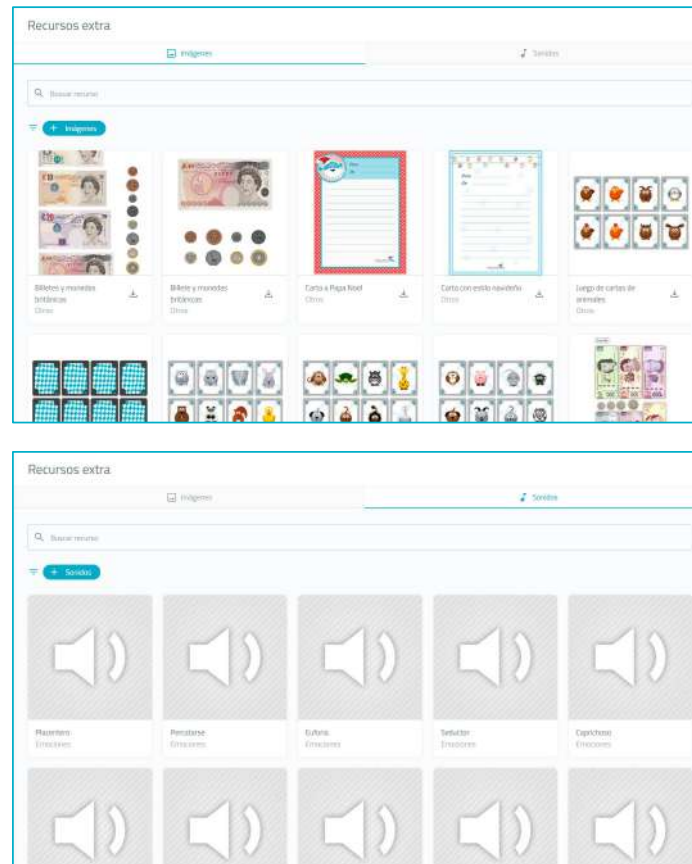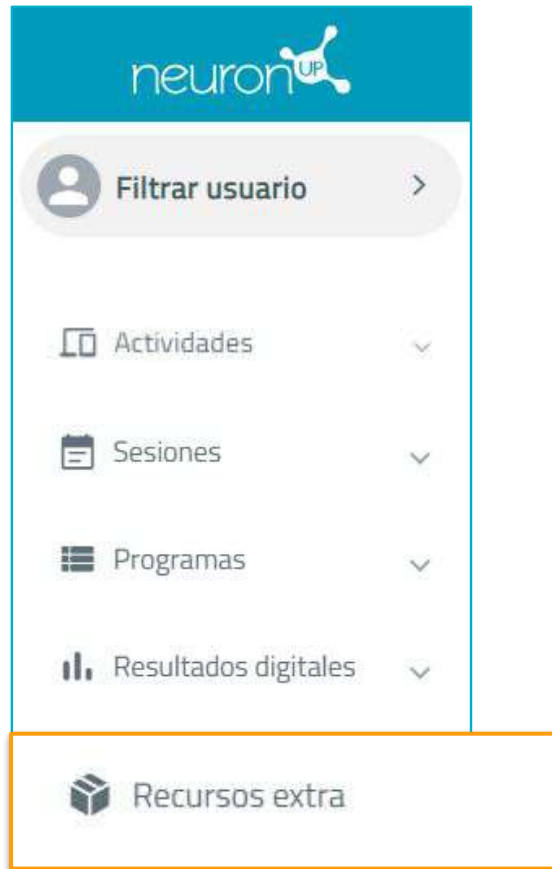

NeuronUP Rehab offre **risorse** aggiuntive che permettono al professionista di lavorare con gli utenti in modo più personalizzato.

Include **immagini** e **suoni** che possono essere incorporati per completare le interventi.


Modulo: Amministrazione



Modulo di amministrazione

1. CENTRO / AZIENDA

Il modulo di Amministrazione (1) è disponibile esclusivamente per i professionisti con profilo di amministratore.

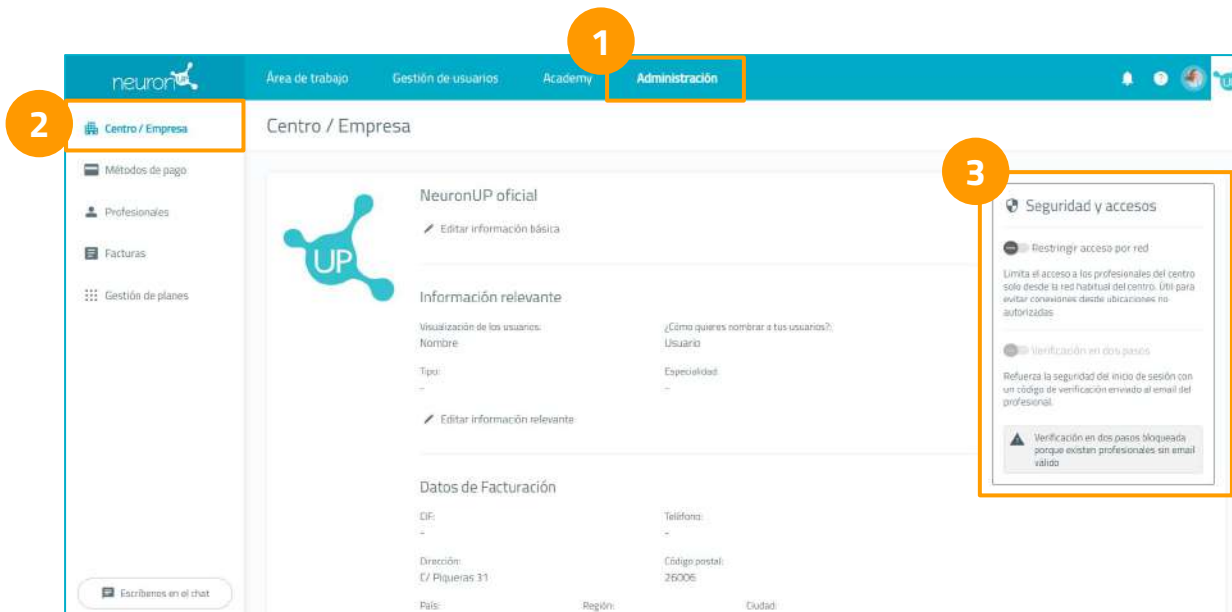

Nella sezione centro/azienda (2) trovi tutte le informazioni relative al centro. Include:

- **informazioni rilevanti,**
- **dati di fatturazione**
- **e i responsabili.**

Queste informazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.



Puoi **aumentare la sicurezza** di accesso a NeuronUP restringendo l'accesso a un indirizzo IP e aggiungendo la verifica in due passaggi per i tuoi professionisti (3).

Per poter attivare la verifica in due passaggi, è necessario che tutti i **profili professionali** dispongano di un'**e-mail valida con cui potersi identificare** per accedere a NeuronUP.

Modulo di amministrazione

1. CENTRO / AZIENDA

neuronUP

Área de trabajo Gestión de usuarios Academy **Administración**

Centro / Empresa

Métodos de pago

Profesionales

Facturas

Gestión de planes

NeuronUP

Editar información básica

Información relevante

Visualización de los usuarios: Nombre

¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios? Usuario

Tipo: Oficina/Gabinete

Especialidad: Envejecimiento normal

Editar información relevante

Seguridad y accesos

Restringir acceso por red

Limita el acceso a los profesionales del centro solo desde la red habitual del centro. Útil para evitar conexiones desde ubicaciones no autorizadas.

Verificación en dos pasos

Refuerza la seguridad del inicio de sesión con un código de verificación enviado al email del profesional.

Verificación en dos pasos bloqueada porque existen profesionales sin email válido.

Editar información relevante

Visualización de los usuarios

Nombre

¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?

Usuario

Tipo

Oficina/Gabinete

Especialidad

Envejecimiento normal

Guardar

In NeuronUP Rehab puoi scegliere come denominare i **profili** delle persone su cui intervenire (2)::

- **utenti,**
- **pazienti**
- **oppure studenti.**

In questo manuale facciamo riferimento a questi profili come **utenti**.




Puoi identificare i tuoi utenti (1) tramite:

- dati personali, **nome e cognome**
- oppure mantenerli anonimizzati tramite un **codice** (2).

Modulo di amministrazione

2. METODO DI PAGAMENTO

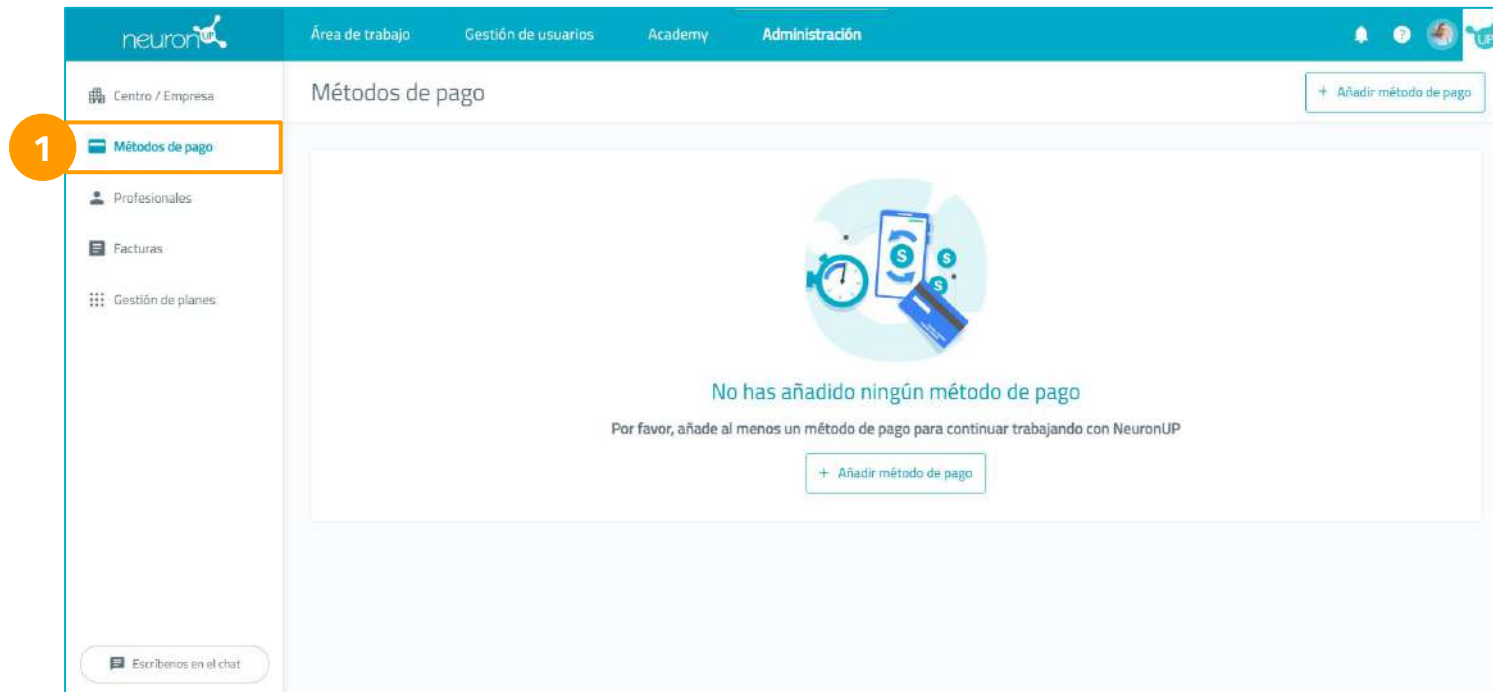


Per effettuare pagamenti in modo automatico, in questa sezione (1) puoi aggiungere il **metodo di pagamento** che preferisci.

In NeuronUP puoi effettuare pagamenti automatici tramite carta, PayPal e Addebito SEPA.

Il metodo di pagamento può essere modificato o eliminato in qualsiasi momento.

Modulo di amministrazione

3. PROFESSIONISTI

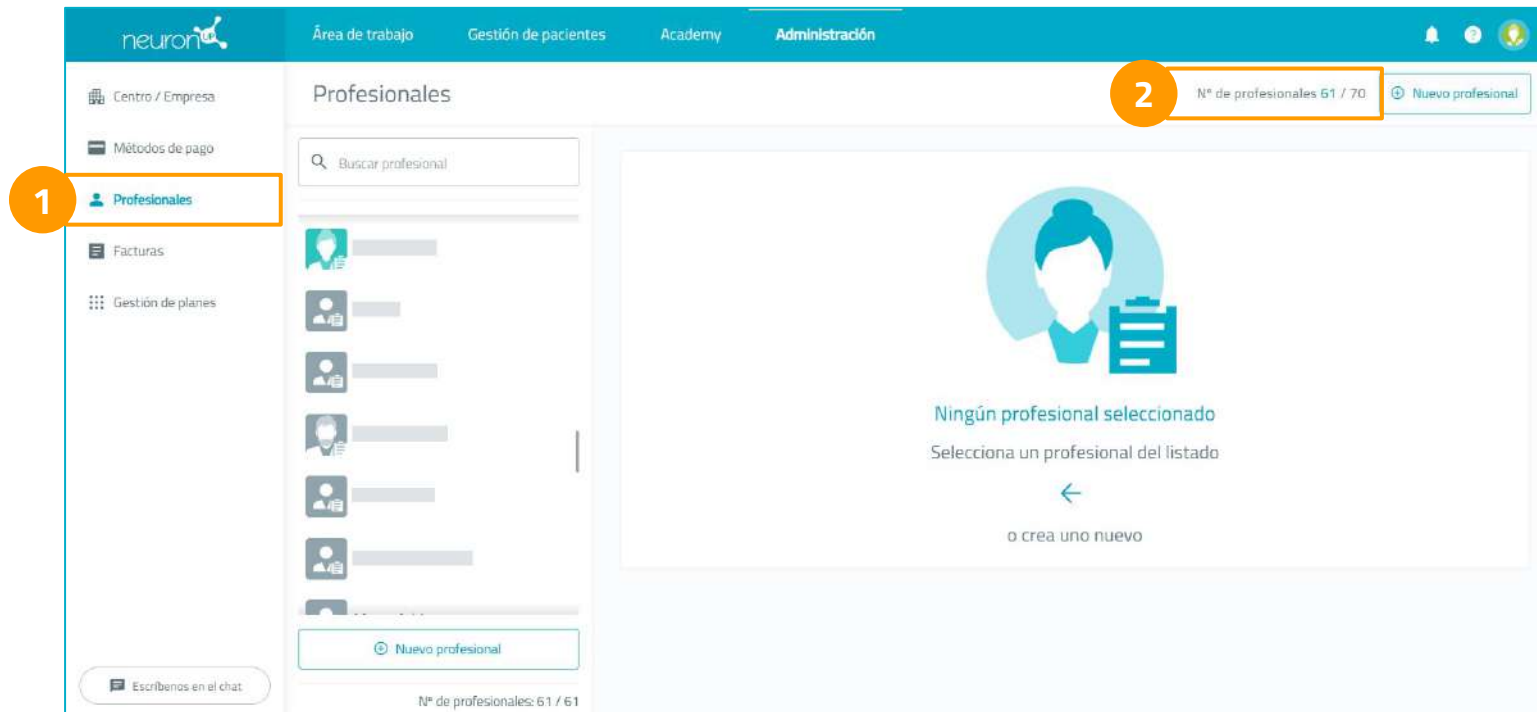

Dalla sezione **Profesionisti** (1) puoi creare e visualizzare i profili dei professionisti che lavorano nel centro.

La creazione di profili indipendenti permette a ogni professionista di disporre di uno **spazio di lavoro proprio e separato**.

A seconda del piano che hai sottoscritto, potrebbe esserci un **limite al numero di profili professionali** disponibili.

Puoi visualizzare i posti liberi e/o occupati nell'indicatore (2).

Impara a gestire i profili dei professionisti nella sezione *"Creare e configurare un profilo professionale"*.

Modulo di amministrazione

4. FATTURE

The screenshot displays the 'Facturas' (Invoices) section of the NeuronUP administration module. The interface is divided into several sections:

- 1** (Facturas): The sidebar menu item for the Invoices section.
- 2** (Facturas): The main header area for the Invoices section.
- 3** (Meses NeuronUP2GO asignados): The header for the table showing assigned months.

The table displays the following data:

Fecha	Profesional	Usuario	Meses
7 nov 2025, 12:19:01	[Redacted]	[Redacted]	1
6 nov 2025, 13:41:40	[Redacted]	[Redacted]	1
5 nov 2025, 10:12:13	[Redacted]	[Redacted]	1
28 oct 2025, 13:18:40	[Redacted]	[Redacted]	1
21 oct 2025, 17:02:58	[Redacted]	[Redacted]	1

At the bottom right, it shows 'Nº de asignaciones: 15 / 23'.

Nella sezione **Fatture** (1) è possibile consultare e filtrare le fatture emesse da NeuronUP (2).

Nella scheda **Mesi assegnati di NeuronUP2GO** (3) vengono mostrati tutti gli accessi che i professionisti hanno assegnato ai propri utenti affinché svolgano gli interventi da casa.

Modulo di amministrazione

5. GESTIONE DEI PIANI

The screenshot displays the NeuronUP administration interface. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. The left sidebar contains 'Centro / Empresa', 'Métodos de pago', 'Profesionales', 'Facturas', and 'Gestión de planes' (highlighted with an orange box and a red circle containing the number 1). The main content area is titled 'Gestión de planes' and shows 'Suscripción actual' and 'Mis planes'. Under 'Mis planes', there is a section for 'Licencia Premium (Gratis)' which includes 'Adultos + Kids digital', 'Adultos + Kids papel', and '10 profesionales'. Below this, there are sections for '30 profesionales extra (Gratis)', 'Próximamente (Extra) (Gratis)', and 'Presentación Investigación (Extra) (Gratis)'. On the right side of the main content area, there is a section titled '¿En qué podemos ayudarte?' with contact information: '+34 601 71 96 99', '+34 941 287 238', 'gestion@neuronup.com', and 'Escribenos en el chat'.

Nella sezione **Gestione dei piani** (1) trovi tutte le informazioni relative al tuo piano di NeuronUP.

Puoi modificare o aggiornare il piano con cui lavori in NeuronUP.

2. Creare e configurare un profilo professionale

Tipi di profili professionali di NeuronUP

Dipendente


Il profilo di dipendente ha **accesso ai contenuti** necessari per svolgere le proprie interventi, ma non può effettuare acquisti dall'applicazione né gestire i profili di altri professionisti.
Questo profilo non ha accesso alla scheda Amministrazione di NeuronUP.

Amministratore

Il profilo di amministratore ha **accesso esclusivamente al modulo Amministrazione**.
Da questo modulo può effettuare acquisti, modificare i piani, consultare le fatture, aggiungere metodi di pagamento e gestire i professionisti.


+ Amministratore + Dipendente

Questo profilo include entrambi i ruoli e può svolgere **tutte le azioni**.

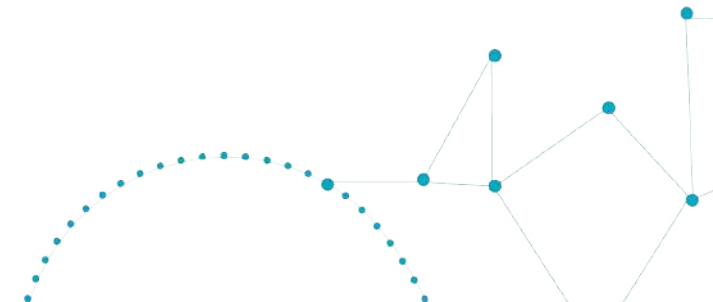

Area di amministrazione

CREARE UN PROFILO PROFESSIONALE

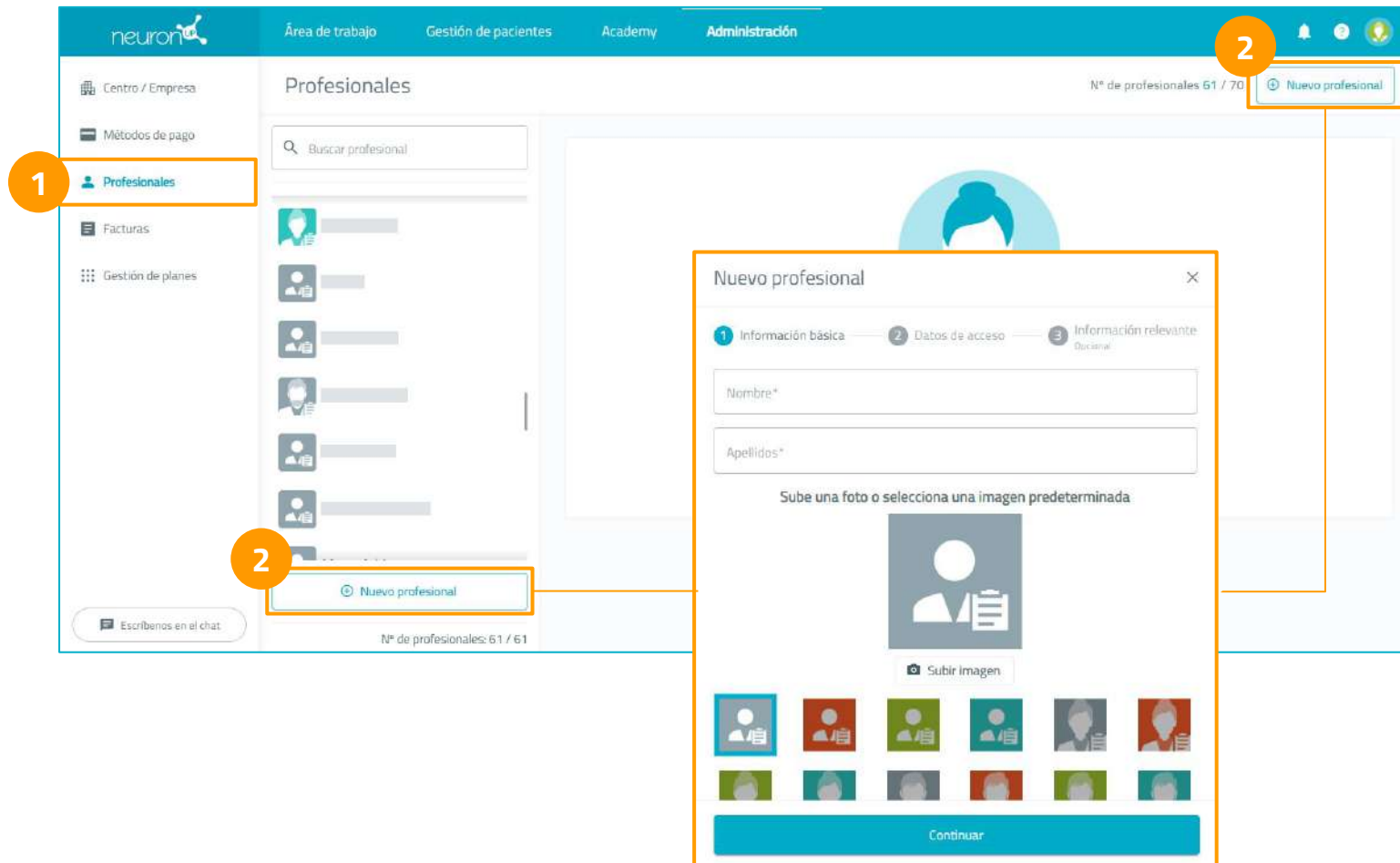

Per aggiungere un nuovo profilo professionale, nel modulo di amministrazione, dalla sezione "Professionisti" (1), fai clic sul pulsante **"Nuevo profesional"** (2), compila i dati corrispondenti e condividi le credenziali di accesso con la persona registrata.

Aggiungere al profilo professionale gli utenti con cui lavora

1

Profesionales

2

Usuarios

Buscar usuario

Ver usuarios: Todos

Usuarios con los que trabajo

Alejandro González

Almudena Sánchez

André Ferreira

Andrea Santos

Nº de usuarios: 15 / 504

Guardar

Nel modulo di Amministrazione, sezione Professionisti (1), seleziona un professionista dall'elenco per visualizzarne i dettagli.

Nella sezione *"Utenti con cui lavoro"*, **seleziona gli utenti con cui quel profilo professionale lavorerà**. Non importa se sono stati creati da quel professionista o da un altro.


Tutti i professionisti del centro hanno accesso ai diversi utenti.

Per aggiungere un utente, fai clic sul pulsante "+" (2), cerca l'utente corrispondente e salva la selezione.

3. Creare e utilizzare un profilo di utente profano

per le persone che saranno sottoposte all'intervento del professionista

Creare un utente

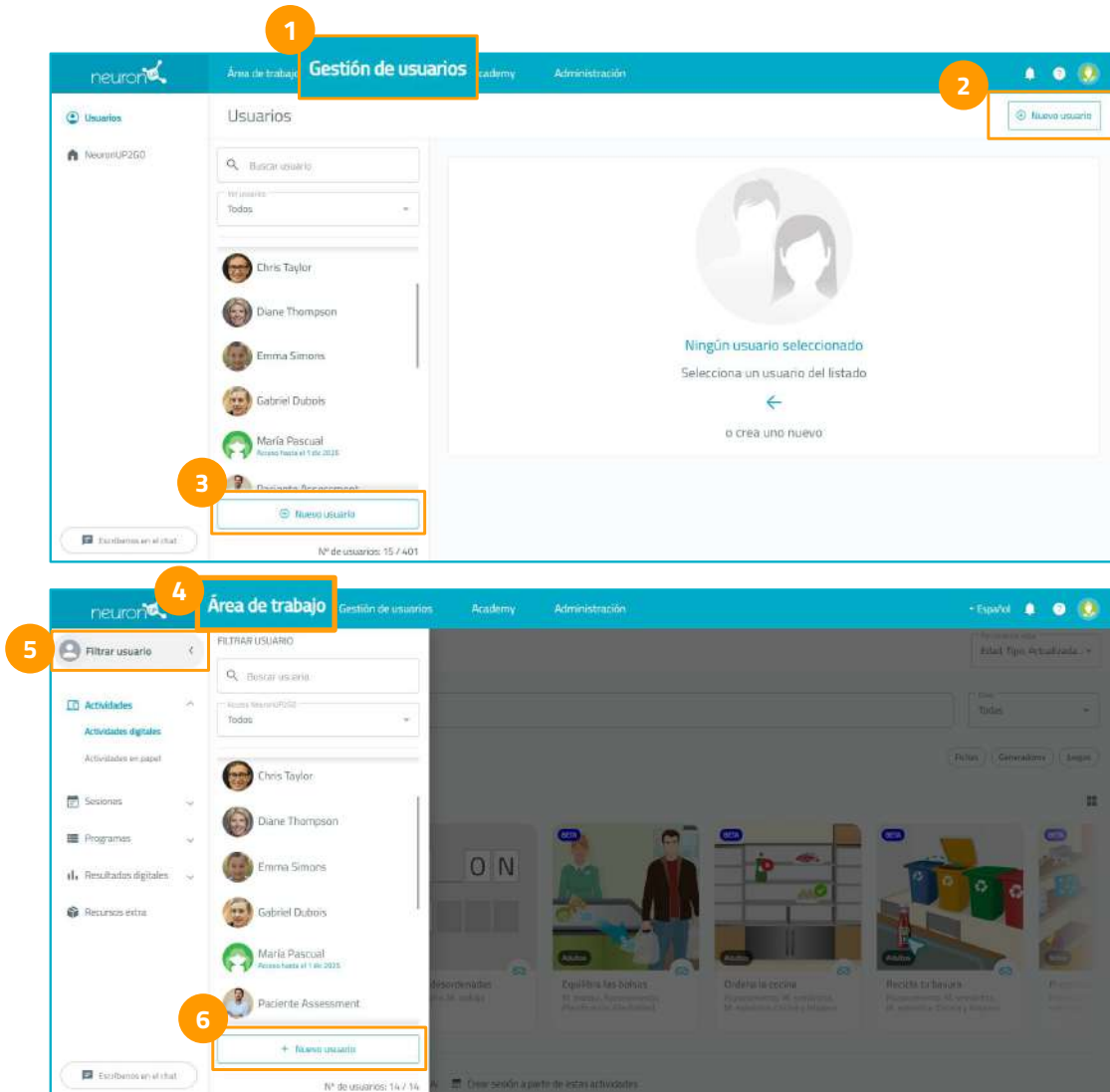

Puoi **creare un profilo** utente da:

- Modulo *Gestione degli utenti* (1), Nuovo utente (2, 3).
- Modulo Area di lavoro (4), *filtro utente* (5), Nuovo utente (6).

Creare un utente

Nuevo usuario

1 Información básica — 2 Diagnóstico Opcional — 3 Información relevante Opcional

Nombre*

Apellidos*

Sube una foto o selecciona una imagen predeterminada

Subir imagen

Continuar

Passo 1. Informazioni di base:

- Inserisci i **dati fondamentali** dell'utente:
 - nome e cognome,
 - oppure, se è abilitata l'identificazione degli utenti tramite codice, inserisci il relativo codice identificativo.
- Seleziona **un avatar** oppure **carica** un'immagine che identifichi l'utente.

Fai clic su "Continua".

Creare un utente

1. GESTIONE DEGLI UTENTI

Nuevo usuario

1 Información básica — 2 Diagnóstico Opcional — 3 Información relevante Opcional

Diagnóstico

Escribe aquí...

Diagnósticos sugeridos

- Trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad de Alzheimer (DSMS-TR)
- Síndrome de Down (CIE 11)
- Epilepsia (CIE 11)
- Defecto cognitivo leve (Escala de deterioro global (GDS))

1 Añadir diagnóstico

Continuar

Paso 2. Diagnosi:

NeuronUP offre un ampio elenco di diagnosi all'interno della piattaforma.

Cerca la diagnosi corrispondente all'utente e seleziona Aggiungi diagnosi (1) per confermare.

È possibile aggiungere più di una diagnosi.

- Se l'utente non dispone ancora di una diagnosi, si seleziona l'opzione **"Non diagnosticato"** e, una volta definita, si modifica dal suo profilo.
- È inoltre possibile selezionare l'opzione **"Persona sana"**.

Premi "Continua".

Creare un utente

1. GESTIONE DEGLI UTENTI

Nuevo usuario

1

Información básica

2

Diagnóstico
Opcional

3

Información relevante
Opcional

Sexo	País de residencia España
Fecha de nacimiento	Lengua materna Español
Educación	Mano dominante

Finalizar

Passo 3. Informazioni rilevanti:

Includi i dati rilevanti dell'utente:

- sesso,
- paese di residenza,
- data di nascita, lingua madre,
- livello di istruzione
- e mano dominante.

Una volta completati questi campi, fai clic su "Finalizza".

Creare un report di un utente

The screenshot shows the NeuronUP Rehab web application interface. The top navigation bar has five tabs: 'neuronUP', 'Área de trabajo', 'Gestión de pacientes' (highlighted with an orange box and a red circle with the number 1), 'Academy', and 'Administración'. Below this, a large orange arrow points down to the main content area. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar has a 'Pacientes' section with a search bar and a list of patient avatars. One avatar is highlighted with an orange box and a red circle with the number 2. The main panel shows the details of the selected patient, including a profile picture, a green status icon, and various fields for 'Información relevante' (Sexo: Mujer, Educación: Analfabeta, País de residencia: Bahamas). Below this is a 'Diagnóstico' section with a date '1 nov 2022' and a 'Nuevo informe' button highlighted with an orange box and a red circle with the number 3. A modal window is also visible, showing a form for creating a new report.

NeuronUP Rehab può generare report sulla base dei dati inseriti dal professionista nella piattaforma e dei risultati ottenuti dall'utente.

- Dalla sezione **Gestione dell'utente** (1).
- **Seleziona un utente** (2) che abbia attività nella piattaforma. Si aprirà il profilo dettagliato dell'utente selezionato.
- Nella sezione Report, fai clic su **"Nuovo report"** (3). Compila i dati richiesti e premi "Genera".
- Questa azione crea e **scarica un report in formato PDF**. Ogni profilo utente può archiviare un totale di 5 report.



Ricorda di conservare in modo sicuro i documenti scaricati per non compromettere la riservatezza dei tuoi utenti, soprattutto se condividi il dispositivo.

Attività digitali e su carta



Attività digitali

Giochi




Generatori



Schede



"Attività digitali"

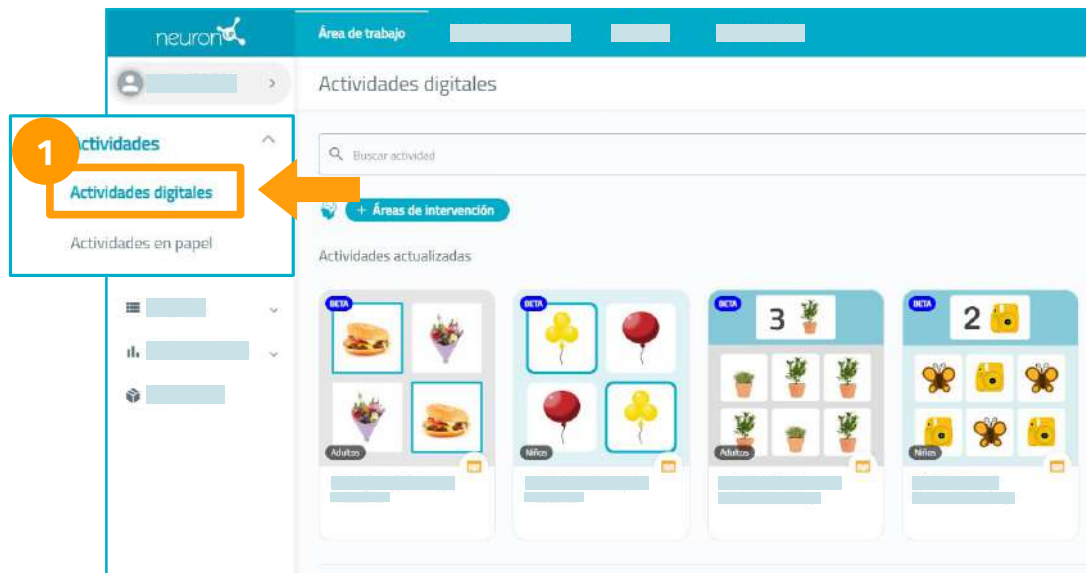

Nella sezione delle attività troviamo le **attività digitali e le attività su carta**.

In NeuronUP Rehab esistono tre tipi di attività:
giochi (solo digitali), **schede e generatori** (su carta e digitali).

A causa di un **aggiornamento e di un miglioramento tecnologico** che stiamo sviluppando, esistono due versioni di alcune attività: **attività aggiornate e attività classiche**. Una volta terminato il lavoro di aggiornamento, verrà comunicato attraverso i canali ufficiali e si procederà alla disattivazione progressiva delle attività classiche.



Raccomandiamo di utilizzare le attività aggiornate.

Le opzioni di configurazione possono variare tra le attività classiche e quelle aggiornate.

Attività digitali



Filtri delle attività

Puoi applicare diversi filtri per visualizzare le attività::


- Per **Aree di intervento** (2).
- Per **età, tipo, aggiornate, suggerite e classiche** (3).
- Per **Tipo di attività**: giochi, schede o generatori (4).
- Per una ricerca diretta, digita nel motore di **ricerca** (1).

Una volta selezionata l'attività desiderata, viene richiesto di **assegnarla a un utente**.




Raccomandiamo di assegnare le attività a un utente affinché i risultati vengano registrati correttamente e il monitoraggio e i relativi report siano più precisi.

Se vuoi solo provare l'attività, puoi continuare senza assegnarla.

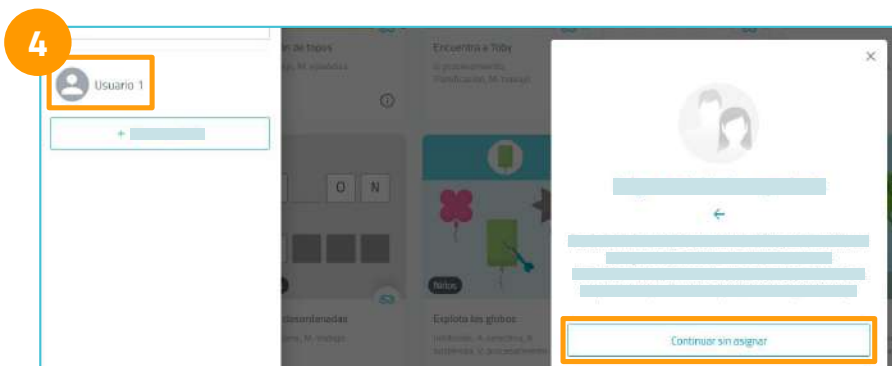

Attività digitali

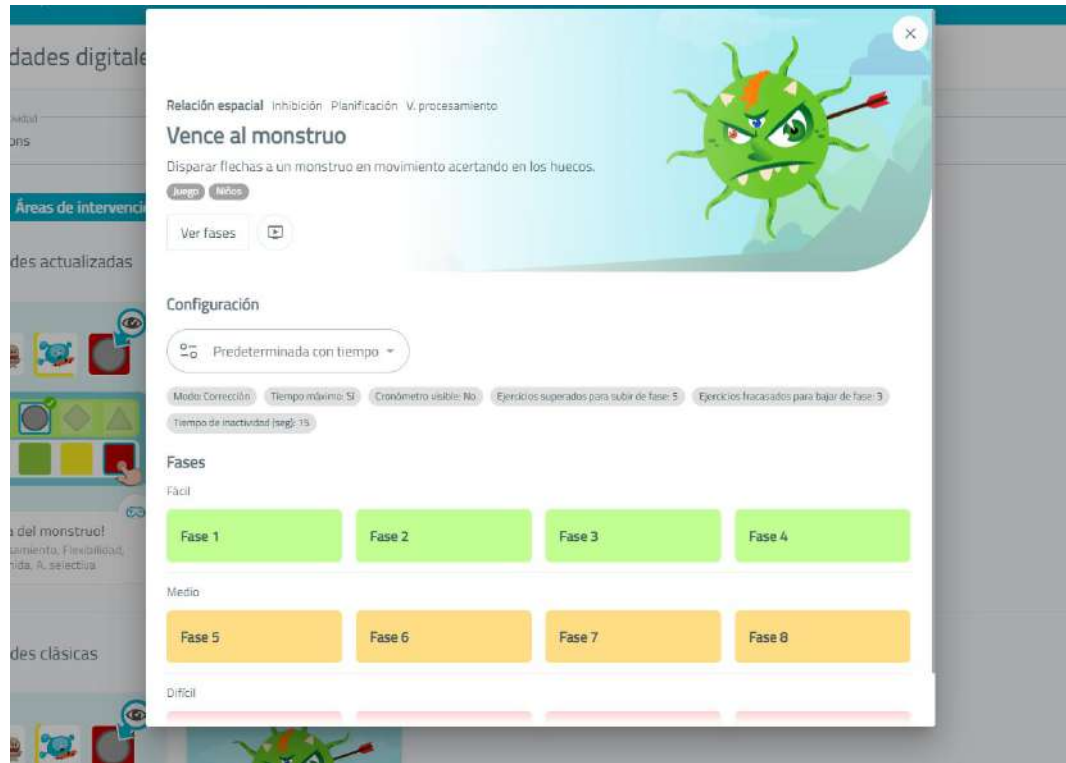


Dettagli di un'attività aggiornata

Nella finestra emergente con i dettagli di un'attività puoi vedere (dall'alto verso il basso):

- le aree di intervento,
- il titolo e una breve descrizione dell'attività,
- le etichette che identificano l'età e il tipo di attività,
- il video delle istruzioni,
- le diverse configurazioni predefinite,
- i parametri generali della configurazione selezionata
- e le fasi ordinate per difficoltà crescente.

Attività digitali

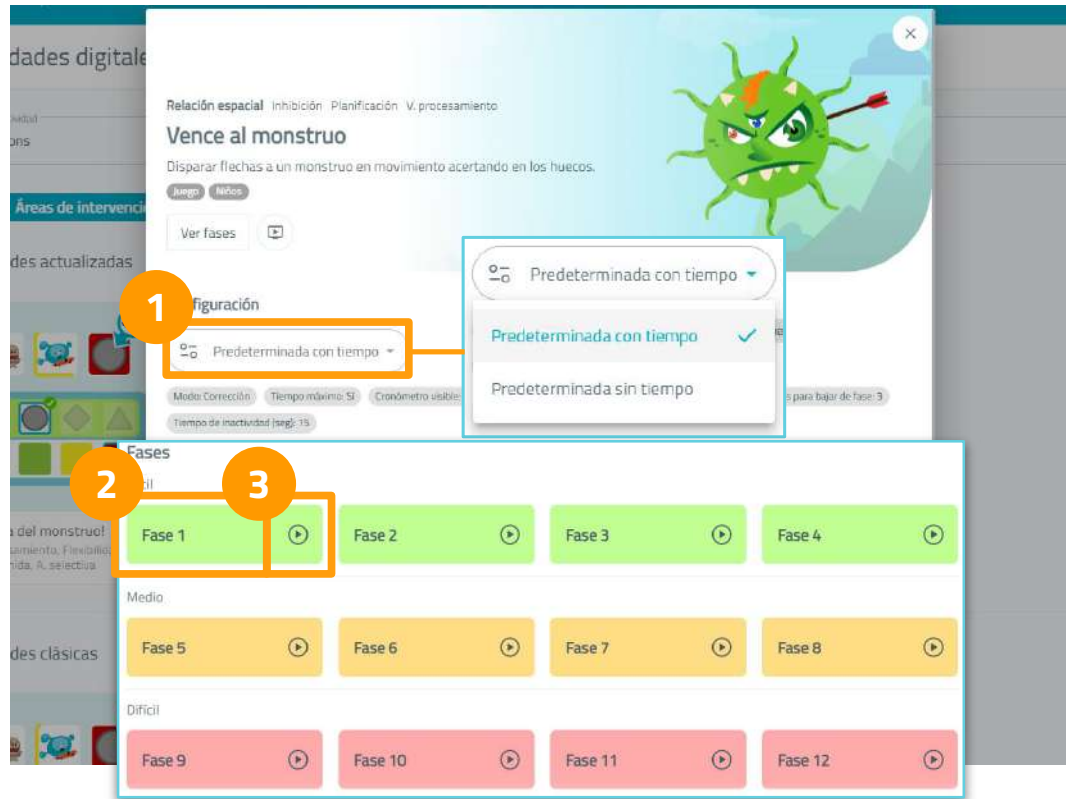

Dettagli di un'attività aggiornata


Esistono diversi tipi di configurazioni predefinite (1) a seconda del tipo o della specifica attività. In generale:

- Nei giochi abbiamo due **configurazioni predefinite: con tempo e senza tempo.**
- Nelle schede abbiamo quattro **configurazioni predefinite: modalità libera con tempo, modalità libera senza tempo, modalità correzione con tempo e modalità correzione senza tempo.**

Premi sul nome di una fase (2) per visualizzare i **parametri dell'attività in quella fase** (*maggiori informazioni nella pagina successiva*).

Se hai chiari la configurazione e i parametri, puoi premere l'icona **"play" (3) ed accedere direttamente all'attività.**

Attività digitali

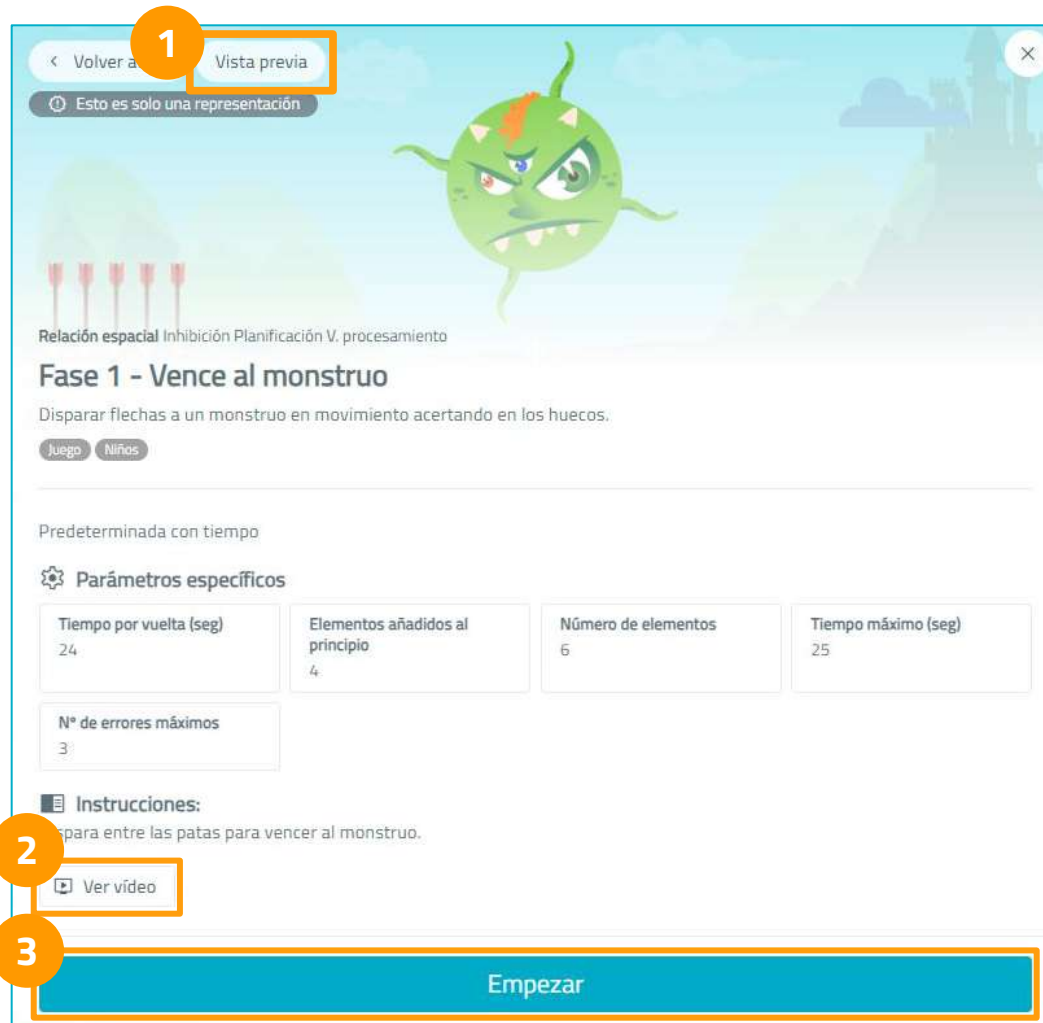

Dettagli di una fase

Premi il pulsante **“Anteprima”** (1) per visualizzare un’anteprima della schermata che vedrà l’utente durante l’intervento.

Puoi anche visualizzare i **parametri specifici** della fase selezionata dell’attività.

Nella parte inferiore, nella sezione delle istruzioni, si trova il pulsante **“Guarda video”** (2). Premi per **aprire e riprodurre il video delle istruzioni**.

Premi **“Inizia”** (3) per avviare l’attività.

Attività digitali



All'interno di un'attività aggiornata

Accedi al **menu** premendo il pulsante in basso a sinistra. Sono disponibili diverse opzioni:

- **Schermo intero (1).**
- **Audio dell'attività (2).**
- **Lavagna (3):** questa opzione permette di disegnare sopra l'attività come una lavagna, in modo da poter rafforzare la spiegazione al tuo utente. Non disponibile nelle sessioni per casa.
- **Impostazioni di accessibilità (4):**

Opzioni di **colore**: se il tuo utente ne ha bisogno, puoi regolare il contrasto, la saturazione e la luminosità.

Opzioni del **cursore**: puoi modificarne la dimensione, attivare il cursore ad alto contrasto e disattivare il cursore di NeuronUP per utilizzare quello predefinito del tuo sistema.

Attività digitali

PERSONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CLASSICHE



Quando desideri rivedere un'attività già personalizzata in precedenza, la troverai nell'elenco delle personalizzazioni dell'attività.

Per modificare una personalizzazione già creata, premi "Modifica".

Generatori classici

Una volta aperta l'attività, hai la possibilità di personalizzare le modalità selezionando **"Modalità personalizzate" (1)**.

Per creare una nuova personalizzazione, **inserisci un nome per la personalizzazione (2)**. Premi **"Continua"** per regolare i parametri.

Schede e giochi classici

Puoi aggiungere una descrizione alla personalizzazione per ricordarne più facilmente le caratteristiche. Inizia la personalizzazione premendo "Aggiungi" e personalizza le caratteristiche desiderate.

Attività digitali

PERSONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CLASSICHE

Aspectos generales

Funcionamiento

☒ Corrección Errores máximos 3

☐ Libre

Tiempo máximo

☒ Si 10 Minutos

☐ No 0 Segundos

Aviso inactividad

☒ Si 2 Minutos

☐ No 0 Segundos

Instrucciones

Imagina que vas a comprar algo y tienes que pagar. Pon en el centro la cantidad exacta.

Cronómetro visible

☐ Si, cuenta atrás

☐ Si, cuenta adelante

☒ No

Finalizar

In "**aspetti generali**" puoi scegliere la modalità di lavoro, adattare il tempo, avvisare l'utente quando è inattivo, adattare le istruzioni dell'attività e aggiungere un cronometro.

Parámetros

Tipo de moneda

Euro

Tipo de cantidades

☐ Enteros

☒ Decimales

Rango de cantidades

De 0 a 10

Billete/moneda mayor

500 (billete)

Finalizar

I "**parametri**" sono specifici di ogni attività. In questo caso, ci troviamo in un'attività di gestione del denaro, quindi puoi scegliere il tipo di valuta, la quantità di banconote/monete e il loro valore.

Adaptabilidad

Movimiento de elementos


☒ Arrastrar

☐ Pulsar

Finalizar

La scheda "**adattabilità**" permette di selezionare la modalità di interazione più adeguata per l'utente, scegliendo tra trascinare o premere sugli elementi. Queste opzioni non sono disponibili in tutte le attività.

Attività digitali

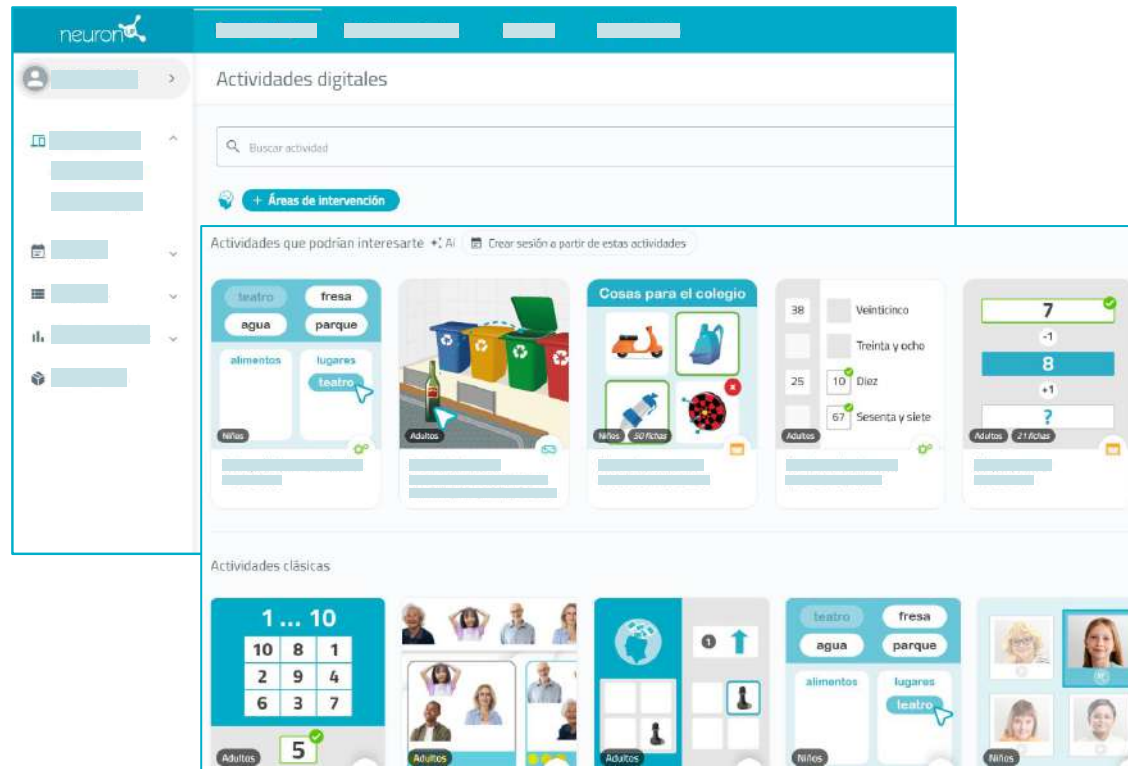


ATTIVITÀ CONSIGLIATE

Nell'elenco delle attività digitali compare una sezione dedicata alle attività consigliate. Questo suggerimento si basa sull'uso che il professionista fa della piattaforma, sugli utenti registrati e sul tipo di centro.

Queste attività possono essere selezionate individualmente oppure utilizzate per creare una sessione direttamente dall'elenco.

Attività su carta

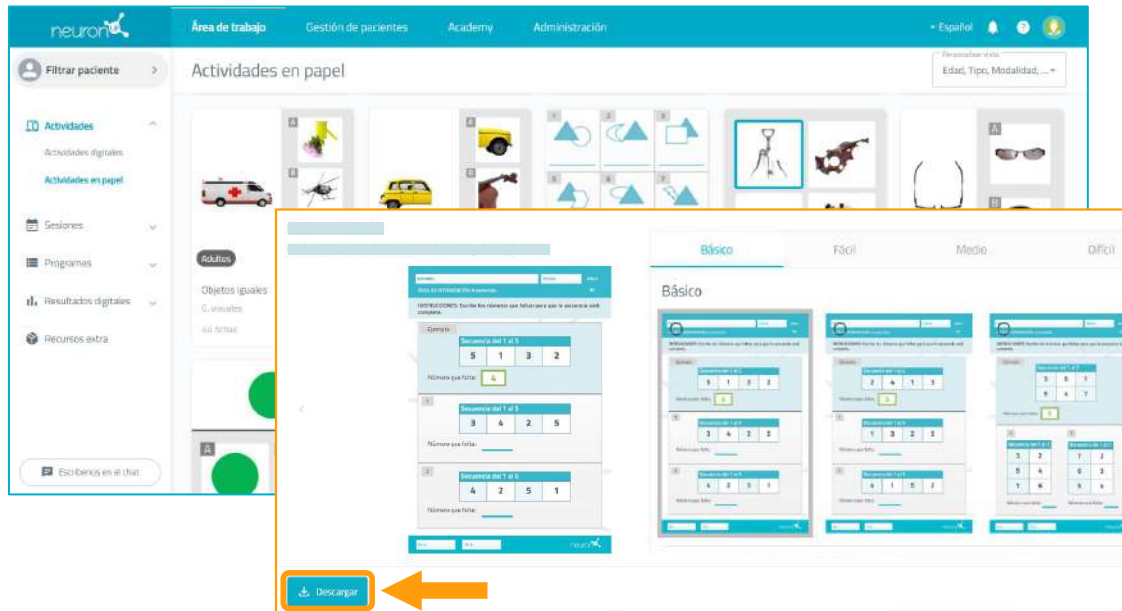

Le attività su carta sono disponibili per il download in **formato PDF**.

Seleziona gli esercizi che desideri utilizzare e premi Download.

Una volta scaricate, stampale e consegnale agli utenti.




NOTA:

- **Ricorda di conservare in modo sicuro i documenti scaricati** per non compromettere la riservatezza dei tuoi utenti, soprattutto se condividi il dispositivo.

5. Lavorare con le sessioni

Sessioni digitali, sessioni modello, sessioni su carta
e sessioni simili

Sessioni digitali

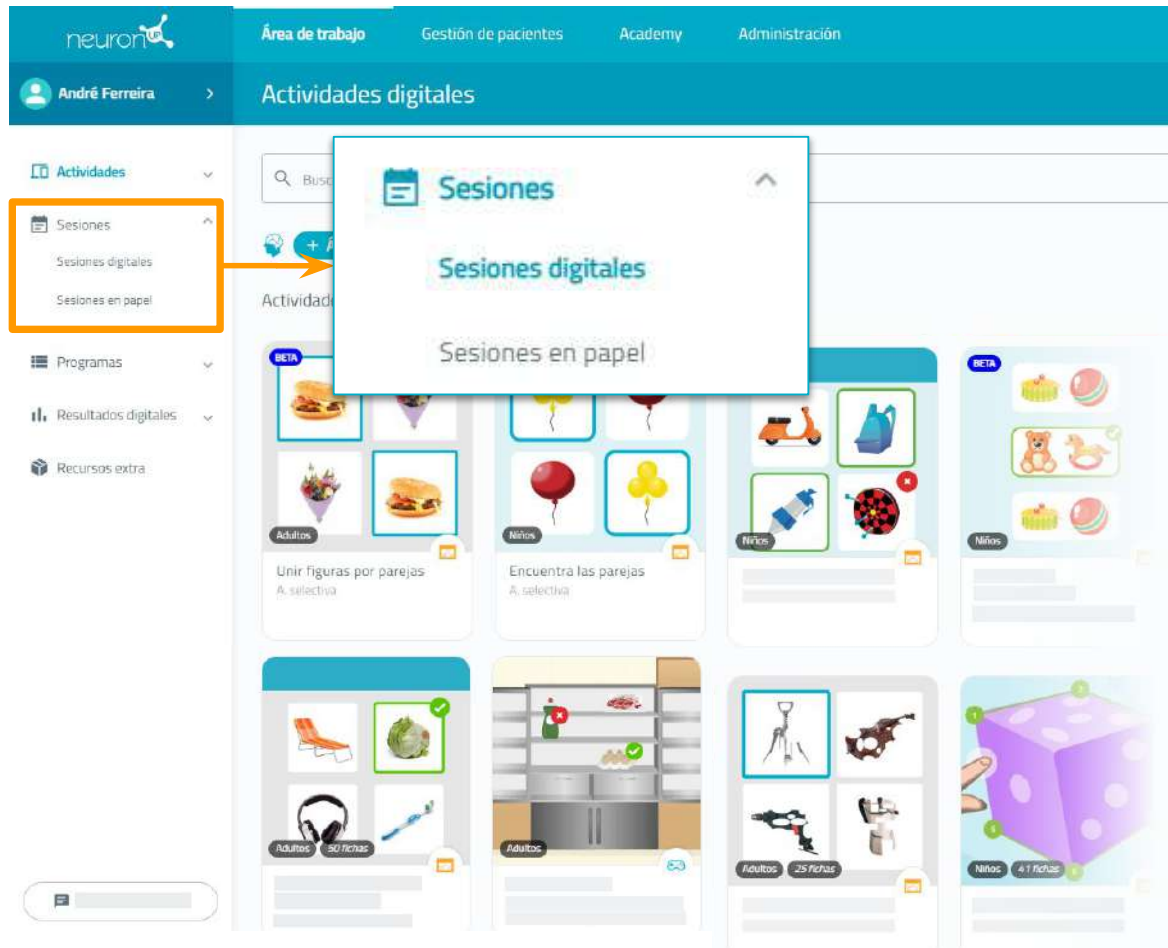

Una sessione è un insieme di attività.


La creazione di sessioni ti permette di pianificare il tuo lavoro in pochi minuti. Puoi creare una sessione digitale o una sessione su carta.

Per lavorare con una sessione devi crearla, salvarla e assegnarla all'utente con cui desideri lavorare.



Nelle pagine seguenti viene spiegato come lavorare con le sessioni in NeuronUP Rehab.

Interfaccia delle sessioni

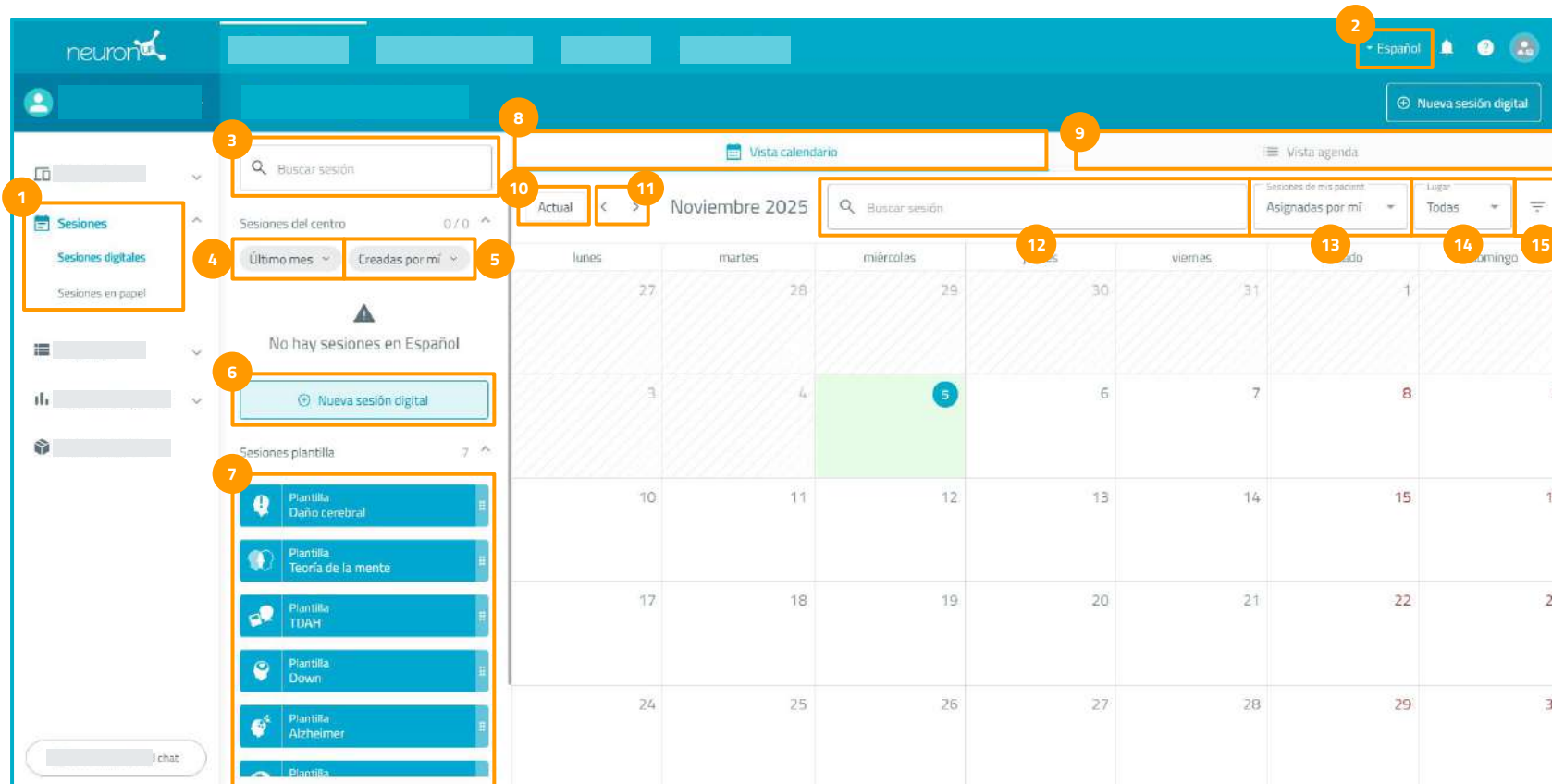


Opzioni della schermata delle Sessioni:

1. Selezione del tipo di sessioni
2. Lingua della sessione
3. Ricerca della sessione
4. Filtro intervallo
5. Filtro professionista creatore
6. Crea nuova sessione digitale
7. Sessioni modello
8. Vista calendario
9. Vista agenda
10. Pulsante attuale
11. Freccie di selezione del mese
12. Barra di ricerca della sessione
13. Filtro "Sessioni dei miei utenti"
14. Filtro "Luogo"
15. Filtro generale

Lavorare con sessioni digitali



Sesiones digitales

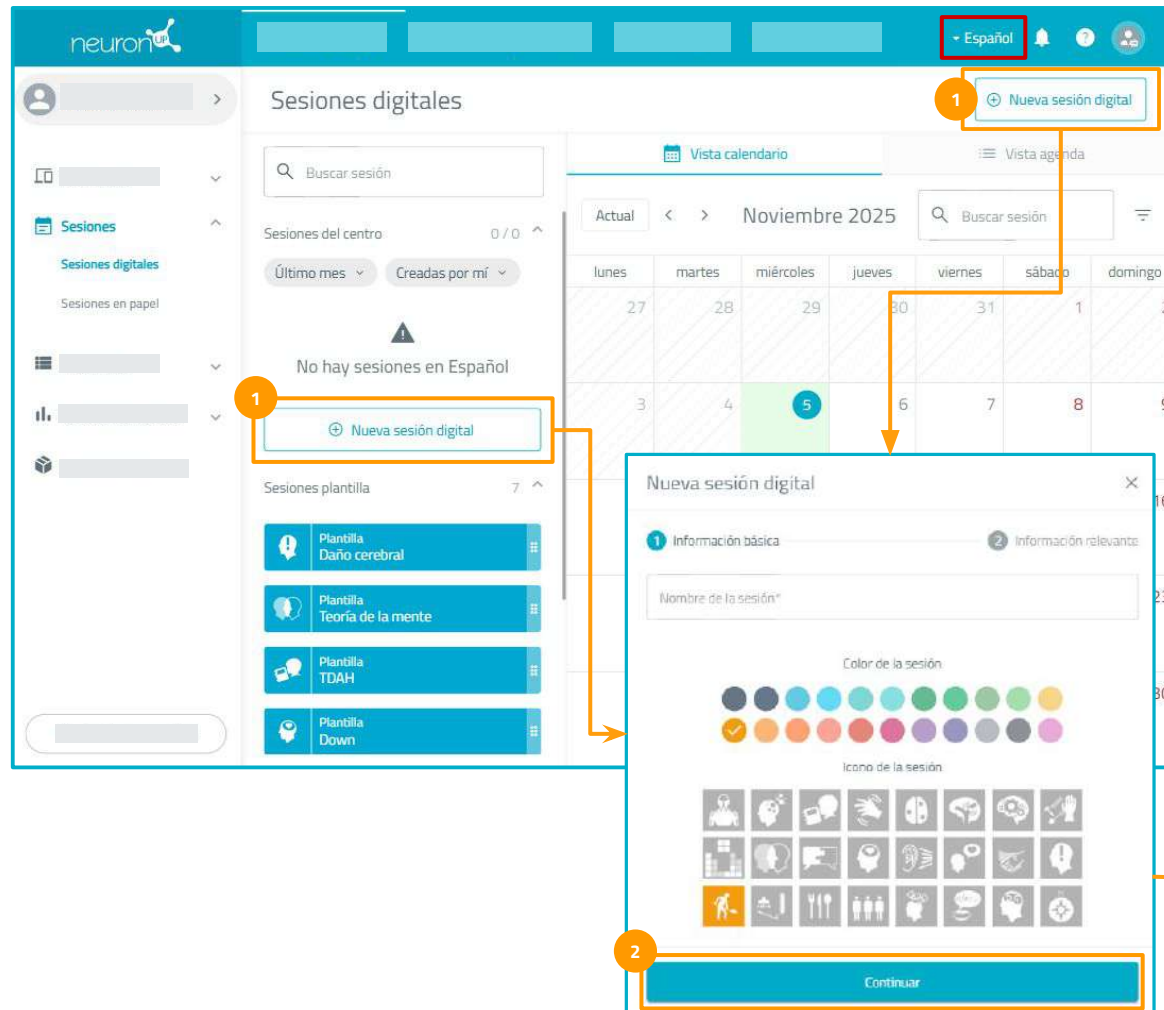


Prima di premere “Nuova sessione digitale”, seleziona la lingua delle attività.

Una volta creata la sessione, non è possibile modificare la lingua né aggiungere attività in lingue diverse all'interno della stessa sessione.

Premi **“Nuova sessione digitale”** (1). Nella finestra di creazione:

- Aggiungi le informazioni di base della sessione, scrivi il nome della sessione e seleziona un colore e un'icona. Questo ti permette di identificare la sessione nell'elenco una volta creata.
- Premi **“Continua”** (2).
- Aggiungi le informazioni rilevanti della sessione. Scrivi o seleziona le etichette e una descrizione della sessione.
- Questo ti aiuta a ricordare il contenuto e a trovare la sessione una volta creata.
- Una volta completata la descrizione, premi **“Crea”**.

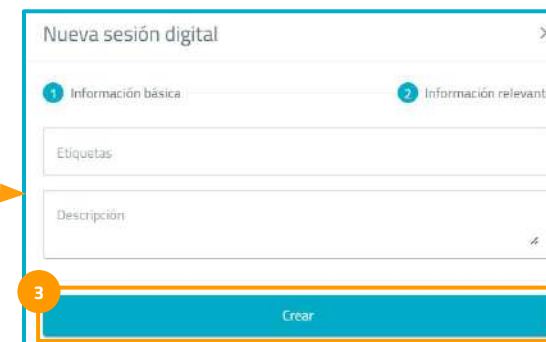

Sesiones digitales

The screenshot shows the 'Nueva sesión para mayores' (New session for seniors) interface. The main area displays session information and a list of activities. Three numbered annotations highlight key features:

- 1:** Points to the '+ Áreas de intervención' (Intervention areas) button, which opens a modal for selecting cognitive functions.
- 2:** Points to the 'Fichas', 'Generadores', and 'Juegos' (Cards, Generators, Games) filters.
- 3:** Points to the 'Edad' (Age) dropdown menu, which is currently set to 'Todas' (All).

The 'Áreas de intervención' modal shows a list of cognitive functions under 'Funciones cognitivas' and 'Áreas de ocupación'.

Funciones cognitivas:

- ☐ Velocidad de procesamiento
- ☐ Orientación
- ☐ Atención
- ☐ Memoria
- ☐ Lenguaje
- ☐ Funciones ejecutivas
- ☐ Gnosias
- ☐ Praxias
- ☐ Habilidades visoespaciales
- ☐ Cognición social


Actividades actualizadas:

- Localiza los sonidos (M. episódica)
- Empareja las cartas de póquer (M. episódica, M. trabajo, A. selectiva)
- Empareja las cartas (M. episódica, M. trabajo, A. selectiva)

La base de la sesión è stata creata, ora devi aggiungere le attività che desideri.

Per farlo, puoi filtrare le attività per **area di intervento** (1), per **tipo di attività** (2) o per **età** (3).

Sessioni digitali

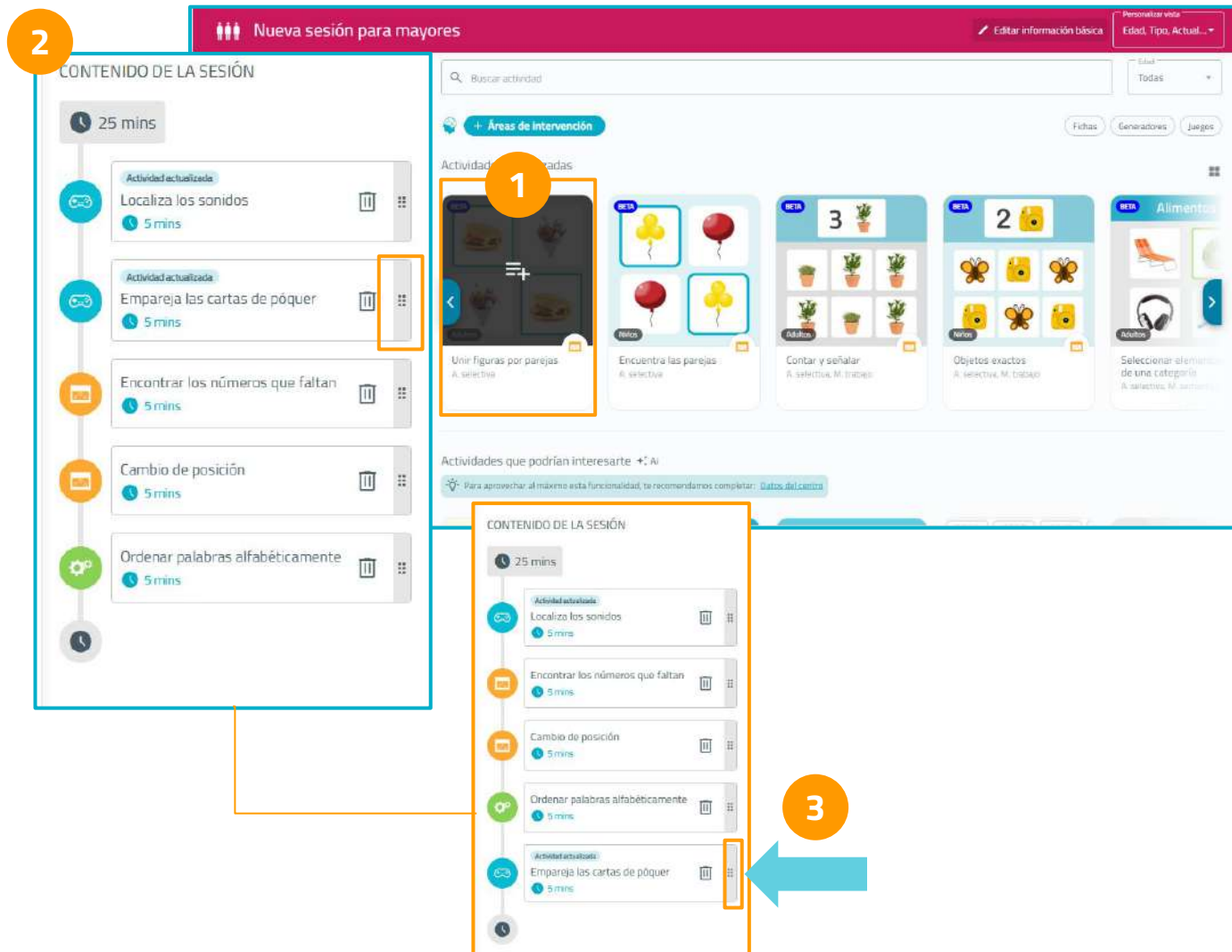

Premi sulle attività che desideri aggiungere alla tua sessione (1).

Le attività selezionate vengono elencate sul lato sinistro dello schermo (2).

**È possibile aggiungere la stessa attività più volte.*

Puoi **modificare l'ordine** delle attività: basta tenere premuta l'attività e spostarla nella posizione desiderata (3).

Sessioni digitali

Per impostazione predefinita, ogni attività durerà 5 minuti e l'utente inizierà dal livello in cui si è fermato l'ultima volta che l'ha svolta, oppure dal livello più basso se non ha mai lavorato con l'attività selezionata.

Puoi modificare queste impostazioni: premi su ciascuna attività per cambiare la configurazione predefinita.

CONTENIDO DE LA SESIÓN

25 mins

Actividad actualizada

Localiza los sonidos
5 mins

Encontrar los números que faltan
5 mins

Cambio de posición
5 mins

Ordenar palabras alfabéticamente
5 mins

Actividad actualizada

Empareja las cartas de póquer
5 mins

Bolaguer

Jiménez
Díaz
Bolaguer
Navarro
Losada

Ordenar palabras alfabéticamente

Ordenar palabras por orden alfabético.

M. trabajo | M. semántica | Lectura

Tiempo

Minutos*
5

Segundos*
0

Elegir dónde empezar

NO

Empezar en último resultado

¿Cuántas veces se realizará esta actividad? ⓘ

Nº de repeticiones*
1

Guardar

Generatori


- Definisci il tempo di lavoro.
- Scegli da dove vuoi che inizi l'utente. Nel caso dei generatori, seleziona la configurazione. Scegli quante volte l'attività verrà eseguita.



È importante **aumentare il numero di ripetizioni** se si desidera che l'utente lavori con il generatore per tutto il tempo stabilito.

In caso contrario, una volta completate le ripetizioni impostate, il sistema passerà automaticamente all'attività successiva senza considerare il tempo definito.


Sessioni digitali

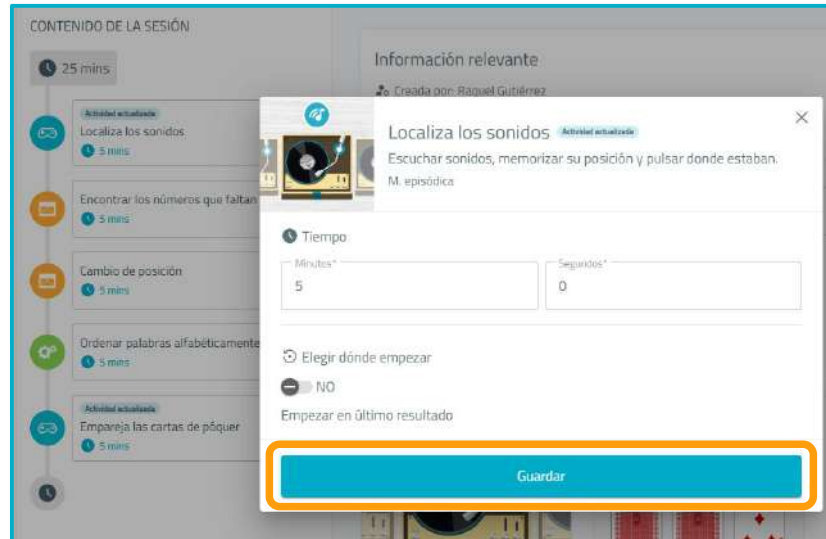

Giochi

Per i giochi, il processo è simile.

La differenza è che puoi determinare il **livello o la fase** da cui inizierà.

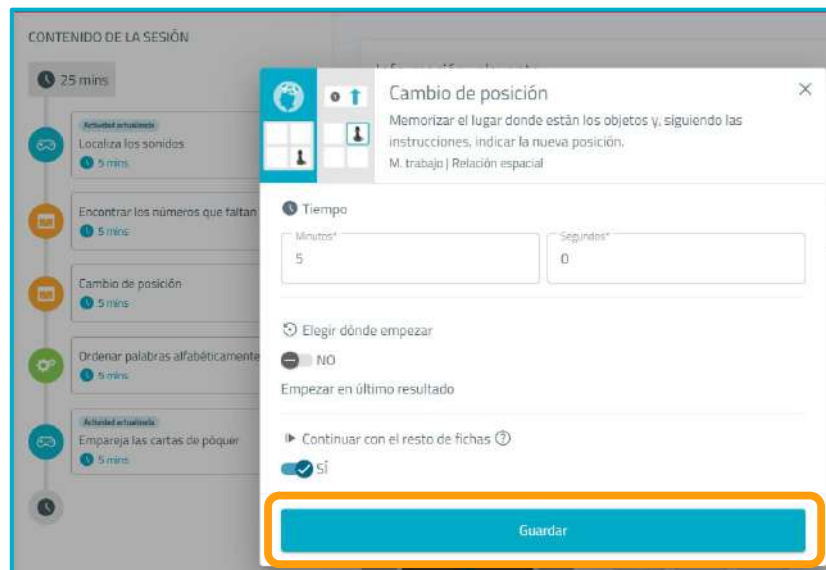


Schede

Per le schede, il processo è identico a quello dei giochi.

Puoi anche decidere se l'utente **continuerà** con il resto delle schede per tutta la durata dell'attività.

**Non dimenticare di premere "salva" ogni volta che personalizzi un'attività.*

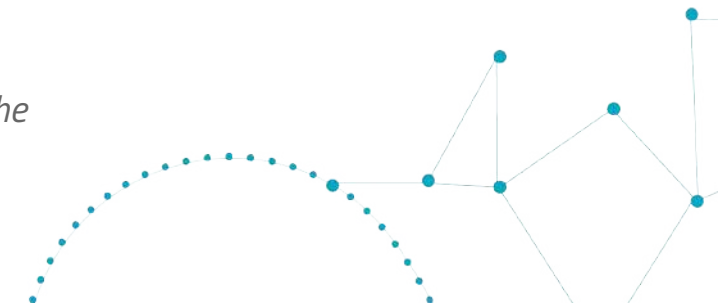

Sesiones digitales

neuronUP

Área de trabajo Gestión de usuarios Academy Administración

Filtrar usuario

Nueva sesión para mayores

Editar información básica Personalizar vista Edad, Tipo, Actual...

CONTENIDO DE LA SESIÓN

Información relevante

Creada por: Raquel Gutiérrez

Idioma: Español

60-70 años, mayores

Editar información relevante

Buscar actividad

Edad: Todas

+ Áreas de intervención

Fichas Generadores Juegos

No hay actividades

Añade actividades del listado de la derecha


Sesión sin actividades

Eliminar sesión



Finalizar

Una volta configurata la sessione, premi “Finalizza” in basso a destra per salvare la sessione.

Puoi modificare la sessione in un secondo momento, se necessario.

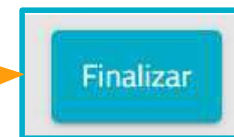

Sessioni digitali

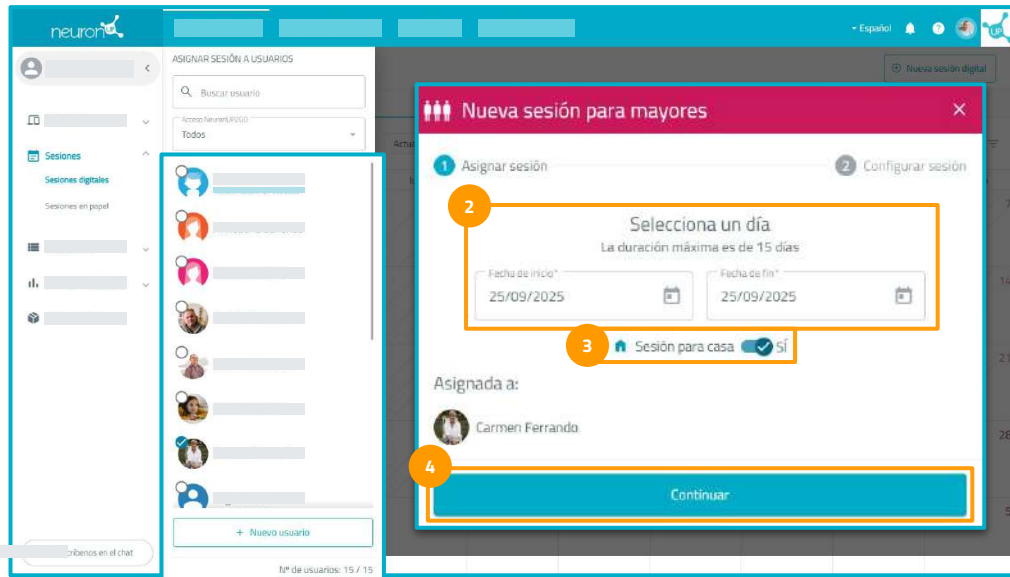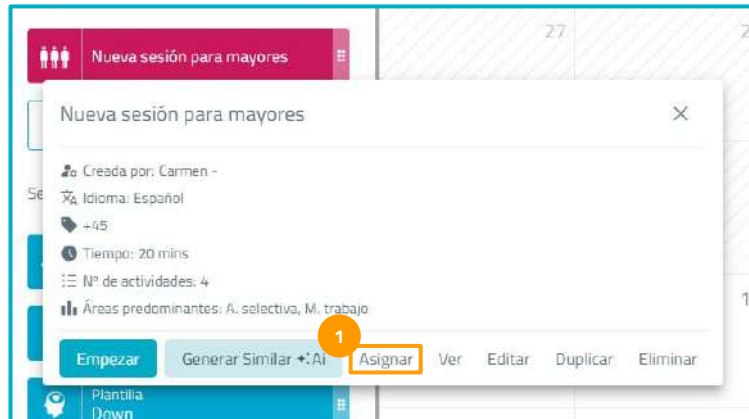

ASSEGNA LA SESSIONE DIGITALE

Due opzioni per assegnare una sessione:

- Fare clic sul pulsante **“Assegna”** (1) e indicare la data di inizio e la data di fine (2).
- **Trascinare la sessione sul giorno di inizio** corrispondente nel calendario.

Successivamente, si **selezionano uno o più utenti** a cui assegnare la sessione e si definiscono le date di inizio e di fine.

Se si desidera che l'utente lavori da remoto, attivare l'opzione **“Sessione per casa”** (3).

Per avviare una sessione, questa deve essere assegnata e programmata all'interno di un intervallo di date che includa il giorno corrente.

Una volta completata l'assegnazione, premere **“Continua”** (4).

Sessioni digitali

Nella scheda successiva si **configura la sessione** affinché si adatti alle esigenze del paziente.

Ci sono 4 opzioni di comportamento della sessione:

- **Sessione con Supervisione (1):** il paziente può uscire dalla sessione, saltare attività o visualizzare le soluzioni.
- **Conferma fine attività (2):** è necessario confermare la fine dell'attività per proseguire con la sessione.
- **Valutazione del paziente (3):** il paziente valuterà le proprie prestazioni al termine di ogni attività.
- **Pulsante continua (4):** le attività non proseguono finché non si preme il pulsante continua.

Una volta configurato il comportamento della sessione, premi il pulsante **"Assegna sessione"**.

Sessioni digitali

Nueva sesión para mayores

Sin empezar

Configuración

La duración máxima es de 15 días

Fecha de inicio

25/09/2025

Fecha de fin

05/10/2025

Sesión para casa

NO

Configurar sesión

Guardar

Asignada por

Idioma: Español

60-70 años, mayores

Nº de actividades: 5

Áreas predominantes: A, sostenida, M, episódica, M, trabajo

Empezar

Generar Similar +Ai


Ver

Editar

Duplicar

Eliminar

Premi **"Inizia"** affinché il tuo utente possa avviare la sua sessione digitale.

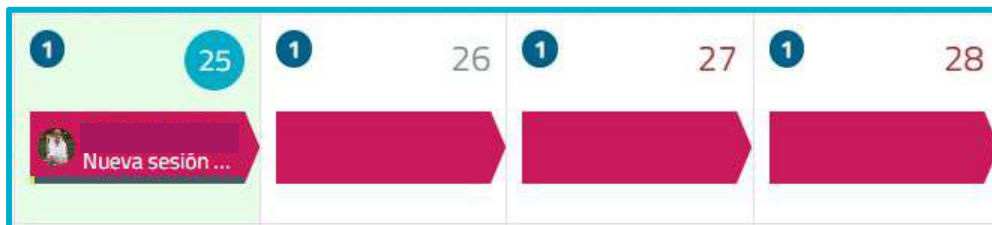

Una volta avviata la sessione, puoi seguirne **l'avanzamento** grazie alla comparsa di un indicatore

Screenshot 1: Vista calendario

Actual: Septiembre 2025


lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Screenshot 2: Vista agenda

Fecha	Sesión	Usuario	Progreso
25/9/25 - 5/10/25	Nueva sesión para mayores	Carmen Fernando	25% Completada

Puoi visualizzare e organizzare le tue sessioni con **la vista calendario** (1) o con la **vista agenda** (2).

Sesiones digitales

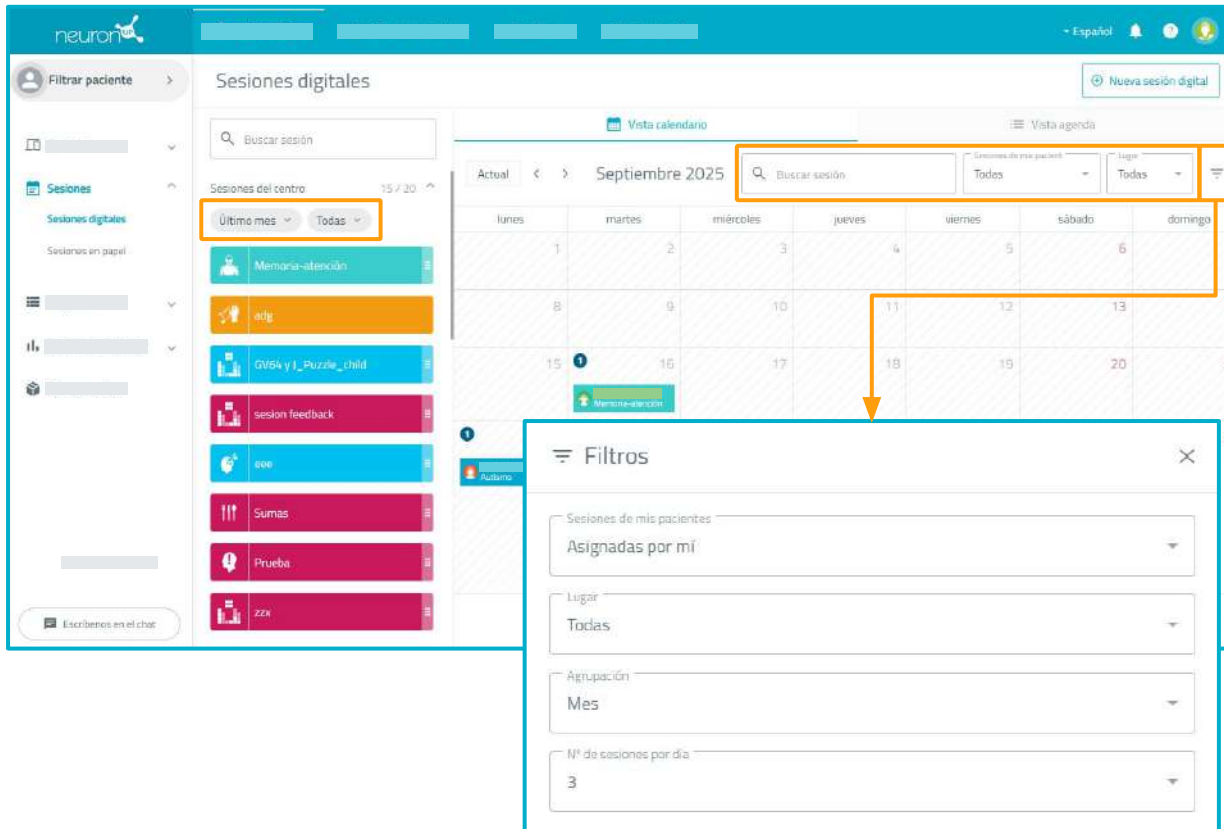


Hai a disposizione **diversi filtri** che ti permettono di visualizzare le informazioni in modo differente:

- Sessioni di altri professionisti
- Sessioni assegnate per casa o per il centro
- Sessioni assegnate da te o da altri professionisti del centro
- Visualizzazione per giorno o per mese
- Numero di sessioni visualizzate per impostazione predefinita ogni giorno, ecc.

Sessioni modello



Sesiones modelo

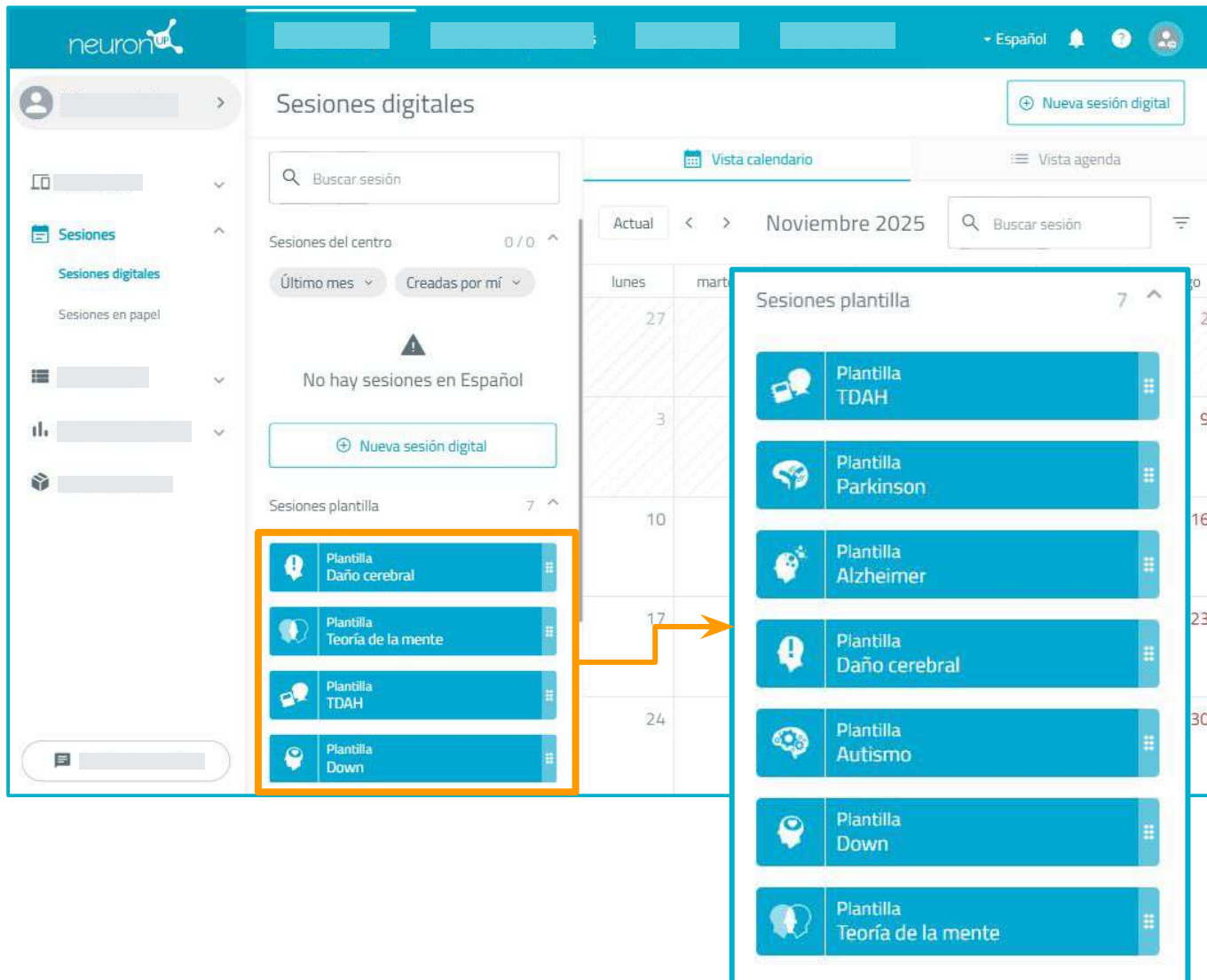

Le **sesiones modelo** sono schemi predefiniti che fungono da guida per svolgere gli interventi.

Queste sessioni, configurate di default, possono essere adattate per personalizzare l'intervento.

Le sessioni modello sono le seguenti:

- Modello ADHD
- Modello Parkinson
- Modello Alzheimer
- Modello Danno cerebrale
- Modello Autismo
- Modello Down
- Modello Teoria della mente



Le sessioni devono essere svolte sotto la supervisione di un professionista.


Ricorda di rivedere e personalizzare la sessione modello affinché sia adeguata al tuo utente.

Sesiones modelo



Spiegazioni delle sessioni modello:

- **Sessione ADHD:** Si concentra sulla capacità di generare, dirigere e mantenere uno stato di attivazione adeguato per il corretto processamento delle informazioni.
- **Sessione Parkinson:** In questa sessione si affrontano le funzioni cognitive compromesse nella malattia di Parkinson, concentrandosi su funzioni esecutive, velocità di elaborazione, attenzione e abilità visuo-spaziali.
- **Sessione Alzheimer:** Si lavorano diversi aspetti legati alla codifica, all'immagazzinamento e al recupero efficace delle informazioni apprese o degli eventi vissuti.
- **Sessione Danno cerebrale:** Si affrontano varie aree comunemente colpite dal danno cerebrale.
- **Sessione Autismo:** Sessione con un approccio visivo, concreto e altamente strutturato. Progettata con compiti che includono supporti costanti e una presentazione chiara e prevedibile.
- **Sessione Down:** Attraverso questa sessione si affrontano aree fondamentali per lo sviluppo delle persone con sindrome di Down, tra cui memoria, attenzione, ragionamento, linguaggio, abilità sociali e autonomia personale.
- **Sessione Teoria della mente:** In questa sessione si esplora come gli esseri umani comprendono e attribuiscono stati mentali sia a sé stessi che agli altri.

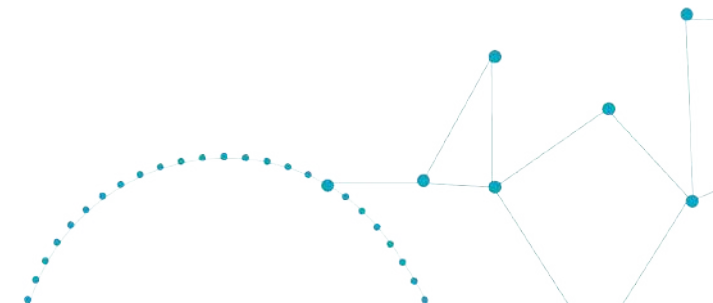

Lavorare con sessioni su carta



Sesiones su carta



Prima di premere “Nuova sessione su carta”, seleziona la lingua delle attività.

Una volta creata la sessione, non è possibile modificare la lingua né aggiungere attività in lingue diverse all'interno della stessa sessione.

Facendo clic su **“Nuova sessione su carta”** (1), viene visualizzata la finestra di creazione.

Il processo di creazione di una sessione su carta funziona nello stesso modo di una sessione digitale.

Si inseriscono le **informazioni di base** della sessione, assegnandole un colore e un'icona identificativa.

Una volta completati questi campi, premi **“Continua”** (2).

Nella scheda successiva si aggiungono i **dati rilevanti** della nuova sessione, le **etichette** necessarie per la sua classificazione o identificazione e una **descrizione**.

Una volta completate le informazioni, premi **“Crea”** (3).

Sesiones su carta

Edad

Todas

Todas

Adulto

Infantil

Buscar actividad

+ Áreas de intervención

No hay actividades

Añade actividades del listado de la derecha

Actividades que podrían interesarte

Áreas de intervención

Funciones cognitivas

Áreas de ocupación

Velocidad de procesamiento

Orientación

Atención

Memoria

Lenguaje

Funciones ejecutivas

Gnosias

Praxias

Habilidades visoespaciales

Cognición social

Un huevo

50 gramos

1 kilo

Estimación de pesos

Razonamiento

DÚGATE

Pasito a pasito (texto)

Planificación

Razonamiento

Sudoku

Ordenar números

Finalizar

Una volta creata la base della sessione, si aggiungono le attività che si desidera includere.

Puoi filtrare le attività per **area di intervento** (1), per **tipo di attività** (2) o per **età** (3).

È possibile aggiungere la stessa scheda più volte.

Sesiones su carta

The screenshot shows the 'Nueva sesión para mayores' (New session for seniors) interface. On the left, there's a sidebar with 'Sesiones' (Sessions) and 'Sesiones en papel' (Paper sessions). The main area displays 'Actividades que podrían interesarte' (Activities you might be interested in). One activity, 'Clasificar números por valor' (Classify numbers by value), is highlighted with an orange box. An arrow points from this box to a detailed view of the activity. In this detailed view, the 'Añadir' (Add) button at the bottom left is also highlighted with an orange box.

neuronUP

Nueva sesión para mayores

Editar información básica

Personalizar vista

Edad, Tipo, Modal...

CONTENIDO DE LA SESIÓN

Buscar actividad

Etiquetas: Todas

Modalidad: Todas

+ Áreas de intervención

Fichas Generadores

Actividades que podrían interesarte +, AI

No hay actividades

Añade actividades del listado de la derecha

Clasificar números por valor

Razonamiento, M. semántica

Un huevo

50 gramos

1 kilo

Estimación de pesos

Razonamiento

DOCHATE

Un vaso y un frasco están vacíos.

Un paraguas al viento.

Unos zapatos al viento.

Unos zapatos al viento.

Paso a paso (texto)

Planificación, Razonamiento, Comprensión

Sudoku

M. trabajo, Flexibilidad, Planificación, Razonamiento

Ordenar números

V. procesamiento, Razonamiento

Clasificar números por valor - ER10

Razonamiento, M. semántica

Básico 1 - ER10B1

Clasificar una serie de números según su valor.

Básico

Fácil

Medio

Añadir

È necessario **premere** sulle attività che si desidera aggiungere alla sessione.

Premendo, si apre una scheda per scegliere gli esercizi. Premi il pulsante **"Aggiungi"** nella parte inferiore sinistra per inserirli nella sessione.

Le schede selezionate vengono visualizzate sul lato sinistro dello schermo man mano che vengono aggiunte.

L'ordine delle schede può essere modificato tenendo premuta la scheda e spostandola nella posizione desiderata.

Sessioni su carta

The screenshot displays the neuronUP interface for creating a session for older adults. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options like "Sesiones" and "Sesiones en papel".
- Top Bar:** Includes the neuronUP logo and a title "Nueva sesión para mayores".
- Central Grid:** Displays a selection of activity cards, including "1 ... 10", "Cambio de posición", "Cada palabra con su familia", "Memorización de números por historia", and "Parejas de palabras".
- Right Panel:** Provides a detailed view of the selected activity, "Cada palabra con su familia". It includes a description, a list of concepts (e.g., teatro, fresa, agua, parque), and a "Finalizar" button.

An orange arrow points from the "Cada palabra con su familia" card in the central grid to the detailed view on the right. Another orange arrow points from the "Finalizar" button in the detailed view to a separate "Finalizar" button box at the bottom right.

Nel caso in cui si aggiunga un **generatore**, una volta incluso nella sessione, è possibile configurarlo premendo su di esso e selezionando l'opzione **"Scegli dove iniziare"**.

Puoi iniziare in modo predefinito oppure da una delle configurazioni personalizzate.

Una volta configurata la sessione, premi **"Finalizza"** in basso a destra per salvare le modifiche.

La sessione può essere modificata in un secondo momento, se necessario.

Sesiones su carta

The screenshot shows the NeuronUP web interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Sesiones' and 'Sesiones en papel'. The main content area is titled 'Sesiones en papel' and features a search bar, a calendar view for November 2025, and a list of sessions. One session, 'Nueva sesión para mayores', is highlighted with an orange box. A modal window for this session is open, displaying the following information:

- Creada por: Carmen -
- Idioma: Español
- +18
- Nº de actividades: 6
- Áreas predominantes: M. semántica, M. trabajo, Planificación


At the bottom of the modal, there are five buttons: 'Asignar', 'Ver', 'Editar', 'Duplicar', and 'Eliminar'.

Una volta creata la sessione su carta, questa viene visualizzata sul lato sinistro dell'elenco delle sessioni.

È possibile eseguire le seguenti azioni:

- Assegna (funziona come per le sessioni digitali)
- Visualizza
- Modifica
- Duplica
- Elimina

Sesiones su carta

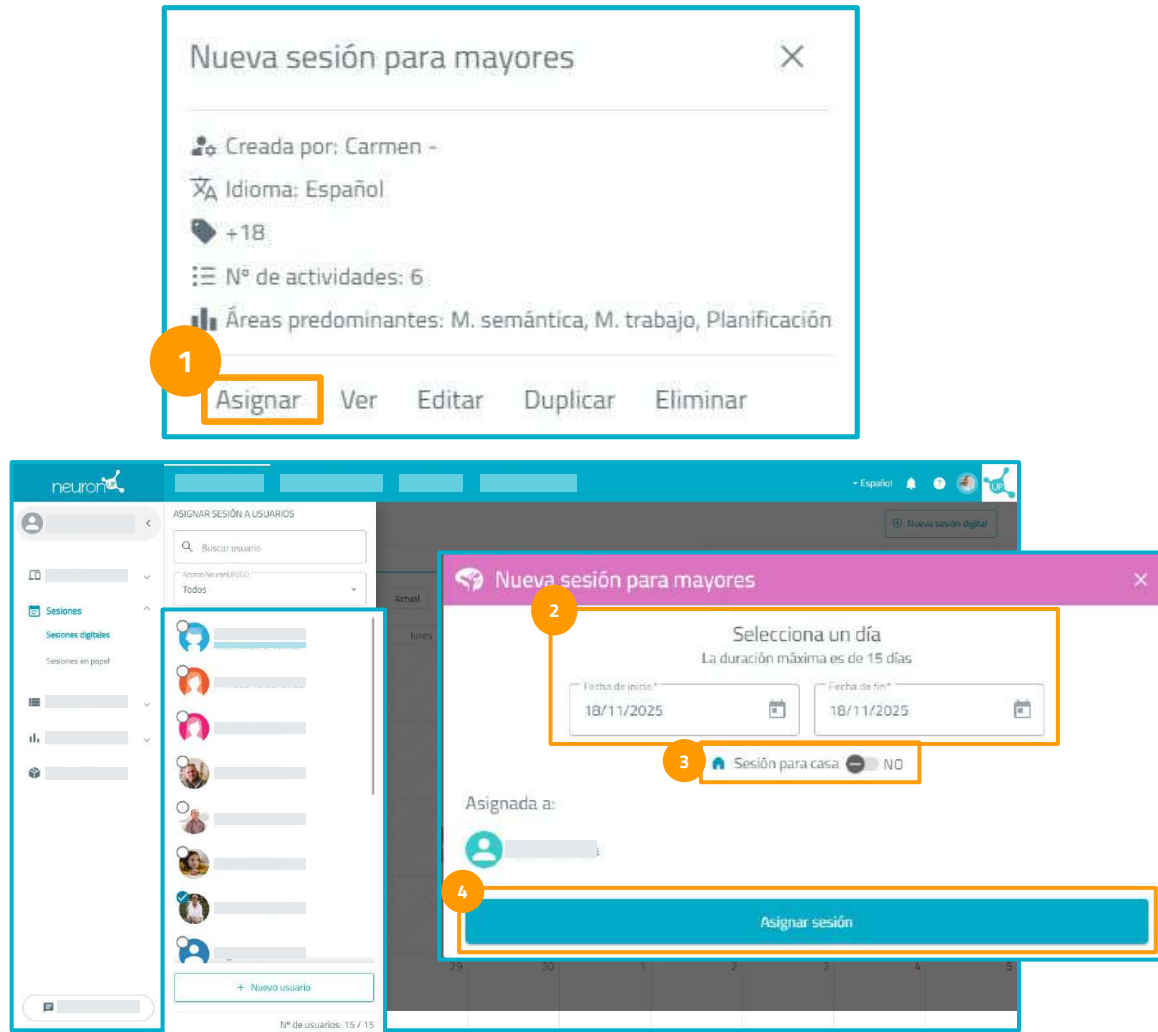

ASSEGNA LA SESSIONE SU CARTA

Per assegnare la sessione hai due opzioni:

1. Clicca sul pulsante **"Assegna"** (1) e indica una **data di inizio e di fine** (2).
2. **Trascina la sessione** sul giorno in cui vuoi che inizi **nel calendario**.

Seleziona uno o più utenti a cui assegnare la sessione.

- Definisci la data di inizio e di fine della sessione.
- Attiva il filtro **"Sessione per casa"** (3) se desideri che il tuo utente lavori da remoto.

Per avviare una sessione, questa deve essere assegnata e programmata all'interno di un intervallo di date che includa il giorno corrente.

Una volta assegnata la sessione, premi "Assegna sessione" (4).

La sessione è ora assegnata.

Sessioni simili



Sessioni simili

The screenshot shows the NeuronUP interface. At the top, there are filters for 'Último mes' and 'Creadas por mí'. Below these is a calendar grid with columns for 'lunes' and 'martes'. A session titled 'Nueva sesión para mayores' is highlighted in the calendar. A modal window is open over the session, displaying its details: 'Creada por: Carmen', 'Idioma: Español', '+45', 'Tiempo: 20 mins', 'Nº de actividades: 4', and 'Áreas predominantes: A. selectiva, M. trabajo'. At the bottom of the modal, there are several buttons: 'Empezar', 'Generar Similar +Ai' (highlighted with an orange border), 'Asignar', 'Ver', 'Editar', 'Duplicar', and 'Eliminar'. The background calendar shows dates 27, 28, 4, 11, 17, and 18.



Funzionalità disponibile solo per le **sessioni** digitali. Controlla la sessione generata prima di assegnarla a un utente.

A partire dalle sessioni digitali già create nel tuo profilo, puoi **creare nuove sessioni simili** con un solo clic.

Risparmia tempo nella pianificazione e organizzazione dei tuoi interventi e adatta facilmente le sessioni alle esigenze dei tuoi utenti.

Sessioni simili

The diagram illustrates the process of creating similar sessions. It consists of three main parts:

- Step 1: Información básica** (Basic Information). This screen includes a text field for 'Nombre de la sesión*', a color selection grid for 'Color de la sesión', and a grid of icons for 'Icono de la sesión'. A blue 'Guardar' button is at the bottom, highlighted with a red circle and the number 1.
- Step 2: Información relevante** (Relevant Information). This screen includes a text field for 'Etiquetas' and a text area for 'Descripción'. A blue 'Generar' button is at the bottom, highlighted with a red circle and the number 2.
- Loading Screen**. After clicking 'Generar', the user is shown a screen with the text 'Haciendo ciencia...' and an 'Ai' logo.



Prima di premere “Genera sessione simile”, seleziona la lingua delle attività.

Non è possibile modificare la lingua una volta creata la sessione né aggiungere attività in altre lingue all'interno della stessa.

Premendo “Genera simile”, compare questa finestra.

- Scrivi le informazioni di base della sessione che desideri creare e assegna un colore e un'icona per identificarla.
- Quando hai terminato, premi **“Salva”** (2).
- Nel passaggio successivo, aggiungi le etichette che ti aiutino a classificarla o a ritrovare la sessione, e una breve descrizione.
- Quando hai completato tutti i campi, premi **“Genera”** per creare la sessione.

Sesiones simili

The screenshot shows the 'Sesión Similar mayores' interface. On the left, a sidebar lists activities: 'Par o impar' (5 mins), 'Números revueltos' (5 mins), 'Pares con pares' (5 mins), and 'Clasificar números por valor' (5 mins). The main area displays 'Información relevante' (Created by: Carmen, Language: Español, Session type: Sesión similar de Sesión similar sesión para mayores, +45) and a search bar 'Buscar actividad'. A modal window titled 'Áreas de intervención' is open, showing a list of cognitive functions: Velocidad de procesamiento, Orientación, Atención, Memoria, Lenguaje, Funciones ejecutivas, Gnosias, Praxias, Habilidades visoespaciales, and Cognición social. A dropdown menu for 'Edad' is open, showing options: Todas, Adulto, and Infantil. A 'Finalizar' button is highlighted in the bottom right corner. Numbered callouts indicate: 1. 'Áreas de intervención' button; 2. 'Edad' dropdown; 3. 'Finalizar' button; 4. 'Finalizar' button.

Quando la sessione simile sarà creata, potrai **aggiungere, spostare o eliminare** i suoi contenuti.

Controlla le attività e termina di adattare alle esigenze dei tuoi utenti.

Quando avrai completato la configurazione della sessione, premi **"Finalizza"** (4) in basso a destra per salvarla.

Potrai modificarla in un secondo momento, se necessario.

6. Lavorare con i programmi



Programmi

The screenshot displays the 'Programas digitales' section of the NeuronUP application. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. The user 'André Ferrelra' is logged in. The left sidebar contains 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The 'Programas' section is expanded, showing 'Programas digitales' and 'Programas en papel'. The main area features a search bar, a calendar for November 2025, and a 'Nuevo programa digital' button. An orange box highlights the 'Programas' menu item, and a blue box highlights the 'Programas digitales' option within it. An arrow points from the 'Programas digitales' option to the 'Nuevo programa digital' button.

Un programa è un insieme di sessioni. I programmi ti permettono di pianificare il tuo lavoro per diversi mesi in poco tempo.

Per iniziare, premi "Programma" e poi "Programmi digitali" o "Programmi su carta" nella parte sinistra dello schermo.

I programmi digitali e i programmi su carta si creano nello stesso modo, come spiegato nelle pagine seguenti.

L'unica differenza è che devi selezionare "Programma digitale" o "Programma su carta" a seconda del tipo che desideri creare.

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

The screenshot shows the 'Programas digitales' section of the neuronUP interface. The top navigation bar includes 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', and 'Administración'. The user 'André Ferreira' is logged in. The main content area displays a calendar for November 2025. A sidebar on the left contains navigation options like 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas', 'Programas digitales', 'Programas en papel', 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. A search bar 'Buscar programa' is present. A message states 'No hay programas en Español'. A button 'Nuevo programa digital' is highlighted with a red box and labeled '1'. An arrow points from this button to a modal window titled 'Nuevo programa digital'. This modal has two tabs: '1 Información básica' and '2 Información relevante'. The 'Información básica' tab contains a text field for 'Nombre del programa*', a color selection grid labeled 'Color del programa', and an icon selection grid labeled 'Icono del programa'. A 'Continuar' button is at the bottom, highlighted with a red box and labeled '3'. An arrow points from the 'Continuar' button to a second modal window, also titled 'Nuevo programa digital', which is in the '2 Información relevante' tab. This second modal has text fields for 'Etiquetas' and 'Descripción', and a 'Crear' button at the bottom, highlighted with a red box and labeled '4'.

Quando premi **“Nuevo programa digital”** (1, 2), si aprirà una nuova finestra.

- Scrivi le **informazioni di base** del programma che desideri creare e assegnagli un colore e un'icona per identificarlo.
- Quando hai terminato, premi **“Continua”** (3).
- Nella scheda successiva, aggiungi le informazioni rilevanti del nuovo programma:
- le etichette che ti aiutino a classificarlo o a ritrovarlo, e una breve descrizione.
- Una volta completato, premi **“Crea”** (4).

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

The screenshot shows the 'Programa Mayores' interface. On the left, under 'CONTENIDO DEL PROGRAMA', there are two session items: 'grupo mañana- Alzheimer' (25 min) and 'Velocidad de procesamiento' (30 min). The main area displays 'Información relevante' (Created by: Raquel Gutiérrez, Language: Español, Age: 40-60) and a search bar. Below this is a table of sessions with columns for 'Sesión', 'Profesional', and 'Acciones'. The table lists four sessions, all created by Raquel Gutiérrez. Each session row has a 'Ver' button, an 'Editar' button, a 'Duplicar' button, and a 'Generar Similar +:Ai' button. A blue arrow points to the 'Añadir' button next to each 'Generar Similar' button. At the bottom right, a 'Finalizar' button is highlighted with a red box. An orange arrow points from this button to a larger 'Finalizar' button in a separate box below the screenshot.

Sesión	Profesional	Acciones
grupo mañana- Alzheimer	Raquel Gutiérrez	Ver Editar Duplicar Generar Similar +:Ai Añadir
memoria	Raquel Gutiérrez	Ver Editar Duplicar Generar Similar +:Ai Añadir
Velocidad de procesamiento	Raquel Gutiérrez	Ver Editar Duplicar Generar Similar +:Ai Añadir
Carmen Ferrando diciembre	Raquel Gutiérrez	Ver Editar Duplicar Generar Similar +:Ai Añadir

Per aggiungere sessioni al programma, premi il pulsante **"Aggiungi"**.

Puoi eseguire diverse azioni:

- Visualizza
- Modifica
- Duplica
- Genera simile

Quando hai terminato di configurare il programma, premi **"Finalizza"** in basso a destra per salvarlo.

Puoi modificarlo in un secondo momento, se necessario.

Finalizar

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

The screenshot displays the neuronUP web application interface. The top navigation bar includes 'neuronUP', 'Área de trabajo', 'Gestión de usuarios', 'Academy', 'Administración', and a language dropdown set to 'Español'. The left sidebar contains navigation options: 'Filtrar usuario', 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas' (selected), 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main content area is titled 'Programas digitales' and features a search bar, a calendar view for 'Noviembre 2025', and a list of digital programs. A modal window titled 'Programa Mayores' is open, showing details for a program created by 'Raquel Gutiérrez' in Spanish, for ages 40-50, with 2 sessions. The 'Asignar' button is highlighted with an orange box, and an orange arrow points to the 'ASIGNAR PROGRAMA A USUARIOS' dialog. This dialog shows a list of users and a 'Continuar' button.

Per assegnare un programma, premi su di esso e seleziona "Asigna", oppure trascinalo sulla data in cui desideri programmarlo.

- Seleziona uno o più utenti a cui vuoi assegnare il programma.
- Scegli la data di inizio.
- Attiva "Programma per casa" se l'utente lavorerà da remoto.

Per avviare una sessione, questa deve essere assegnata e programmata all'interno di un intervallo di date che includa il giorno corrente.

Una volta assegnata la sessione, premi **"Continua" (4)**.

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

The screenshot displays the 'Programas digitales' management interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Filtrar usuario', 'Actividades', 'Sesiones', 'Programas' (selected), 'Resultados digitales', and 'Recursos extra'. The main area shows a list of digital programs. A modal window titled 'Programa Mayores' is open, showing details for a program created by 'Raquel Gutiérrez' in Spanish, with 40-50 sessions and 2 sessions per week. The 'Asignar' button is highlighted with an orange box and an arrow pointing to the 'Planificar programa' step in the modal's progress bar. The 'Planificar programa' step is active, showing the start date 'martes, 11 de noviembre de 2025' and 2 sessions. Below, there are three configuration sections: 'Selecciona los días de la semana que se trabajarán las sesiones del programa' (with 'Martes' selected), '¿Qué frecuencia de trabajo seguirás con las sesiones del programa?' (with 'Cada semana' selected), and '¿Cuántos días tiene el usuario para hacer cada sesión?' (with '1 día' selected). A 'Continuar' button is at the bottom.

Nella scheda Pianifica programma:

- si selezionano i giorni della settimana in cui verranno svolte le sessioni,
- si definisce la frequenza di lavoro
- e si stabilisce quanti giorni avrà l'utente per completare ogni sessione.

Quando la configurazione di questi parametri è terminata, premi **"Continua"** per procedere.

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

Programa Mayores

1 Asignar programa 2 Planificar programa 3 Configurar programa

Comportamiento del programa

Configura el programa para que se comporte en función de las necesidades de tu usuario

1 **Sesión con supervisión**
El paciente puede salir de la sesión, saltar actividades o ver soluciones
☒ SÍ

2 **Confirmar fin de la actividad**
Es necesario confirmar el fin de la actividad para seguir con la sesión
☒ SÍ

3 **Evaluación del paciente**
El paciente evaluará su desempeño tras finalizar cada actividad
☒ SÍ

4 **Botón continuar**
Las actividades no continúan hasta que se pulse en el botón continuar
☒ SÍ

5 **Asignar programa**

Nell'ultima scheda, configura il programma in base alle esigenze del tuo utente. Puoi scegliere tra quattro opzioni di comportamento per le sessioni:

- **Sessione con Supervisione (1):** l'utente può uscire dalla sessione, saltare attività o visualizzare le soluzioni.
- **Conferma fine attività (2):** è necessario confermare la fine dell'attività per proseguire con la sessione.
- **Valutazione del paziente (3):** l'utente valuterà le proprie prestazioni al termine di ogni attività.
- **Pulsante continua (4):** le attività non proseguono finché non si preme il pulsante continua.

Una volta configurato, premi il pulsante **“Assegna programma”**.

Programmi

CREARE UN PROGRAMMA

Nombre del programa:
Programa Mayores

Ver programa Editar programa Duplicar programa Eliminar programa

Nombre de la sesión del programa:
grupo mañana- Alzheimer
Andrea Santos Sin empezar

Configuración
La duración máxima es de 15 días

Fecha de inicio: 11/11/2025 Fecha de fin: 11/11/2025

Sesión para casa: NO

Configurar sesión

Guardar

Asignada por: Raquel Gutiérrez Idioma: Español

mañana, alzheimer grupo N° de actividades: 5


Áreas predominantes: M. semántica, M. episódica

Empezar Generar Similar * AI Ver Editar Duplicar Eliminar

Premi **"Inizia"** affinché il tuo utente possa avviare il suo programma.



Una volta avviato il programma, puoi seguirne l'avanzamento tramite un indicatore visivo che mostrerà i progressi dell'utente.

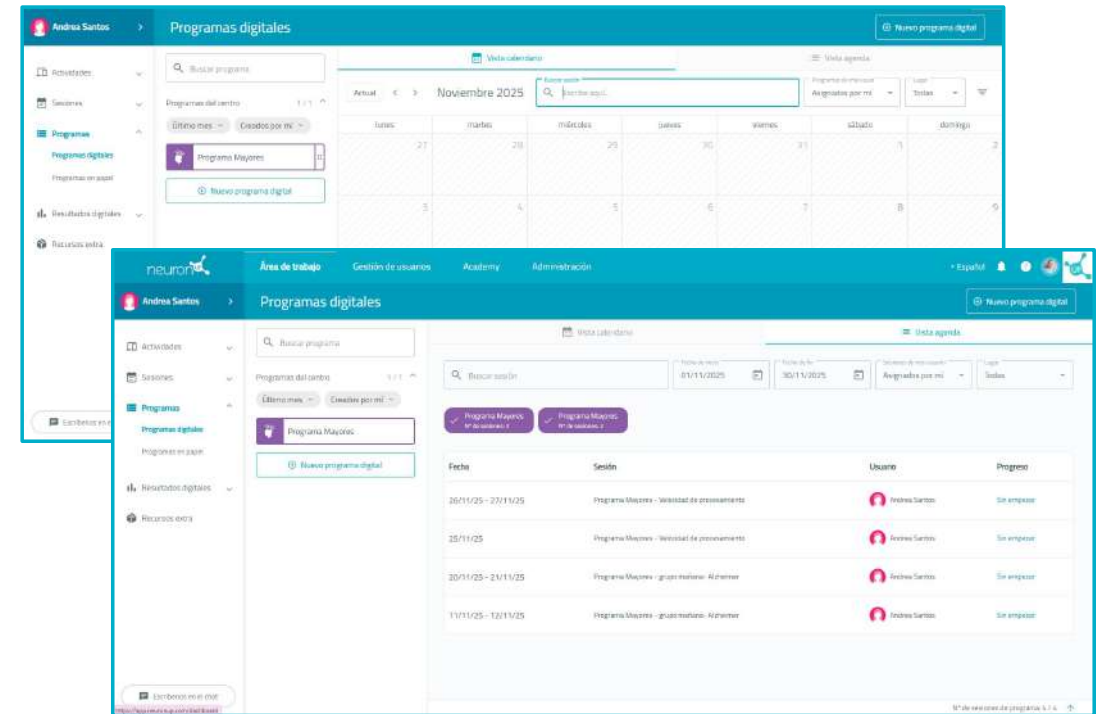

Puoi visualizzare e organizzare i tuoi programmi con la **vista calendario** o con la **vista agenda**.

7. Risultati



Risultati

Per visualizzare i risultati ottenuti da un utente che ha lavorato con diverse attività di NeuronUP Rehab:

- Accedi a **Risultati digitali** (2) dall'Area di lavoro (1).
- **Seleziona un utente** che abbia lavorato sulla piattaforma.


Le informazioni sono organizzate in 4 sezioni:

NeuronUP Score (3)*: mostra i grafici di evoluzione delle prestazioni di un utente in NeuronUP Rehab.

Risultati delle attività (4): mostra le prestazioni dell'utente nelle attività, dettagliate per esercizio (tempo, esercizi superati, errori, omissioni...).

Risultati delle sessioni: mostra le prestazioni dell'utente a livello di sessione (tempo di sessione, sessioni completate...).

Risultati dei programmi: mostra le prestazioni dell'utente a livello di programma (insieme di sessioni).

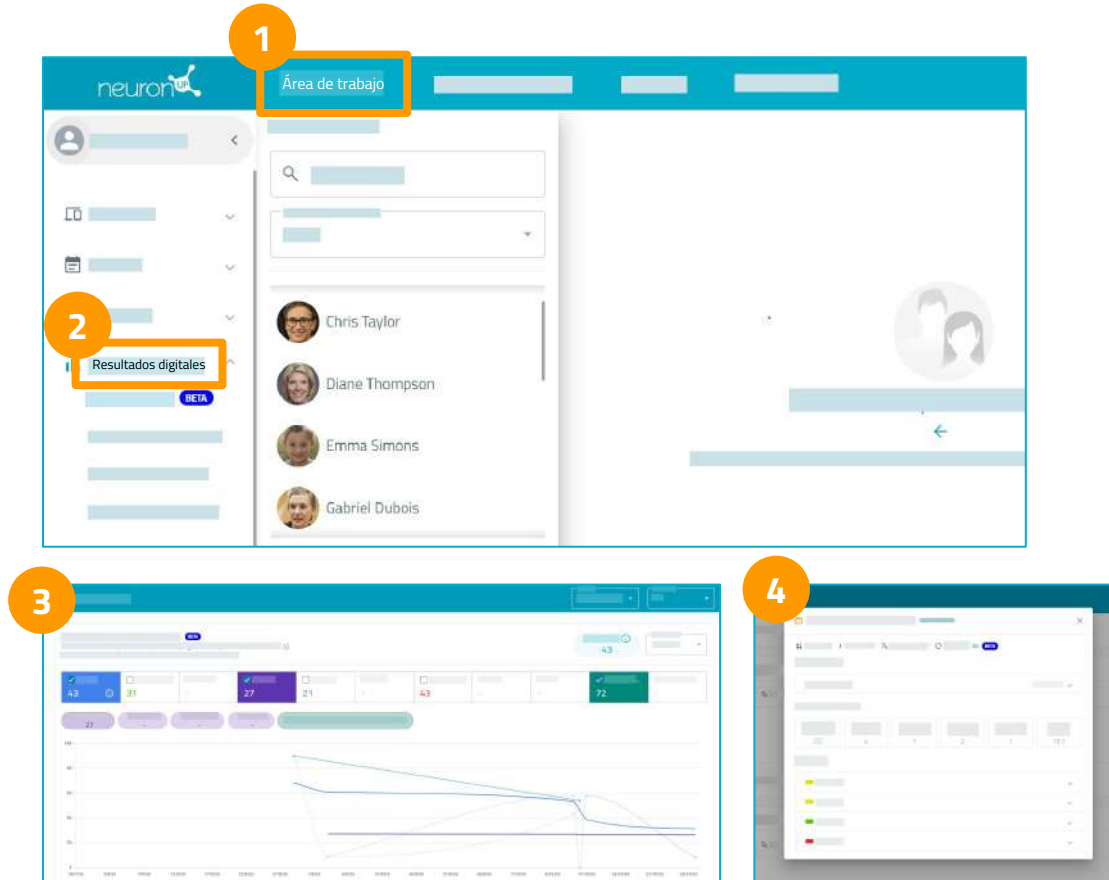

8. Come lavorare con più utenti contemporaneamente

ogni utente su un dispositivo diverso

Come lavorare con più utenti contemporaneamente


OGNI UTENTE SU UN DISPOSITIVO DIVERSO

Puoi far lavorare i tuoi utenti su **dispositivi diversi allo stesso tempo**.

Cosa ti serve?


- **Tanti dispositivi** (computer, portatili o tablet) quanti sono **gli utenti**.
Ad esempio, per far lavorare 4 utenti contemporaneamente, servono 4 computer o 4 tablet.
- **Un profilo utente per ciascun** utente (vedi sezione "Creare un utente").
- **Una sessione** con le attività da svolgere (vedi sezione "Creare una sessione").

Esempio

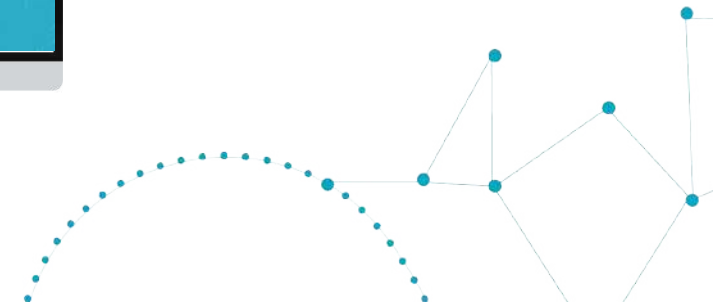


Come lavorare con più utenti contemporaneamente

PASO A PASO (1/3)

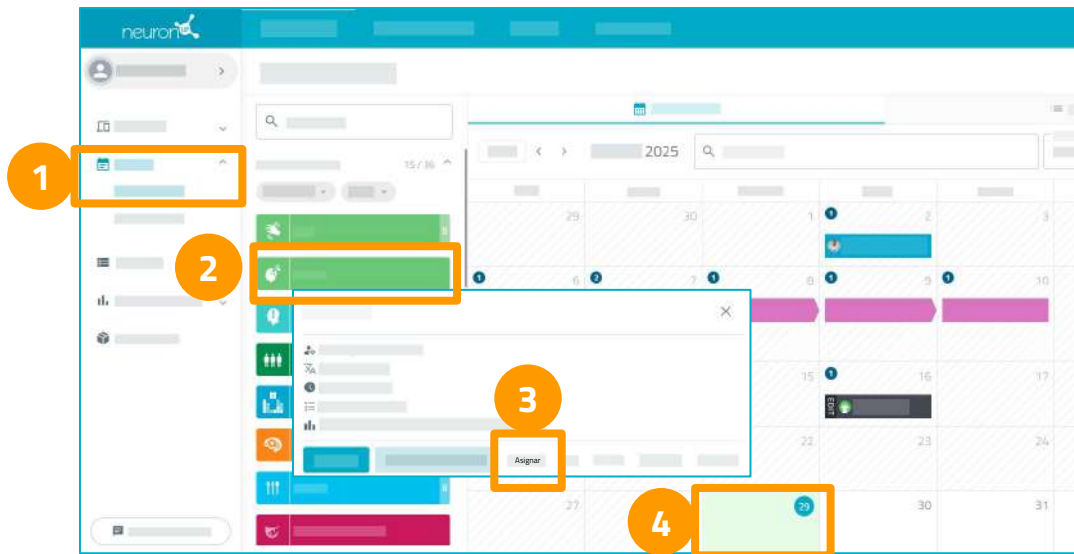

1. Dal menu laterale dell'area di lavoro, premi **"Sessioni"** e poi **"Sessioni digitali"** (1).
2. Premi su una sessione (2).
3. Premi "Assegna" (3) oppure trascinala fino al giorno desiderato nel calendario (4) per assegnarla.
4. Nell'elenco degli utenti (5), scegli quelli che lavoreranno con questa sessione.

Continua nella pagina successiva.

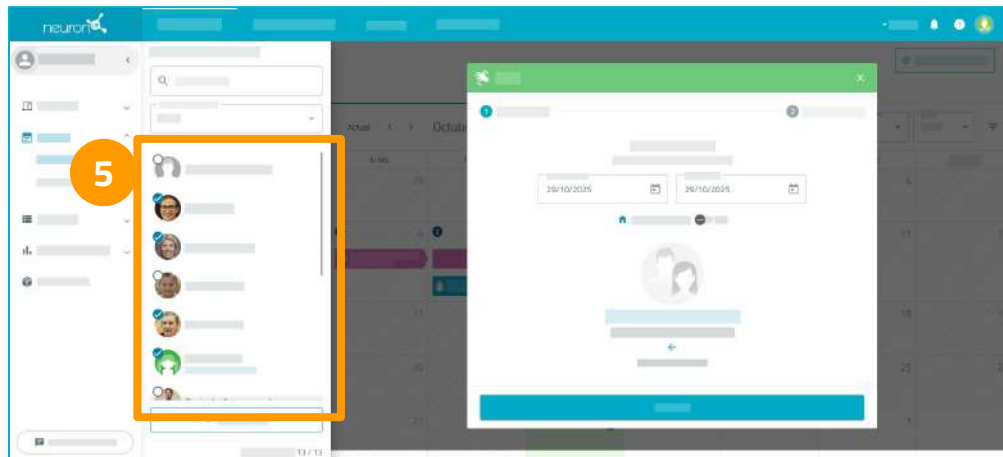


Come lavorare con più utenti contemporaneamente

PASO A PASO (2/3)



Da questo punto, ripeti il processo su ciascun dispositivo.

1. **Accedi a un dispositivo** con le tue credenziali di accesso.
2. Vai al **calendario delle sessioni** (1).
3. **Seleziona la sessione** dell'utente (2).
4. Premi **"Inizia"** (3).

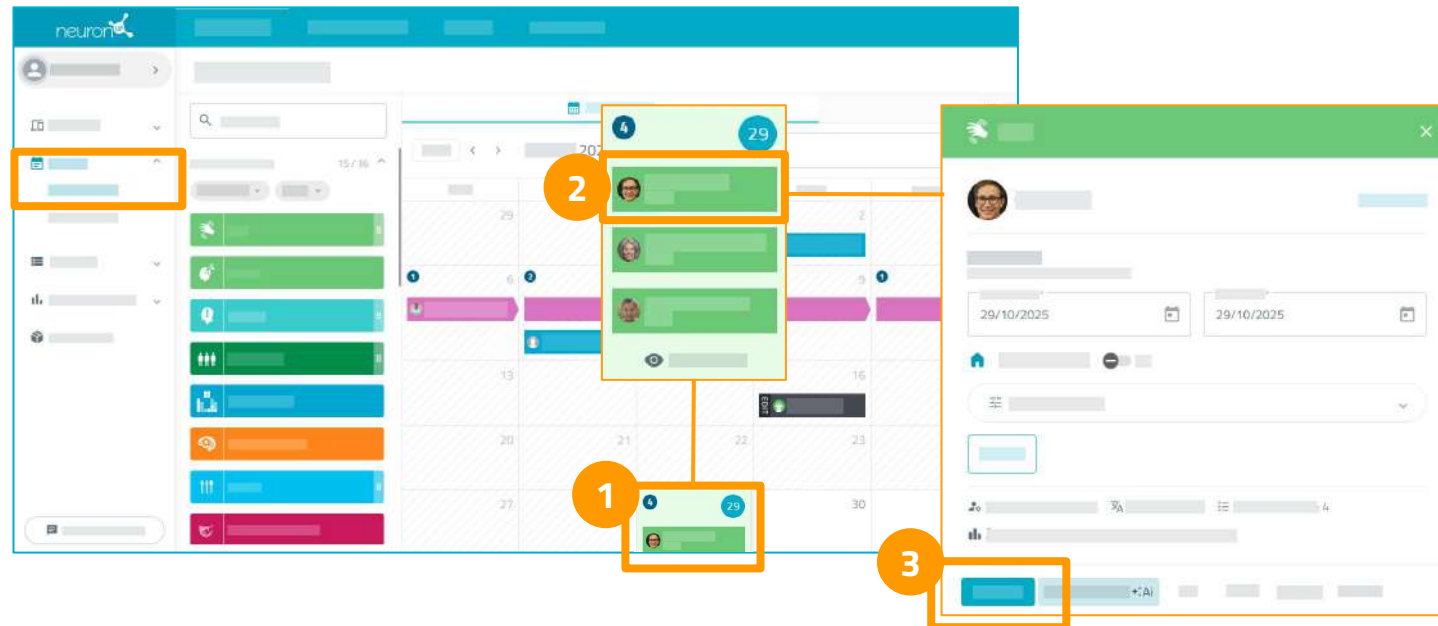

Continua nella pagina successiva.

Come lavorare con più utenti contemporaneamente

PASO A PASO (3/3)

Da questo punto, la sessione è sicura per l'utente.

L'utente può accedere solo alla propria sessione.

Premendo "Inizia" (1), la sessione inizierà con la prima attività.

Ripeti il processo descritto nei passaggi precedenti.

Accedi con le tue credenziali di accesso sul dispositivo del secondo utente, e così via.



9. Come lavorare con utenti da remoto

Sessioni per casa

Come lavorare con utenti da remoto

SESSIONI PER CASA

The screenshot shows the NeuronUP2GO user profile interface. The main profile area is titled 'User 01'. On the right, there is a 'NeuronUP2GO' section with a list of users, including 'user_01'. A button labeled 'Editar datos de acceso' (1) is highlighted. Below this, a modal window is open for 'User 01', showing input fields for 'user_01' (2) and 'Contraseña' (3), and a 'Guardar' (4) button.

Crea i dati di accesso a NeuronUP2GO nel profilo dell'utente.


1. Crea un utente (vedi la sezione sulla creazione degli utenti) oppure seleziona l'utente desiderato.
2. **Crea i dati di accesso a NeuronUP2GO.** Dal profilo dell'utente, premi "Modifica dati di accesso" (1).
3. Inserisci un nome utente (2), una password (3) e premi "Salva" (4).



Condividi in modo sicuro i dati di accesso con il tuo utente per evitare accessi non autorizzati.

Come lavorare con utenti da remoto

SESSIONI PER CASA

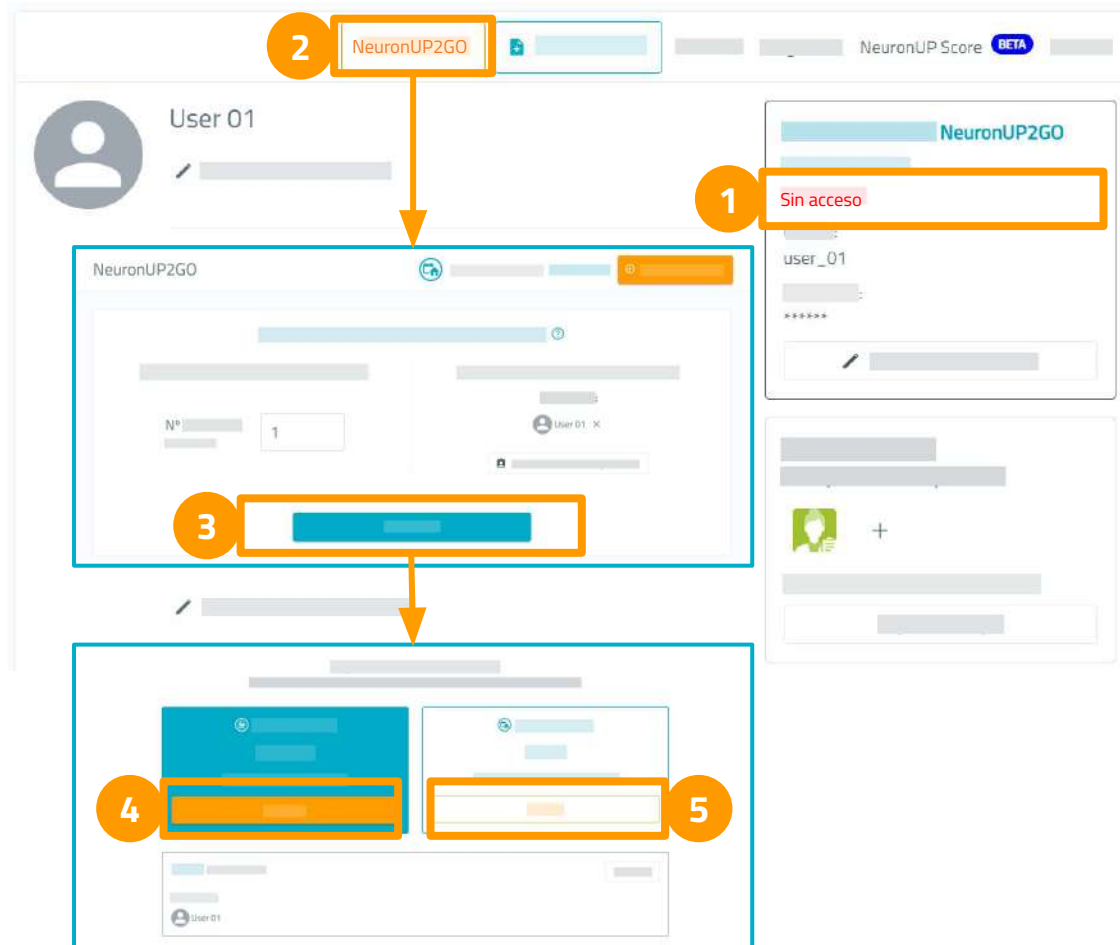

Assegna l'accesso a NeuronUP2GO all'utente

Se l'utente ha già accesso, passa alla pagina successiva.



Se il tuo utente risulta "Senza accesso" (1), assegnagli l'accesso a NeuronUP2GO.

1. Premi il pulsante NeuronUP2GO (2).
Puoi acquistare mesi aggiuntivi o assegnare mesi già disponibili. Assicurati che sia selezionato l'utente con cui desideri lavorare.
2. Premi il pulsante "Concedi accesso"
3. (3).Acquista (4) o assegna gli accessi disponibili (5).

Al termine del processo, nel profilo dell'utente, dove prima compariva "Senza accesso" (1), verrà ora mostrata la data fino alla quale l'utente ha accesso per svolgere sessioni da remoto.

Come lavorare con utenti da remoto

SESSIONI PER CASA

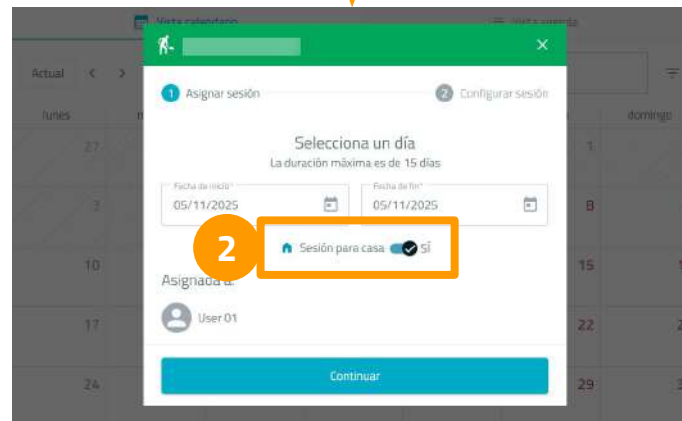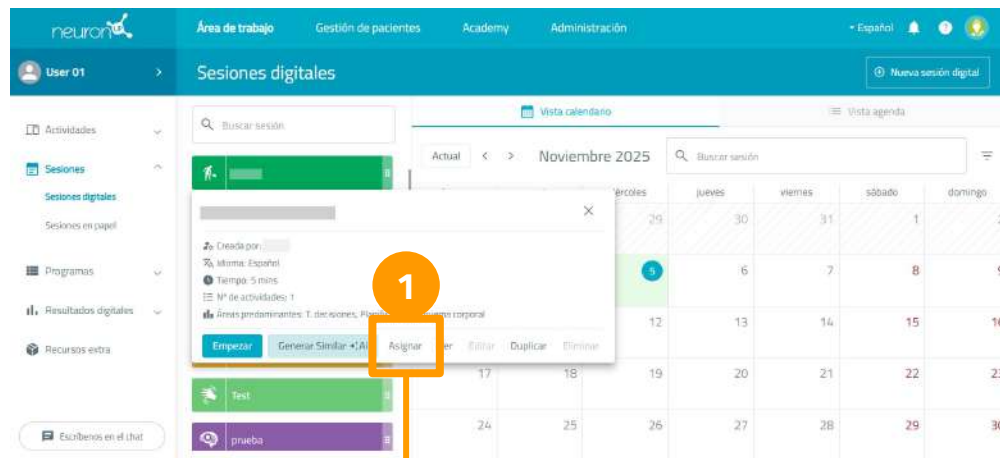

Crea e/o assegna una sessione per casa

Se hai bisogno di aiuto per creare una sessione, consulta la sezione "Lavorare con le sessioni".

1. Vai alla sezione delle sessioni digitali, seleziona la sessione dall'elenco e premi "Assegna" (1) oppure trascinala sul giorno desiderato nel calendario.
2. Seleziona l'intervallo di giorni in cui l'utente avrà la sessione disponibile.
3. Attiva il filtro **"Sessione per casa"** (2).
4. La sessione programmata apparirà nell'elenco con l'icona di una casa. Quando il tuo utente si conetterà da casa e inizierà a svolgere la sessione, potrai monitorarne l'evoluzione grazie all'indicatore mostrato nell'immagine.



Come lavorare con utenti da remoto

SESSIONI PER CASA: ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Spiega al tuo utente come accedere a NeuronUP.

1. Per accedere a NeuronUP, l'utente deve effettuare il login su <https://app.neuronup.com/>
2. L'utente deve utilizzare le credenziali precedentemente create dal professionista (**nome utente** e **password**).
3. Nel caso in cui l'utente dimentichi la password, deve contattare il proprio professionista per modificarla.

Puoi utilizzare questa guida per spiegare al tuo utente come accedere da casa alla propria sessione:

<https://neuronup.com/it/wp-content/uploads/2024/03/IT-Guida-NeuronUP.pdf>

10. Risorse di supporto



Recursos de apoyo

Centro assistenza – documentazione in diversi formati per conoscere a fondo la piattaforma:

<https://neuronup.com/it/centro-di-assistenza-neuronup/>

FAQ – consulta le domande più frequenti aggiornate:

<https://neuronup.com/it/faq/>

Risorse per professionisti – contenuti per favorire l'utilizzo di NeuronUP: presentazioni, immagini, promemoria per i tuoi utenti, logo di NeuronUP da condividere sul tuo sito web, casi d'uso, ecc.

<https://neuronup.com/it/risorse-per-i-clienti-di-neuronup/>

<https://neuronup.com/it/download/>

Newsletter – email settimanale con notizie, risorse, casi clinici, webinar e formazioni, ecc.

<https://neuronup.com/it/newsletter/>

NeuronUP Labs – strumenti per ricercatori:

<https://neuronup.com/it/neuronup-labs/>

