
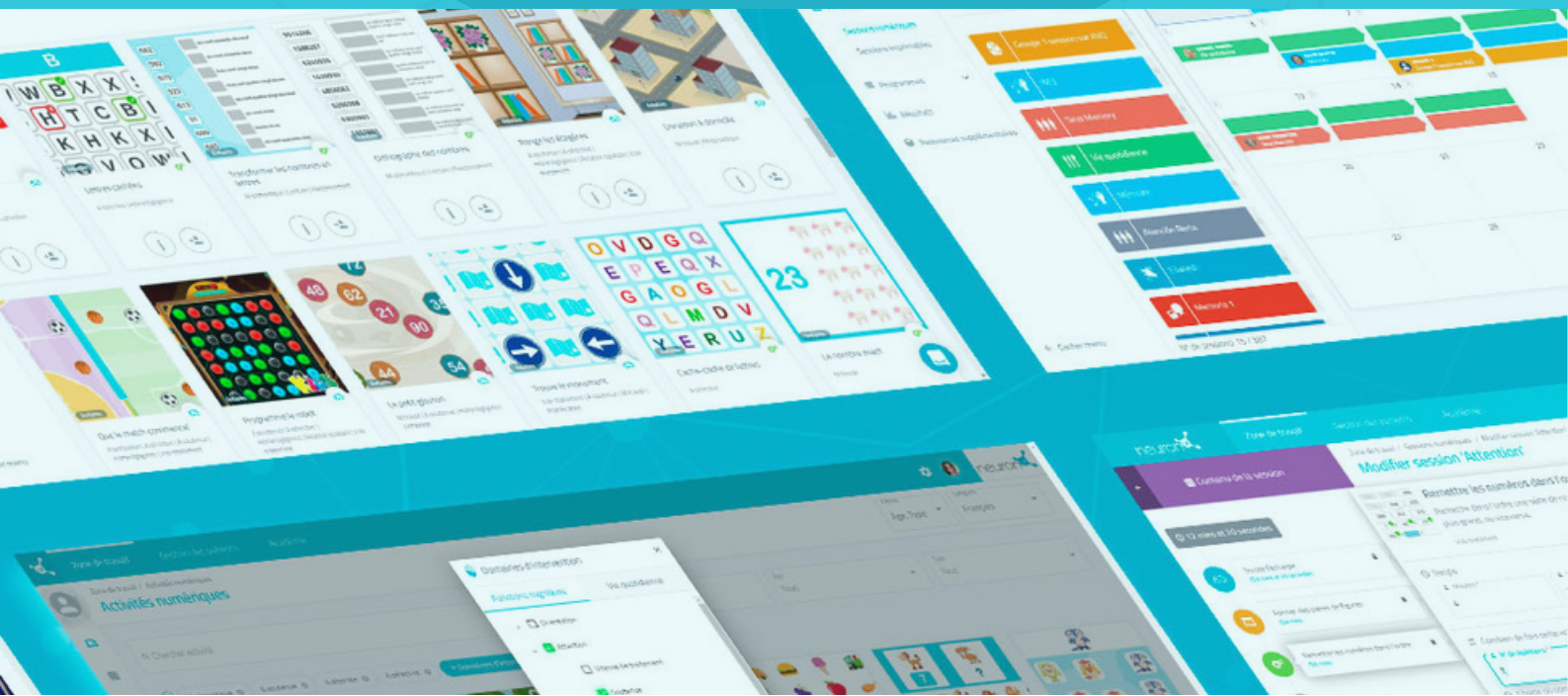


MANUAL


TRABAJAR CON PROGRAMAS

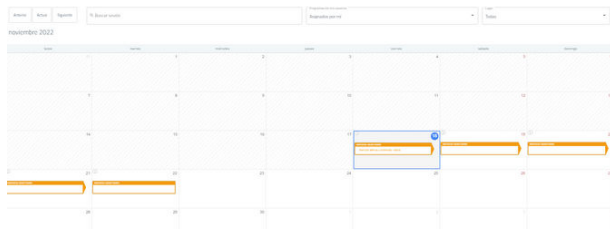

Un programa es un conjunto de sesiones.


La creación de programas te permite planificar tu trabajo durante varios meses en pocos minutos. Descubramos cómo a continuación.

1. Pulsa en "Programas digitales"

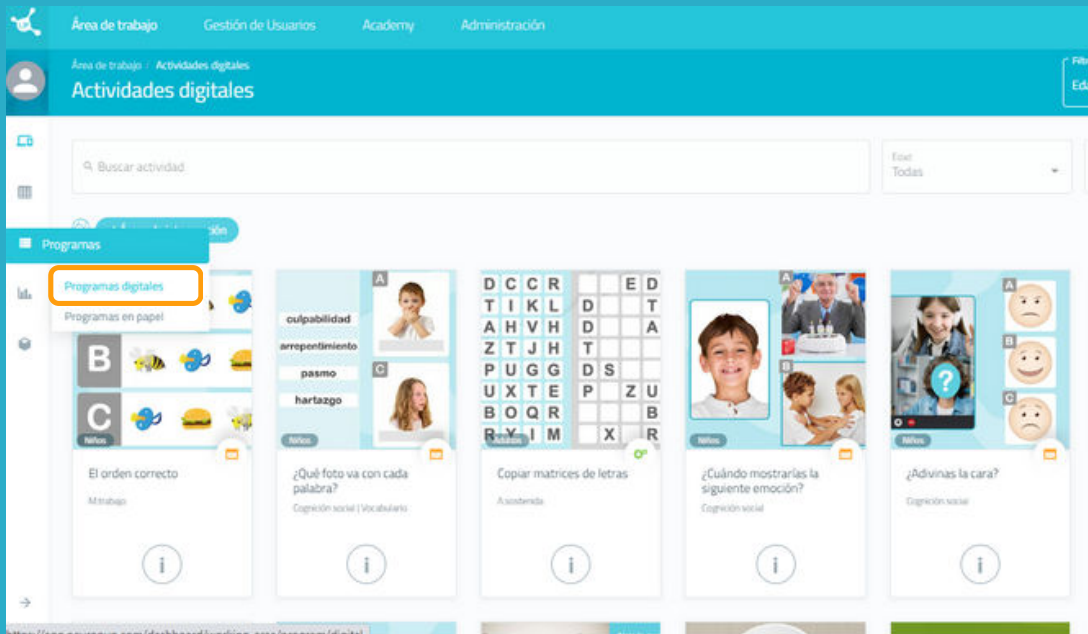

Para empezar, pulsa en "Programas" y luego en "Programas digitales", en la parte izquierda de tu pantalla.

2. Pulsa en "Nuevo programa digital"

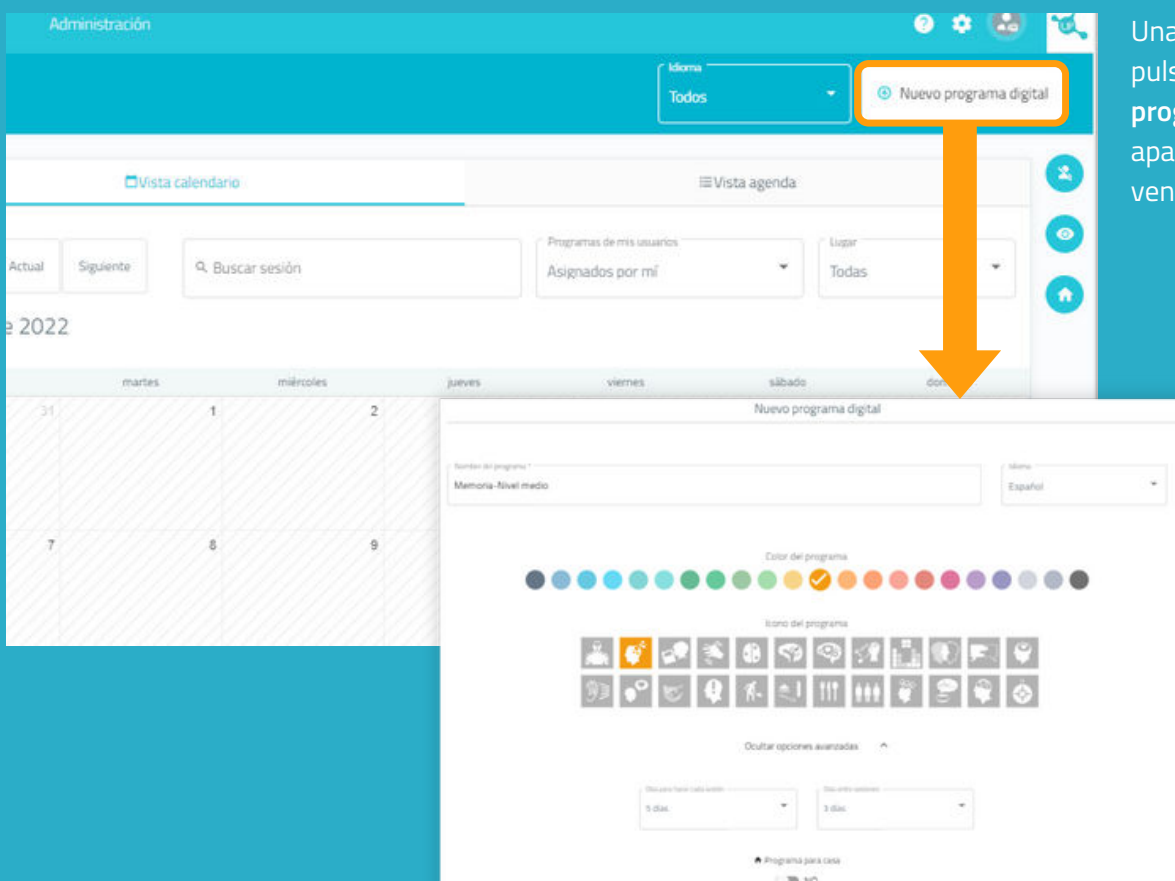

Una vez que hayas pulsado en "Nuevo programa digital", aparecerá la siguiente ventana.

3. Rellena la información básica del programa

1. Nombra tu programa.
2. Elige un icono y un color.

Opcional:


- Pulsa en "Opciones avanzadas".
- Determina el número de días que tu usuario tendrá para hacer cada sesión y el número de días de descanso entre cada una.
- Añade **etiquetas**. Te ayudará a encontrar tu programa más fácilmente.
- Agrega una **descripción**.
- Activa o desactiva **acciones avanzadas**.

3. Pulsa en "Crear".

4. Añade las sesiones

La base del programa ya está creada. Ahora tienes que añadir las sesiones que quieras.


5. Guarda el programa

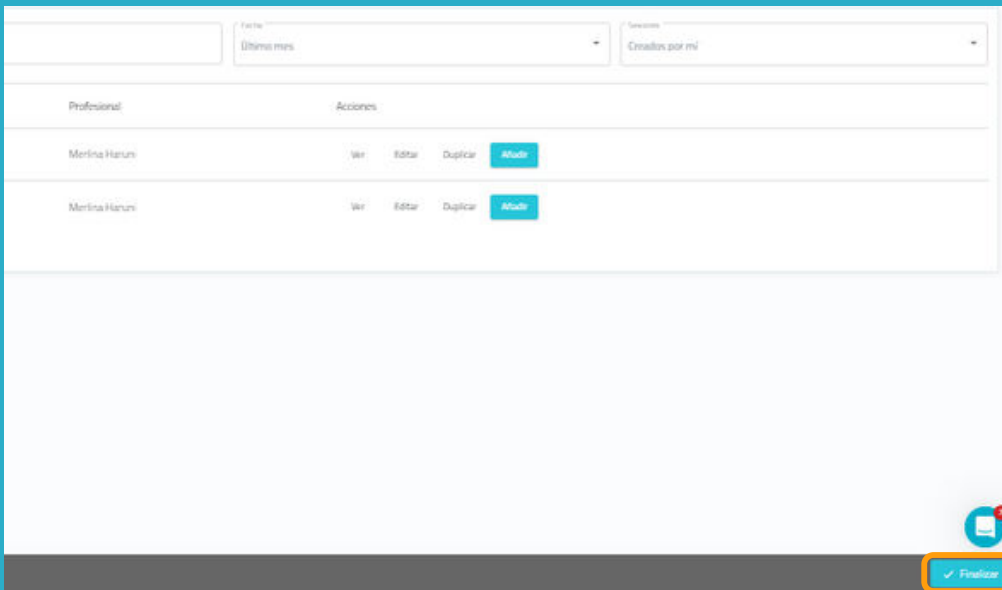

Una vez que hayas configurado el programa, pulsa en "Finalizar", en la parte inferior derecha, para guardarlo.

Puedes modificarlo más tarde si es necesario.

6. Asigna el programa

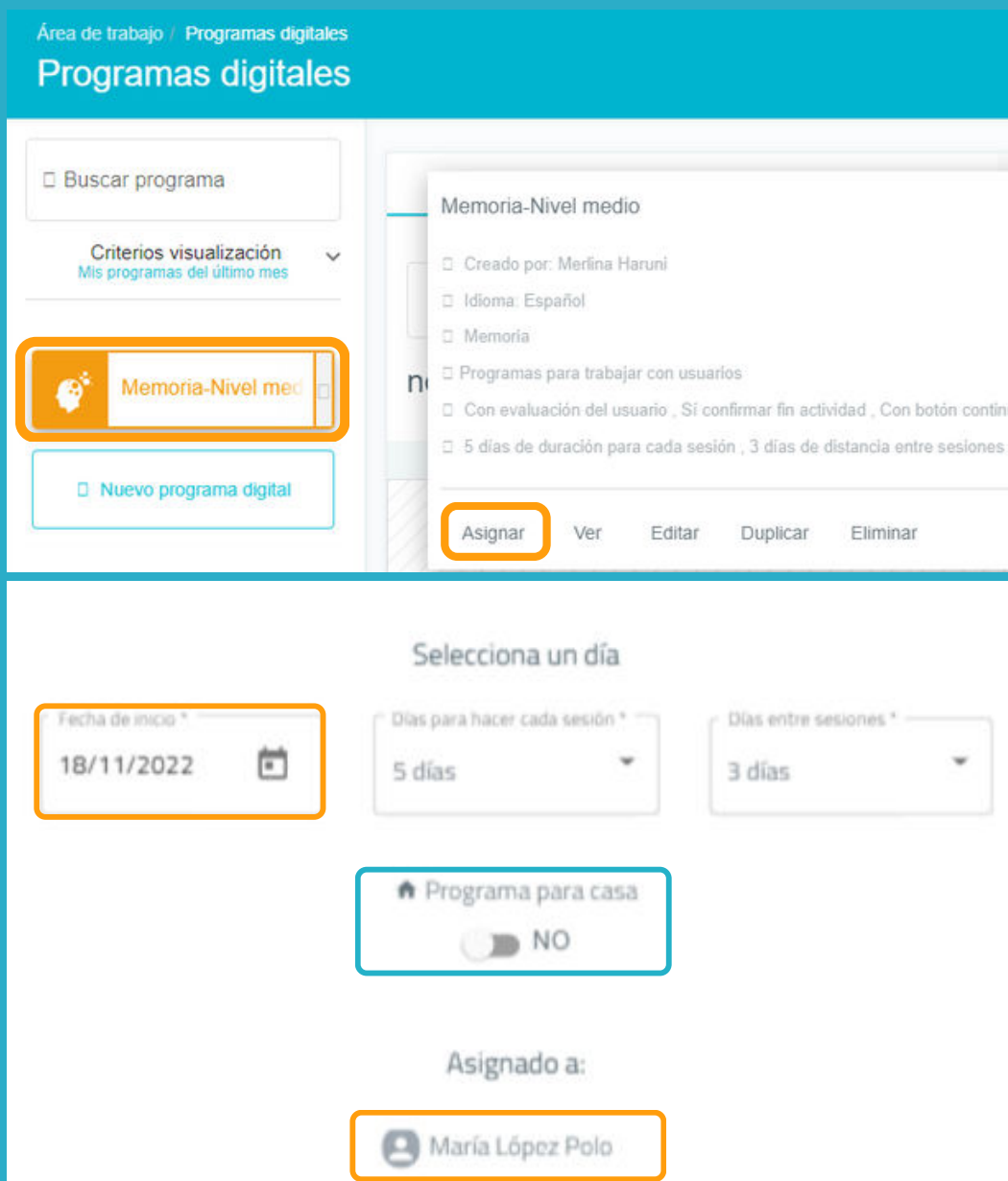

Pulsa en el programa y elige "Asignar" o arrástralo a la fecha deseada para asignarlo.


Selecciona uno o varios usuarios a los que asignar el programa.

*Ver Manual de trabajar con varios usuarios simultáneamente.

Activa el filtro de sesión en casa si quieres que tu usuario trabaje a distancia*.


*Ver Manual de NeuronUP2GO.

7. Inicia el programa

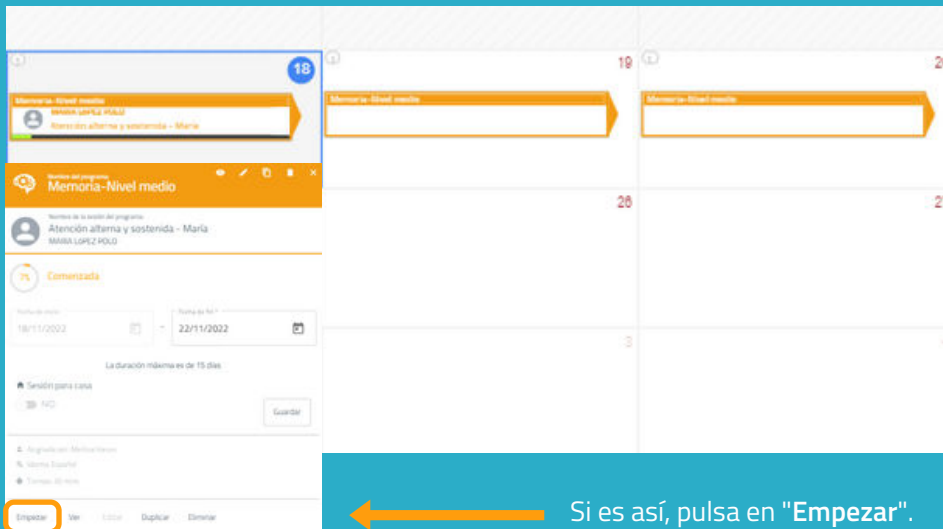

Para iniciar un programa debe estar asignado a un **usuario** y estar dentro del rango de fecha en la que estamos, como en el ejemplo.

8. Sigue el desarrollo del programa

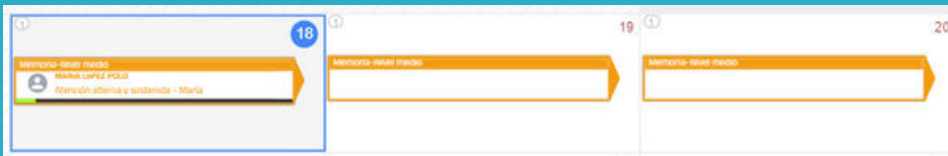

Una vez iniciado el programa, puedes seguir su progreso gracias a la aparición de un indicador.

Vista calendario / Vista agenda

Puedes ver y organizar tus programas con la vista calendario (izquierda) o con vista agenda (derecha).

